

GIMNASIA PASIVA ROSA

Manual de Usuario

MARCA: SILUET PERFECT.






Introducción


Al crear un pulso electrónico para estimular puntos especiales en el cuerpo, este dispositivo de ELECTROTHERAPIA trabaja de manera efectiva en el músculo.

Alivia varios dolores corporales, promueve la circulación sanguínea, acelera el metabolismo y ayuda a perder peso, levantando y reafirmando la piel. Además, también ayuda al agrandamiento de los senos.

Estructura

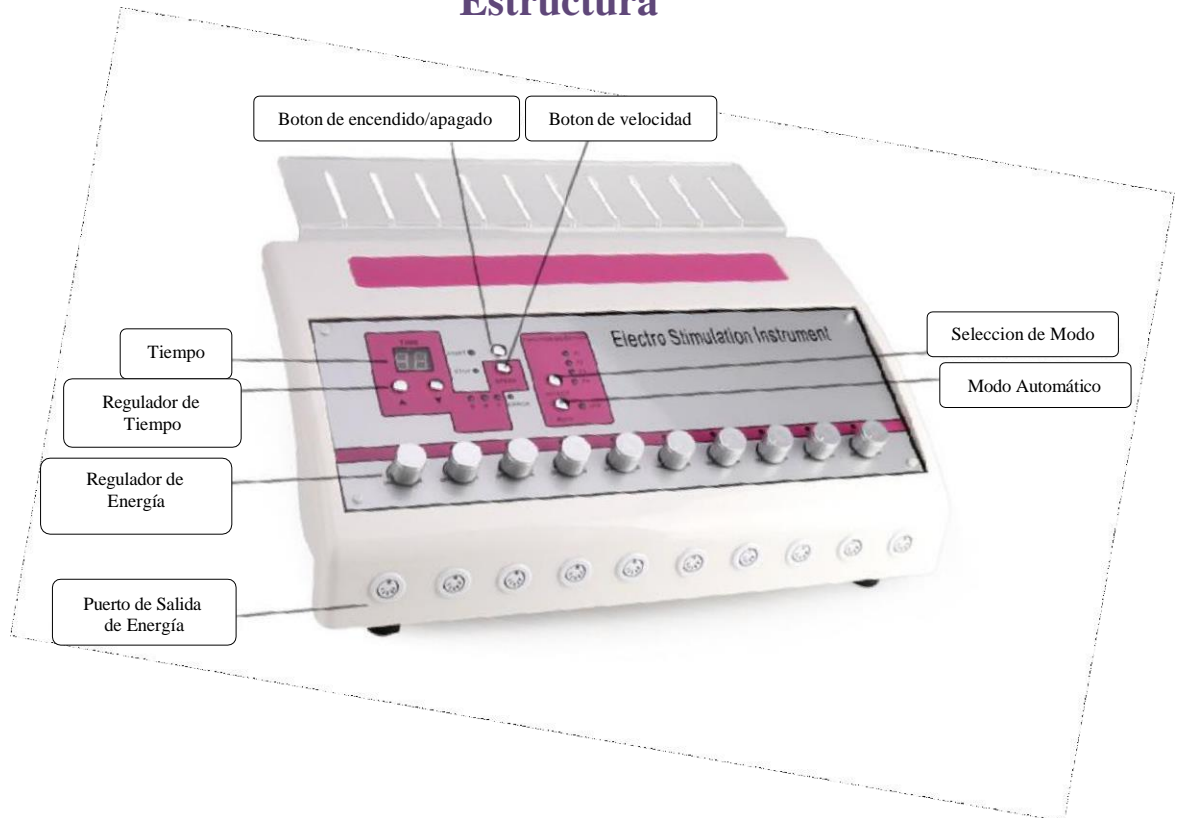

Piezas

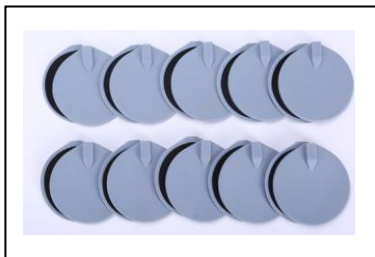

Parches electroconductores



Almohadillas de electrodos mamarios



Línea de electrodos



Vendaje

Funciones y Aplicaciones.

- Reduce la celulitis en brazos, abdomen, glúteos, muslos y pantorrillas para adelgazar.
- Promueve la circulación sanguínea de hombros, cuello, espalda, cadera y cintura y vértebras para relajarse.
- Alivio de artritis, artralgias, reumatismo.
- Desatascar la glándula mamaria para embellecer los senos.

Instrucciones.

1) Modo de trabajo

Modo singular:

1. Enchufe el cable de alimentación.
2. Conecte la almohadilla del electrodo al puerto de salida del electrodo y coloque la almohadilla del electrodo en el cuerpo de acuerdo con los diagramas a continuación.
3. Ajuste cada intensidad de salida al mínimo con el botón Energy Adjuster.
4. Encienda la máquina.
5. Presione el botón SELECT para seleccionar el modo de trabajo. Para la gente promedio, se recomienda F3.
6. Presione el botón SPEED para seleccionar la velocidad de trabajo.
7. Pulse el botón Time Adjuster para configurar el tiempo de trabajo (0 - 59 minutos).
8. Ajuste la energía de salida con el botón Energy Adjuster y consulte con el cliente la comodidad.

Modo Automático:

1. Repita los pasos 1-4.
2. Presione el botón AUTO para configurar el modo de trabajo automático, luego la máquina funcionará a través de programas preestablecidos.
3. Presione el botón SPEED para seleccionar la velocidad de trabajo.
4. Pulse el botón Time Adjuster para configurar el tiempo de trabajo (0 - 59 minutos).
5. Ajuste la energía de salida con el botón Energy Adjuster y consulte con el cliente la comodidad.


Tratamiento de mamas:

Conecte las almohadillas mamarias de los electrodos (igual que la almohadilla del electrodo) a uno de los puertos de salida del electrodo y realice el mismo tratamiento que con la almohadilla del electrodo.


Nota: Después del tratamiento, ajuste cada intensidad de salida al mínimo girando el botón de ajuste de energía.

2) Diagrama de Trabajo


1. Estómago.
2. Estómago hacia abajo.
3. Cintura.

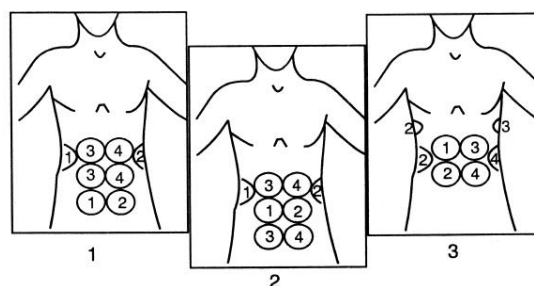


- 4. Los lados de la cintura y la parte inferior del estómago.
- 5. Muslo interno y muslo externo.
- 6. Muslo delantero.

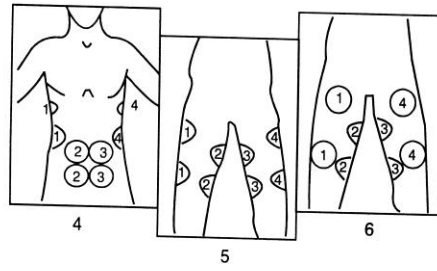


- 7) Parte superior del muslo, parte interna del muslo y parte superior de la rodilla.
- 8. Nalga superior, inferior y muslo externo.
- 9. Glúteos inferiores, muslos externos y pantorrillas.

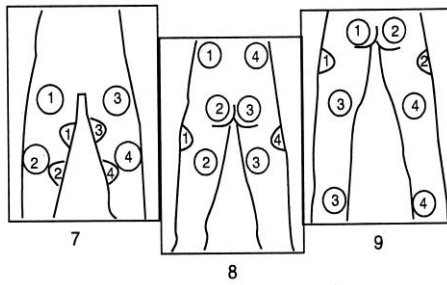


- 10. Axila interior y superior.

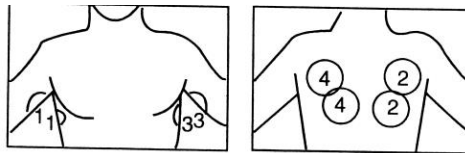


- 11. Brazo interior y exterior.

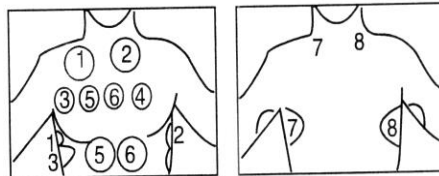

- 12. Pecho.

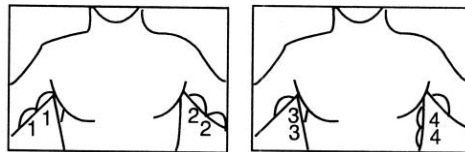

- 13. Senos

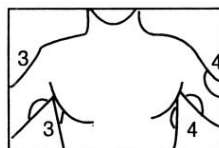

3) Advertencias

No utilice la máquina en estos tipos de piel:

1. Piel sensible.
2. Sarpullido en la piel.
3. Piel dañada, inflamada o infectada.
4. Piel hinchada.
5. Cicatriz quirúrgica de menos de 12 meses.

4) Prohibir en personas con...

Nunca opere este equipo en una persona que tenga o sufra las condiciones médicas que se describen a continuación:

1. enfermedad cardíaca
2. soplo cardíaco o frecuencia cardíaca irregular
3. Tiene un marcapasos u otro tipo de equilibrador de frecuencia cardíaca.
4. Embarazo
5. Epilepsia
- 6 alcoholismo
- 7 úlceras
8. Enfermedad del estómago, intestino, hígado o páncreas.
9. Cáncer de mama.
- 10.- Someterse a tratamiento para cualquier forma de cáncer.
11. Se sometió a una cirugía mayor en el último año.
- 12 asma
- 13 Resfriado, gripe o malestar estomacal
14. Cualquier enfermedad grave o dolencia no mencionada anteriormente.

5) Aviso de seguridad

1. No desmonte el equipo ni intente realizar ninguna otra operación que no se haya indicado en nuestras instrucciones.
2. No monte ni utilice este equipo con las manos mojadas o mientras esté cerca del agua.
3. No vierta el líquido en la máquina.
4. Saque el enchufe del enchufe cuando se cumplan las condiciones siguientes.
A-El equipo tocó líquido;
B-El equipo tiene un olor anormal, humo o ruido fuerte;
El cable C está roto;
D-El equipo se cayó y se rompió;
5. No coloque nada sobre los cables; no coloque el equipo en ningún lugar donde alguien pueda pisar el cable.
6. Extraiga el cable de alimentación después de usarlo por seguridad.
7. No coloque nada en el enchufe del equipo, de lo contrario podría provocar un incendio o tocar la electricidad.
8. No coloque el equipo en ningún lugar que no pueda sostenerse de manera estable para evitar que se dé la vuelta y se dañe.

Contenido del empaque

1. Caso de anfitrión.....	1
2. Almohadillas de electrodos	10
3. Almohadillas de electrodos mamarios	2
4. Línea de electrodos.....	12
5. Vanda.....	1
6. Cable de alimentación	1
7. Manual.....	1

Especificaciones.

Voltaje de entrada	AC110V/60 Hz
Corriente de trabajo	50 mA (max)
Energía	40W (max)
Salida de energía	10 Channels
Velocidad	3 (Adjustable)
Reducir el tiempo	0.1 ~ 5 S
Tiempo suelto	0.1 ~ 5 S
Numero de Parches	12 Pairs
Tamaño del paquete	52*35*34 CM
Peso bruto	6 KG

Clasificación de Riesgos Sanitarios

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a un nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos. Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283,

1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.

Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación:

Documentación oficial. Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio.

Rotulación. Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención médica y un rótulo que indique el horario de su asistencia.

Espacio físico externo. El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores.

Espacio físico interno. El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables. Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios.

Expediente clínico. En relación a este punto, debes tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal como lo establece la NOM-004-SSA3-2012.

En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso.

Documentación interna. La clínica consultorio debe tener hoja diaria para el registro de Pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimiento y fecha de expedición.

Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio donde se detallen las políticas de atención a pacientes.

Seguridad e Higiene. El área comprendida para consultorio debe contar con un bote para bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben de llenar menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el aseo, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos utensilios. Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que esta no sea mezclada con la basura municipal.

Prevención. El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas.

En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo: Artículo 107.- ... DE LA LEY de salud de la ciudad de México

En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedan sujetos a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles

