

Manual de uso

Desintoxicador




Antes de usar esta máquina, asegúrese de leer a través del manual de instrucciones.

Descripción:

Naturaleza iónica del cuerpo humano y sus efectos:

La forma en que funciona la ionización es una molécula de agua compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Cuando la molécula pierde un átomo de hidrógeno, la molécula OH restante toma una carga negativa. Una persona sana debe contener un 80% de electrones negativos y un 20% de electrones positivos. Debido a la mala dieta y el alto estrés, tendemos a acumular y almacenar cantidades excesivas de productos de desecho, como diáticos, lácticos, pirúvicos, uricos, carbónicos, acéticos, butíricos y ácidos hepáticos.

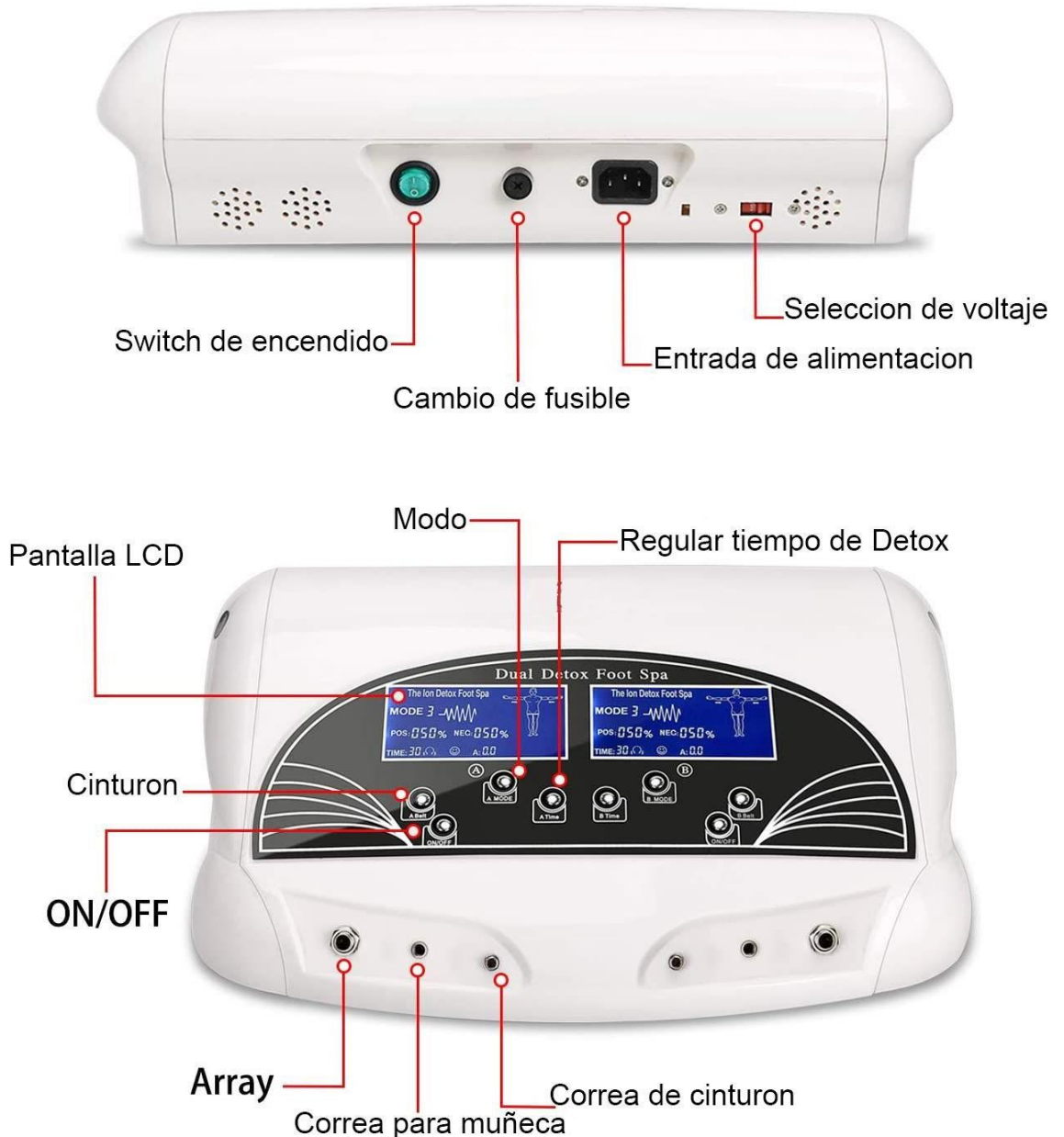

¿Cómo usarlo?

- 1. Vierta el agua en la bañera, mantenga el agua cubre sus tobillos. Pon alrededor de 0.7 oz de sal en el agua. Entonces mezcle bien.**
- 2. Conecte el cable de alimentación a la máquina principal y presione el interruptor.**
- 3. Conecte la matriz de iones a la máquina principal y coloque la matriz de iones en el agua.**
- 4. Conecte la correa de la muñeca a la máquina principal y apriételo en su muñeca. (Nota: Por favor, pon una gota de agua en el pasador de la pulsera antes de apretarlo).**
- 5. Pon los pies en el agua y regula el tiempo de desintoxicación.**
- 6. Ajuste el tiempo de purga de iones (aumento, disminución), presione el interruptor.**
- 7. Enganche el cinturón de la cintura a la máquina principal y úselo.**
- 8. Presione el botón de cinturón para iniciar la función de cinturón.**

El paquete incluye:

- 1 máquina de desintoxicación de pies iónicos para spa.**
- 1 cable de alimentación.**
- 2 correas de muñeca.**
- 2 matrices.**
- 2 cinturones infrarrojos de bambú de carbón para la cintura.**
- 1 funda de transporte.**
- 2 fusibles adicionales.**

Especificaciones:

Voltaje de entrada: 110 V/240 V.

Fusible: 266°F;

Potencia: 100 W.

Grado de protección: IP51.

Procedimiento de funcionamiento: funcionamiento continuo.

Voltaje de salida: 0 – 15 V; Corriente de salida: 0 – 2,5 A.

Clasificación de Riesgos Sanitarios

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos. Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283, 1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario

