

Bitácora

Modelo: **CAVI 80K**

Marca: **MYCHWAY**

En base a lo establecido en la **NOM-016-SSA3-2012**

Numerales:

-5.1.13 Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, instalaciones, equipamiento mecánico y electromecánico del establecimiento, de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad operativa, asimismo, registrarlo en las bitácoras de control. El personal que opera los equipos, debe comprobar documentalmente haber recibido capacitación en el uso, conservación y mantenimiento de los equipos que opera, según corresponda.

-5.1.13.1 El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad hospitalaria o de belleza, dichas acciones, deberán ser registradas en las bitácoras.

Este equipo es exclusivamente para uso estético

CONTENIDO:

- Manual de Fábrica
- Traducción al Español del Manual de Fabrica
- Ficha técnica del Equipo
- Protocolos para Utilizar el Equipo
- Clasificación de Riesgo Sanitario

Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación:

Documentación oficial. Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a la vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio.

Rotulación. Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención médica y un rótulo que indique el horario de su asistencia.

Espacio físico externo. El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores.

Espacio físico interno. El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables. Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios.

Expediente clínico. En relación a este punto, debes tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal y como lo establece la NOM-004-SSA3-2012.

En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso.

Documentación interna. La clínica o consultorio debe tener hoja diaria para el registro de

pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimiento y fecha de expedición.

Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio en donde se detallen las políticas de atención a pacientes.

Seguridad e Higiene. El área comprendida para consultorio debe contar con un bote para bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben de llenar a menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el aseo, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos y utensilios. Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que

esta no sea mezclada con la basura municipal.

Prevención. El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas.

En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo: Artículo 107.- ... DE LA LEY de salud de la ciudad de

México

En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedan sujetos a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles

Instrumento de grabado estereoscópico 5D



Instrucciones

Descripción general de los principios funcionales

1, fuerte voladura grasa, eliminación de grasa

El uso de ondas de sonido sólidas concentradas de ondas de sonido emitidas por la frecuencia de ondas de sonido de hasta 40000Hz, después de ingresar al cuerpo humano, puede hacer que las personas células de grasa corporal producen una especie de acción de impacto intenso y el movimiento de fricción entre la célula adiposa, puede usar Cantidad de calor de manera efectiva, use el contenido de agua de la celda, haga que la célula de las células de la célula de la célula de la célula adicional, puede hacer que la generación entre la celda sea una protuberancia de crack fuerte, la celda es una explosión instantánea, la célula de adiposa disminuye, logran así purificar Efecto adiposo.

2, disolver grasas, desintoxicación linfática, apretar la piel, mejorar la elasticidad de la piel

Con la combinación de tecnología avanzada de RF y energía RF, puede alcanzar profundamente al cuerpo adiposo y ha apuntado a la transmisión de RF Fuera de la excelencia, de modo que el tejido adipocítico en un estado de actividad rápida, la producción de energía

a térmica del calor de la fricción del cuerpo celular, de modo que la temperatura local aumente, a través de las glándulas del sudor, el hígado y la circulación intestinal y la linfa será el cuerpo de exceso de grasa y toxinas excretadas para lograr la disolución el efecto de la grasa.

3. Mejorar el tejido de la cáscara de naranja y la forma delgada del cuerpo.

Las ondas biológicas generadas por los electrodos de energía del aparato estimulan el cuerpo a las puntas de acupuntura correspondientes, utilizando diferentes frecuencias y pulsos en el cuerpo, la interacción de múltiples electrones físicos puede estimular efectivamente el cuerpo de la grasa y hacer que el cuerpo se mueva, para eliminarlo de nuevo. Use la cantidad de calor y adiposa, con el fin de lograr el efecto que modelo hermoso cuerpo.

4, la introducción de la tecnología de salud magnética.

El magnetismo puede activar la energía celular y promover la circulación sanguínea. Muro de vasos sanguíneos radicales libres de radicales, bajando la viscosidad de la sangre, bajando el lípido de la sangre; Calma, antiinflamatorio, analgésico, detumescencia; Mejorar la inmunidad del cuerpo; Efecto antienviejecimiento.


5, balance de ácido antienvjecimiento

De acuerdo con el equilibrio de base de ácido, la teoría de neutralización de la base de ácido, una gran cantidad de sustancias ácidas se recolectan en las partes patológicas del cuerpo, y las sustancias ácidas son

En cuanto a los desechos que no se han metabolizado por el cuerpo humano, el instrumento de grabado estereoscópico 5D integra la función de la luz, la electricidad, el magnetismo y el rayo de infrarrojos en uno, para las condiciones modernas de la sub-salud, la terapia física, la belleza y otras funciones; Por aspiración al vacío,

Rayo de infrarrojos lejanos, terapia magnética y combinación fotoeléctrica, tubería linéfica lisa, acelera el metabolismo del cuerpo, la circulación sanguínea, acelere el veneno

El metabolismo del elemento y la absorción de la composición de nutrientes, alivian el dolor, la atención médica, desempeñan así el papel del ácido.

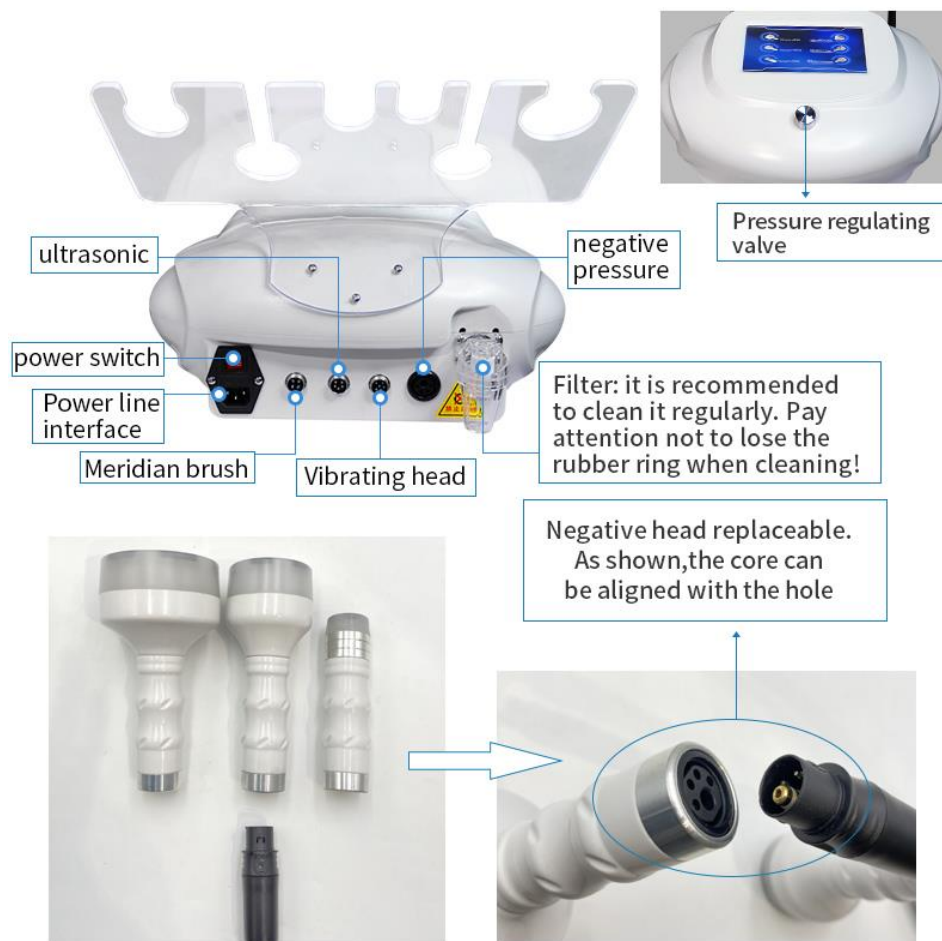

Función de accesorios y instrucción de operación.

Cabeza sonora enfocada de alta intensidad

Potente voladura de grasa específica, eliminación de grasa, el uso de ondas de sonido concentradas Frecuencia de pelo de hasta 40000Hz ondas de sonido fuerte, vibración extrema.

Mueva la celda adiposa, golpee la celda adiposa a la fuerza, haga que la membrana de células adiposa produce una explosión introvertida, haga que el triglicérido de glicerina descompona la glicerina.

Y el ácido graso libre, causa ráfaga de células adiposa, alcanza el

efecto que reduce el peso, por lo tanto, un cuerpo hermoso.

Ultrasonido enfocado es solo para.

La capa adiposa y el tejido adiposo, no tienen efecto a otro tejido de órganos corporales, la razón no causará ningún daño al cuerpo.



Sugerencia de la operación

1, la cabeza de grasa explosiva se utiliza principalmente para los elementos de moldeo por pérdida de peso, especialmente el tejido adiposo refractario, puede extender el tiempo de acción del cabezal de grasa explosivo, una parte del tiempo de funcionamiento recomendado de 10 a 25 minutos, según la situación real. del cliente para ajustar.

2, Antes de usar la sonda, se recomienda dar un masaje calmante de 5 a 10 minutos a mano a las partes operativas, de modo que el cuerpo del cliente tenga un proceso adaptativo para lograr un estado confortable.

3, el proyecto de moldeo por pérdida de peso, debe coincidir con el

correspondiente adhesivo de aceite esencial de aceite esencial / crema de grasa y otros productos de grasa que se unen juntos para lograr un mejor efecto.

Ajuste del parámetro:

Tiempo, según la situación real del cliente, se puede ajustar;

Intensidad de la cavitación: intensidad de ultrasonido, rango ajustable 0/15;

Modo de cavitación: modo acústico, la luz azul de la sonda cambiará con el cambio de modo;

El inicio-- Función inicia el modo de trabajo; Pausa: pausas.



- Regrese a la interfaz principal.

Cepillo de fisioterapia magnética DDS

El cepillo de fisioterapia nanomagnética DDS utiliza la calentamiento de energía magnética, dragando el meridiano del cuerpo, la promoción de la desintoxicación linfática, la promoción de la circulación sanguínea, el funcionamiento de la calidad y la sangre. Use rayos de infrarrojos lejanos para activar la energía celular del cuerpo humano para excitar al meridiano, un meridiano claro, alcanzar "pasar a través del dolor", vigore Qi para llevar a cabo la sangre, eliminar la toxina, regular y el yang, borra rápidamente todos los vasos linfáticos y meridianos de todo el cuerpo. . El cepillo de

fisioterapia puede actuar sobre todas las partes del cuerpo humano, y puede lograr una buena desintoxicación y un efecto calmante, puede mejorar efectivamente una variedad de dolor: dolor de espalda, periartritis de hombro, debilidad de la cintura y la pierna, etc.



Sugerencia de la operación

El cepillo de 1. Pisioterapia actúa principalmente sobre el proyecto de dragado y desintoxicación de meridianos y colaterales, y el tiempo de operación recomendado de una parte es de 15 a 30 minutos, que se ajusta de acuerdo con la situación real del cliente (la condición de estasis y la Físico diferente). Después de la operación del cabezal de grasa explosiva, el cepillo de fisioterapia se puede usar para eliminar la toxina en el cuerpo, acelerar el metabolismo, perder peso y mantener la salud al mismo tiempo, puede lograr el doble de resultados con la mitad del esfuerzo.

2. Antes de usar la sonda, se recomienda masajear las piezas de operación a mano durante 5 minutos durante 10 minutos, de modo

que el cuerpo del cliente tenga un proceso adaptativo para lograr un estado confortable. Si hace elementos de pérdida de peso, puede continuar usando un cepillo de salud directamente después del cabezal de grasa.

3, haga los artículos de salud del cuerpo, con las funciones correspondientes del aceite esencial; Haz artículos de moldeo por pérdida de peso, con el correspondiente pérdida de peso de peso esencial / crema de grasa / adhesivo de pérdida de grasa y otros productos de grasa de combustión pueden ser operados.

4, Ajuste de parámetros:

Tiempo, según la situación real del cliente, se puede ajustar;

Intensidad de biografía: intensidad de corriente micro, rango ajustable 0/15;

Modo BIO- Modo acústico, la luz azul de la sonda cambiará con el cambio de modo;

Se sugiere que la intensidad de la energía térmica de la intensidad del calor, debe ajustarse a 15, precalentados durante 2 minutos durante 3 minutos y luego se ajusta de acuerdo con la situación real.

La función de inicio inicia el modo de trabajo;

Pausa - pausas.

Cabeza de descarga de ácido de presión negativa de RF

A través de la combinación de presión negativa de vacío y

fotocapacidad, conducto linfático liso, acelerar el metabolismo del cuerpo, la circulación sanguínea, acelerar el metabolismo de las toxinas y la absorción de nutrientes, aliviar el dolor, la salud y la atención médica, desempeñan el propósito de la eliminación de ácido y corrección de ácido. La frecuencia de radio de alta frecuencia puede alcanzar directamente al cuerpo de grasa directamente, hacer que el tejido de adipocitos en estado rápido y activo, produce calor de fricción de energía de calor del cuerpo celular, haga que la temperatura local aumente, a través de la glándula sudor, con succió



n
al

vacío, un mayor masaje a través de la presión negativa. Impresionante gruesa gruesa, el efecto es obvio.

Sugerencia de la operación

1, eliminación de ácidos principalmente para proyectos de eliminación y moldeo ácidos, un tiempo de operación recomendado de 15 minutos 30 minutos, de acuerdo con la situación real del cliente (estasis y físico diferente) para ajustar.

2, Antes de usar la sonda, se recomienda masajear las piezas de operación a mano durante 5 minutos durante 10 minutos, de modo que el cuerpo del cliente tenga un proceso adaptativo para lograr un estado confortable. Si realiza artículos de pérdida de peso, puede continuar operando directamente después de la operación de la sonda.

3, se puede operar el proyecto de eliminación de ácido corporal, con productos básicos; Hacer elementos de moldeo por pérdida de peso, con la pérdida de peso correspondiente, el aceite esencial del aceite / pega de grasa / adhesivo de pérdida de grasa y otros productos de grasa de combustión pueden ser operados juntos; Los artículos faciales, con la operación de producto ajustada o correspondiente pueden ser.

4, Ajuste de parámetros:

Tiempo, según la situación real del cliente, se puede ajustar;

Intensidad de vacío: intensidad de presión negativa, rango ajustable de 0 ~ 5, también se puede ajustar directamente en el regulador de presión;

El modo de descarga de succión de presión negativa de modo de vacío, fue el modo de succión continuo, y la relación de succión y descarga fue diferente en el modo A / B / C.

La fuerza de intensidad de RF, de acuerdo con la situación real se puede ajustar,

no debe ajustarse demasiado alto;

El inicio-- Función inicia el modo de trabajo;

Pausa: pausas.

Vibrador de magnetoterapia

La vibración con un campo magnético produce un campo magnético, vibración y calor en el trabajo presionando la cabeza de fricción. A mareos, dolor de cabeza, fatiga, insomnio, dolor lumbar y cervical y otros síntomas tienen una mejora obvia y un efecto calmante. Su pulsación de onda magnética se puede calentar con precisión en la epidermis y la dermis, incluso el tejido adiposo subcutáneo, lo que resulta en una contracción inmediata del tejido y la regeneración de

colágeno a largo plazo, lo que aumenta la elasticidad de la piel y logrando la belleza y la preservación de la salud. Los hombres pueden limpiar los intestinos y el estómago, desintoxicar, reducir la barriga de la cerveza, lograr efectivamente la salud abdominal. Las mujeres pueden calentar el palacio, nutrir la cara, eliminar la dismenorrea, despedida de la piel amarilla oscura.

Sugerencia de la operación

1, la terapia magnética actúa principalmente en el hombro, el cuello y la cintura y los artículos de salud del abdomen, una parte del tiempo de operación recomendado de 15 minutos, de acuerdo con la situación real del cliente (condición de estasis y físico diferente) para ajustar.

2, Antes de usar la sonda, se recomienda masajear las piezas de operación a mano durante 5 minutos durante 10 minutos, de modo que el cuerpo del cliente tenga un proceso adaptativo para lograr un estado confortable.

3, haga los artículos de salud del cuerpo, con las funciones correspondientes del aceite esencial.

4, Ajuste de parámetros:

Tiempo, según la situación real del cliente, se puede ajustar;

Intensidad de vibración: intensidad de corriente micro, rango

ajustable 0/15;

Intensidad de calor: intensidad de energía térmica, se

recomienda ajustar a 15,

Precaliente aproximadamente 5 minutos, y luego de acuerdo con la situación real se puede ajustar;

La función de inicio inicia el modo de trabajo;

Pausa - pausas.



- Regrese a la interfaz principal.


Consejo de tratamiento

1. La sonda debe estar estrechamente relacionada con la piel durante el tratamiento.
2. Cuando la esteticista ajusta la intensidad, debe comunicarse bien con el cliente.
3. Después de la operación, limpie la piel con toallas calientes.
4. Con un movimiento circunferencial o movimiento de línea recta, no permanezca en la misma parte, el movimiento debe ser coherente o detenerse.

Para la ubicación: parte del cuerpo


1. des de los muslos internos a los muslos anteriores, los muslos laterales se levantaron hacia la dirección de la ingle;
- 2, los muslos internos y externos se pueden empujar hacia adelante y

hacia atrás con z o grandes 8 caracteres;

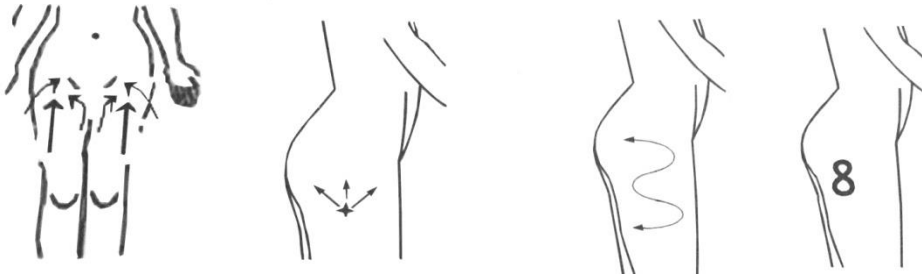


3, los muslos posteriores se levantaron hacia arriba a las nalgas;

4, la parte inferior de la pierna se puede levantar o empujar hacia adelante y hacia atrás con la manipulación de Z;

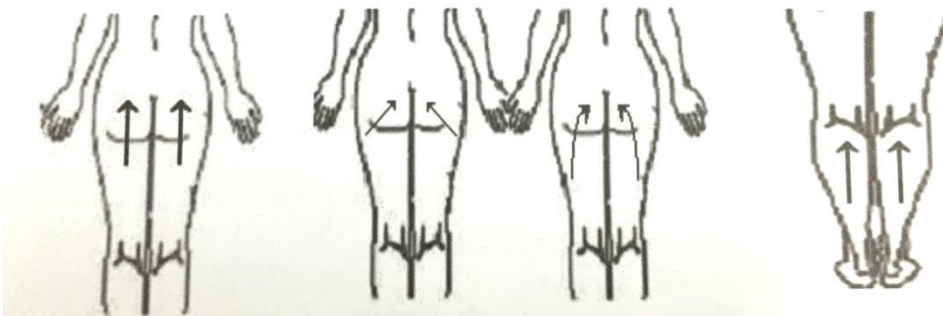


Para la posición: atrás y brazo

- (1) El punto central de la columna superior se empujó a la posición de los nodos linfáticos axilares;
- (2) El brazo posterior se levantó hacia arriba a la posición de un nodo linfático axilar;
- (3), el antebrazo se dibujó hacia arriba al ganglio linfático subaxilar.

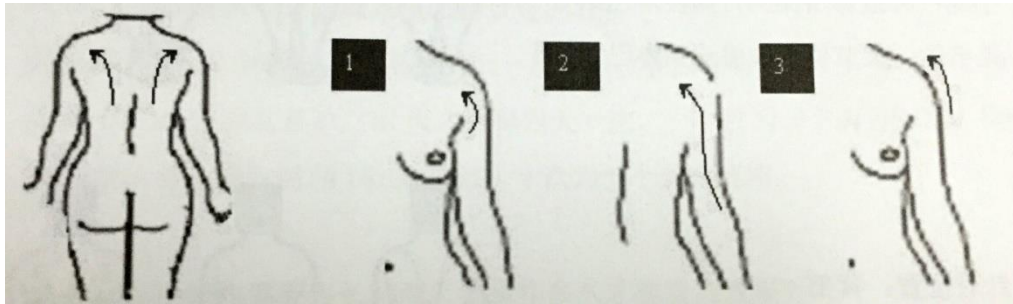

Ubicación para: abdomen


- 1, a partir del punto central de la vértebra inferior de la espalda para dirigir la cintura hacia adelante a la ingle;
- 2, continúe hacia la derecha desde el colon superior hasta el colon transversal y el colon descendente a la posición inguinal.
- 3, la pechuga estomacal se retiró a la ingle por la manipulación de una palabra.

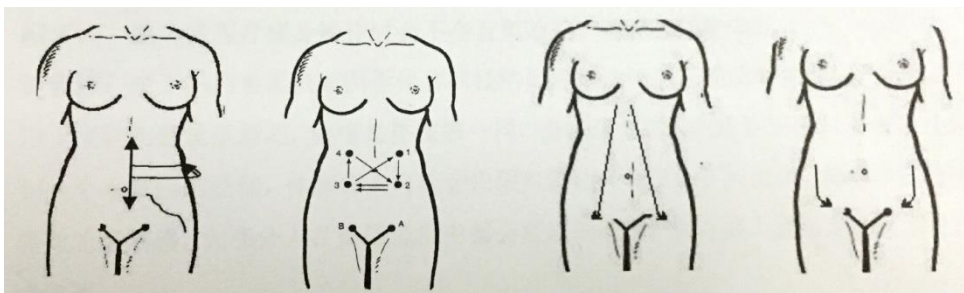

1. Pomen abdomen: el líquido se drena al nodo linfático axilar;


ABDOMEN

2. LOWER: Drenaje de líquido a los ganglios linfáticos inguinales;
3. waist: drenaje de líquido a la linfa inguinal.

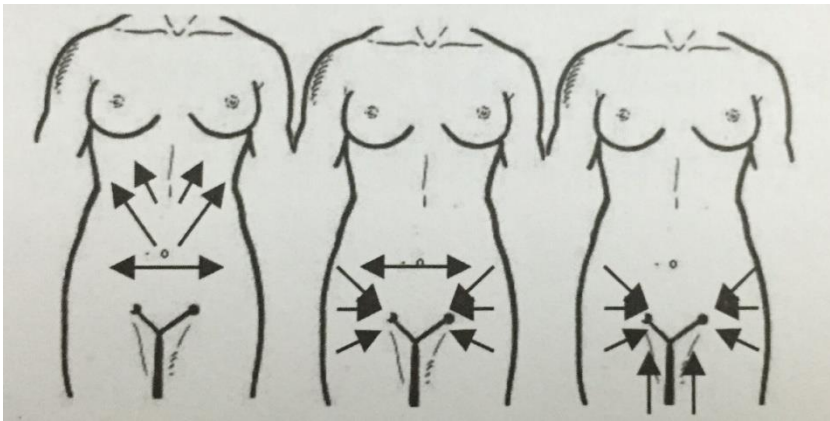

Para la ubicación: glúteos y piernas.


1. Net Piernas: drenaje de fluido a ganglios linfáticos inguinales
2. CRUS: Drenaje de fluido a los ganglios linfáticos lunares.
3. Posición clave: drenaje de fluidos conjuntos a linfá.

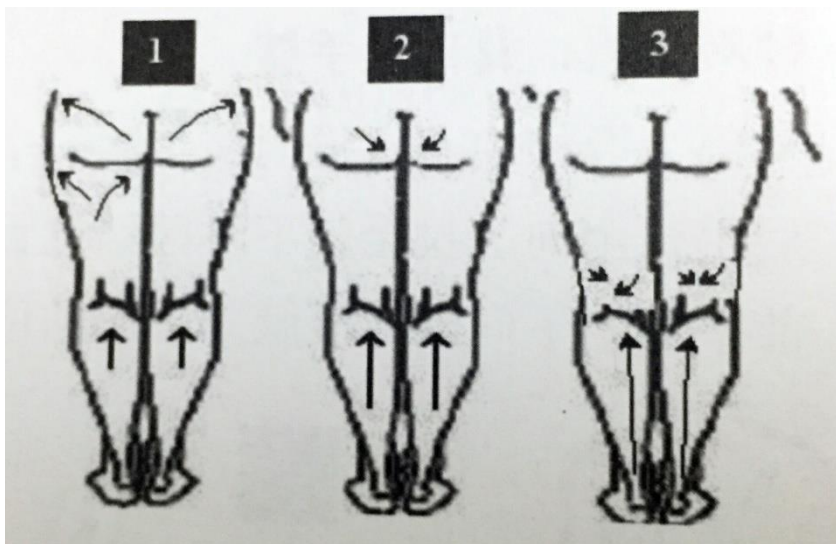

Para la ubicación: atrás

Hombro: drenaje de fluido a nodos linfáticos de la fosa clavicular: líquido de drenaje a ganglios linfáticos inguinales

Atrás: Drenaje de fluido a los ganglios linfáticos axilares.

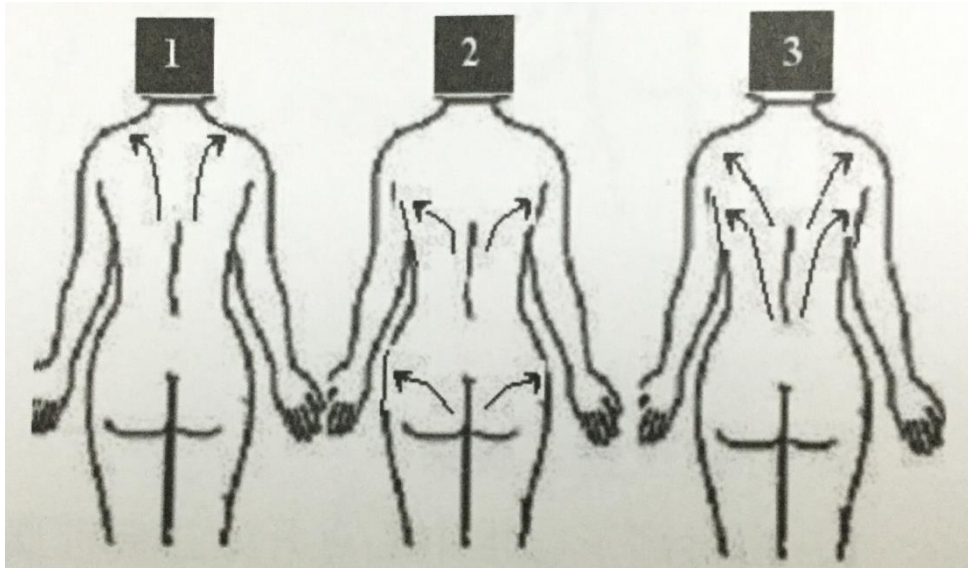

Cuidado de accesorios:

1. Después de cada operación, es necesario limpiar la sonda en el tiempo, limpiar con solución salina, no puede colocar directamente toda la sonda en el agua para limpiar, aplique húmedo y tablilla suave para limpiar.
2. La sonda de operación tiene efecto de calor, después del uso, no se puede colocar directamente en la suspensión, debe esperar a que la sonda se enfríe y luego se ilumine en el colgador de ajuste.
3. **¡Perchas de accesorios para no ser borrados con alcohol!** La solución salina normal debe utilizarse para la limpieza.

Asuntos que necesitan atención

1. ADVERTENCIA

1) Los instrumentos pertenecen a instrumentos electrónicos de alta precisión y no deben ser

colocado en lugares húmedos cuando se mantienen y se colocan.

2) Este instrumento usa el chip automático de la computadora para llevar a cabo el

Control de operación, por lo tanto, en el tiempo de uso, no usa el aparato eléctrico de alta frecuencia en la medida de lo posible en el área periférica, la previa para no interfiere con el uso de la operación normal del instrumento. (por ejemplo, una bobina eléctrica, secador de pelo, instrumento de microondas, etc.) En caso de interferencia, generalmente hay dos fenómenos (A. en uso normal, B. Salto de la pantalla LCD), el método de eliminación general es desactivar la fuente de alimentación. Reinicie el instrumento.

3) Sin lucha libre, colisión fuerte, etc.

4) La máquina principal y los accesorios del instrumento generalmente requieren limpieza y cuidado de forma regular, especialmente si el agua no está permitida en el instrumento.

5) Si no se usa durante mucho tiempo, es preferible proteger todo el instrumento con una bolsa de resistente a la humedad y a prueba de polvo, preferiblemente aproximadamente 15 días para trabajar durante una hora, para prevenir el dispositivo electrónico interno. De ser afectado por la humedad y el envejecimiento.

2. Ten cuidado

El uso está prohibido si:

- 1) El enchufe de alimentación, cuando el cable está dañado o caliente;
- 2) cuando el gato está suelto o balanceo;
- 3) Está prohibido romper, procesar, doblar excesivamente, girar el tapón; 4) No tire del enchufe a regañadientes en el curso de la operación;
- 5) está prohibido el uso de otros cables de alimentación;
- 6) Coloque en un bebé, donde el niño no está en contacto;
- 7) El uso de productos químicos para borrar instrumentos está prohibido;
- 8) Está prohibido tirar del tapón por la mano mojada.

3. Multitud prohibida

- 1, enfermedades graves, como la enfermedad cardíaca, la úlcera gástrica, la enfermedad gástrica severa, la úlcera duodenal, la hipertensión, la diabetes, etc.
- 2, mujeres, mujeres de lactancia materna, cirugía abdominal inferior a tres meses, prohibición menstrual.

Mantenimiento y mantenimiento

- 1) Cada ajuste pertenece a un dispositivo sofisticado. Por lo tanto, en el tiempo de uso y el uso de la finalización, debe prestar atención para mantener, para que no haga que su vida de servicio se acorte.
- 2) Los accesorios deben tomarse a la ligera, deben prestar atención a mantener la manija, no sostenga la línea de salida a voluntad, fácil de causar una conexión suelta dentro de los accesorios, lo que resultará en un contacto deficiente y cortocircuito.
- 3) Después del uso de accesorios, no caiga a voluntad, debe usar líquido de limpieza con un paño limpio cuidadosamente limpiado, colóquelas. Se recomienda limpiar la superficie con solución salina o una pequeña cantidad de detergente.
- 4) Si el cabezal de grasa explosivo de alta intensidad de 80K funciona continuamente durante 30 minutos, cuando se trabaja durante 30 minutos, deje que la sonda descansa durante 5 minutos, espere a que la temperatura de su superficie disminuya, luego continúe usando, cuando la conexión no está en Use, asegúrese de eliminar

la conexión. Poner en el marco colgante correspondiente, no debe dejar que se quemé en seco, la sonda de quema.

- 5) Cabezal de presión negativa al vacío: asegúrese de prestar atención a la limpieza. Una vez que se completa el uso, cuando se encuentra que el aceite esencial o el producto en el filtro de la máquina principal está lleno, el producto en el filtro debe limpiarse para no afectar la succión.

seguro de calidad

Esta máquina a partir de la fecha de compra de la garantía del mainframe durante un año, dentro de los tres meses, hay una reparación gratuita de problemas de calidad, tres meses después, si hay un problema, se le cobrará las tarifas de mantenimiento. Garantía de piezas de repuesto durante tres meses, dentro de un mes Problemas de calidad, reparación gratuita, después de un mes para cargar la tarifa de mantenimiento de las piezas de repuesto. Otro periodo de garantía también puede ser responsable del mantenimiento, la recopilación de tarifas de costos de repuestos y consumibles. Por favor, póngase en contacto con nosotros para reposición o compra.

No hay garantía gratuita para cualquier falla causada por el uso de las siguientes causas personales.

A, desmontar y ensamblar sin autorización, vuelva a colocar la falla causada por este producto;

B, use descuidadamente latidos, caen y causan problemas;

C, fracaso debido a la falta de mantenimiento adecuado; Falta de seguir las instrucciones adecuadas.

D, falla causada por la falta de seguimiento de las instrucciones correctas de uso.

Las especificaciones de diseño de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de duda, contáctenos.

Clasificación de Riesgos Sanitarios

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos. Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283,

1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.