


MASAJEADOR G5 (MALETIN)

MANUAL DE USUARIO

MARCA: SILUET PERFECT.



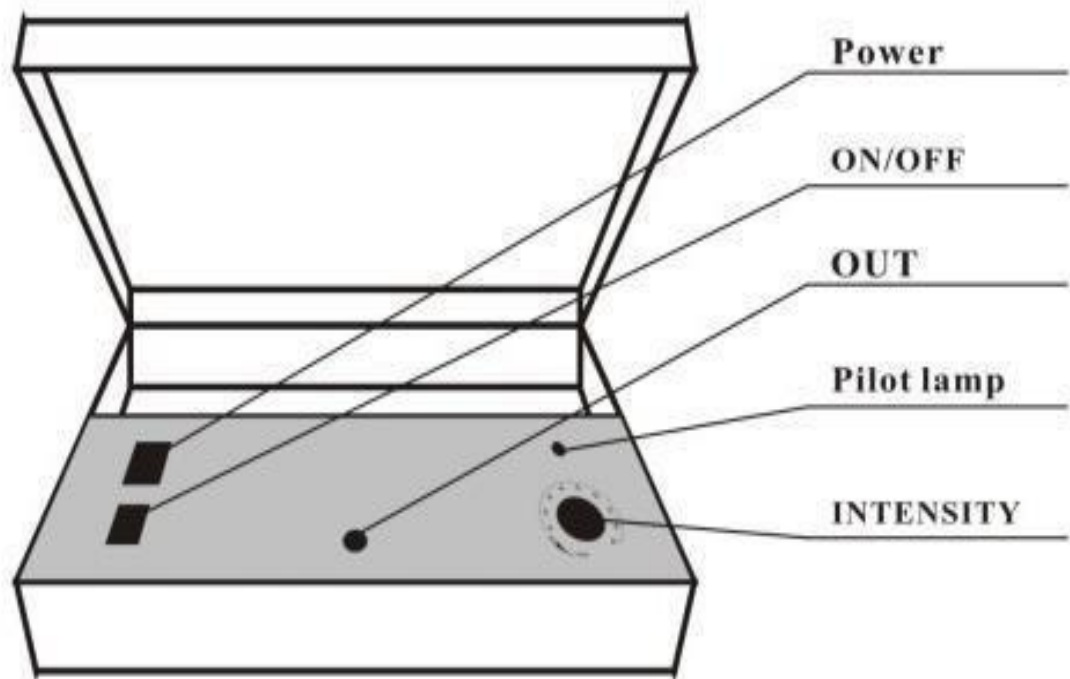

Vibromassage Push Fat Machine Operation Manual

INTRODUCCION

Esta máquina combina vibro-masaje, empuje de grasa para perder peso y expectoración de vibraciones médicas en un solo equipo.

El desarrollo y fabricación de esta máquina enfoca todas las ventajas e ideas de diseño innovadoras de productos similares en y en el extranjero, con la instalación De forma de transmisión flexible, altamente eficiente y duradera, eje flexible de excelente rendimiento, se puede operar incluso en una bobina curva y en un entorno complejo.

Aspecto agradable, programa de trabajo inteligente, se puede operar de manera simple y conveniente. Se puede utilizar en salones de belleza, hospitales, estadios, gimnasios, escuelas y familias para individuos o para embellecimiento corporal y rehabilitaciones de fisioterapia, etc.

Tiene un vibrador centrífugo sólido y compacto, con una variedad de cabezales de masaje para satisfacer las necesidades de cualquier posición normal del cuerpo brindando el mejor resultado posible.

PRINCIPIOS DE TRABAJO

1.- Penetración profunda: La fuerza resultante puede penetrar la piel, músculos, tejidos y fluidos corporales, brindando resultados significativamente notables.

Fuerza la mitigación del cambio. De acuerdo con los principios clínicos de la fisioterapia torácica, en particular la dirección de la superficie corporal del ciclo de fuerza, en el que la fuerza vertical generada por el golpeteo, el temblor puede promover la relajación y licuefacción del moco de la superficie mucosa de las vías respiratorias y de los metabolitos; Fuerzas horizontales dirigidas generadas para apretar, empujar y temblar Desasiéndose así eficazmente de la grasa y forzando al cuerpo a eliminarla y desecharla

PARAMETROS DEL PRODUCTO

Voltaje	AC-220V / 50Hz 110V /60Hz
Potencia	100W
Tamaño del paquete	46.5cm x 32.5cm x 15.5cm
Peso	4.5Kg
Frecuencia de oscilación	10Hz-60Hz (600r/min to 3000 r/min), continua ajustable
Tiempo regular	60 minutos de tiempo regular de 1 minuto, continuamente ajustable, pantalla digital
Ruido de trabajo	≤60dB

FUNCIONAMIENTO Y USO

- Ensamblar el equipo y los accesorios fuera del disco, el equipo anfitrión, la vibración de la primera manguera que cuelga de la rejilla de soporte.
- Lea la nota y los botones deben seleccionar la fuerza de vibración, la velocidad para operar.
- Pueden ser necesarios varios tipos de masajes, extracción de las piezas de repuesto.
- El masaje de cabeza cilíndrica es para estimular las habilidades musculares en los "dedos del terapeuta de masaje" en el área dolorosa con la extrusión del material superior y la vibración para reducir el dolor, puede aliviar la tensión muscular y la grasa dura. Si bien su velocidad de 2400-4000 r / min de vibración puede ser eficaz para el consumo de grasas y blandos, para lograr la pérdida de peso.
- Los cabezales de masaje de ducha dirigidos a piel áspera, más arrugada y grasa suave masaje de grasa suave arrugas y su uso, también pueden ayudar a unir la superficie y la profundidad del tejido fibroso, la grasa y la eliminación de grasa. La velocidad recomendada es 1600-2400 r / min.
- Cabezal de masaje de espuma, los principales puntos del cuerpo a utilizar, incluido el cuerpo y las plantas de los pies, la velocidad propuesta de 800 r / min más o menos. Fisioterapia, use juegos de películas higiénicas desechables (como envoltorios de plástico y similares).
- El cabezal de masaje hemisférico se puede utilizar para masajear los músculos que actúan en los sitios más grandes (como el masaje de espalda), ejercitar los músculos de la falta de ejercicio pasivo. En el ejercicio o deporte de súper intensidad para ayudar a prevenir la fatiga y el endurecimiento de los músculos, para mantener la flexibilidad de las articulaciones, reducir la hinchazón de las articulaciones. Al mismo tiempo, a la velocidad de 2400-4000 r / min, la vibración de la grasa de las partes blandas puede ser eficaz, el consumo y ayudar a las personas a perder peso.
- Antes de usar, es buena idea hacer algún ejercicio de calentamiento o sauna, para relajar un poco los músculos, y masajear el cuerpo con un poco de aceite o talco para facilitar el masaje de la cabeza y el cuerpo del empuje. El masaje debe utilizar un inicio suave o un cabezal de masaje suave, mientras que el movimiento lento con forma larga hacia adelante. Masaje

NOTAS:

- antes del trabajo preparatorio, no encienda la máquina, de lo contrario aumentará la tasa de
- desgaste del cabezal de masaje por vibración. El cabezal de vibración centrífuga no se puede quitar sin permiso. No agregue aceite en el eje de giro o en la máquina, todos los cojinetes y el eje están cerrados y autolubricados.
- Utilice jabón suave y agua tibia para limpiar el exterior de la máquina, no utilice alcohol ni líquido limpiador, los accesorios también se pueden limpiar de esta forma.
- Evite el uso de la máquina durante la inflamación aguda excesiva, el área de sangrado, las lesiones cutáneas, el sitio de lesiones malignas y el uso menstrual.
- No se puede utilizar durante la tromboflebitis linfoide.
- hipoxia pulmonar excesiva, tuberculosis pulmonar, neumotórax, cáncer de mama y enfermedad de la pared torácica; absceso de la pared torácica y síntomas de infección; sitio de infección; el sitio de sangrado o puede ser el sitio de sangrado; enfermedades malignas; tromboflebitis o linfangitis; partes del corazón: venas varicosas; los pacientes discapacitados no pueden tolerar el choque.
- Los pacientes con infección de los bronquios o del parénquima pulmonar con esputo deben usarse con precaución. Las mujeres embarazadas y las mujeres durante el período menstrual tienen prohibido usar la máquina, los niños deben usarse bajo

Piezas Intercmbiables (Cabezales del equipo)

