

Modelo: Hidrodermoabrasión

6-1

Marca: MYCHWAY

En base a lo establecido en la **NOM-016-SSA3-2012**

Numerales :

-**5.1.13** Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, instalaciones, equipamiento mecánico y electromecánico del establecimiento, de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad operativa, asimismo, registrarlo en las bitácoras de control. El personal que opera los equipos, debe comprobar documentalmente haber recibido capacitación en el uso, conservación y mantenimiento de los equipos que opera, según corresponda.

-**5.1.13.1** El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad hospitalaria o de belleza, dichas acciones, deberán ser registradas en las bitácoras como la siguiente.

Este equipo es exclusivamente para uso estético

CONTENIDO:

- Manual de Fábrica
- Traducción al Español del Manual de Fabrica
- Ficha técnica del Equipo
- Protocolos para Utilizar el Equipo
- Clasificación de Riesgo Sanitario

Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación:

Documentación oficial. Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a la vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio. Rotulación. Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención médica y un rótulo que indique el horario de su asistencia. Espacio físico externo. El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores.

Espacio físico interno. El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables.

Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios.

Expediente clínico. En relación a este punto, debes tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal y como lo establece la NOM-004-SSA3-2012.

En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso.

Documentación interna. La clínica o consultorio debe tener hoja diaria para el registro de pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimiento y fecha de expedición.

Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio en donde se detallen las políticas de atención a pacientes.

Seguridad e Higiene. El área comprendida para consultorio debe contar con un bote para bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben de llenar a menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el aseo, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos y utensilios.

Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que esta no sea mezclada con la basura municipal.

Prevención. El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas.

En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo:

Artículo 107.- ... DE LA LEY de salud de la ciudad de México

En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedan sujetos a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles

Manual de Usuario



Estimados usuarios:

Prefacio

Nos complace presentarle nuestra máquina de belleza 6 en 1 que trabaja principalmente en hidratación, absorción de nutrientes, brillo de la piel, etc. Es una máquina de belleza multifuncional, dirigida a problemas generales del cuidado de la piel del rostro, como piel seca, poros obstruidos, piel inelástica y tono de piel desigual. Apuntamos a un resultado de belleza seguro y, al mismo tiempo, efectivo mediante el uso de tecnologías de alta gama. La máquina de belleza SR-MJ1906L es una máquina de gestión del cuidado de la piel facial para uso profesional, que debe ser manejada por profesionales con la capacitación adecuada. Cualquier uso incorrecto tendrá consecuencias adversas. Por lo tanto, recomendamos a cualquier personal que lea esta guía detenidamente y siga las instrucciones estrictamente antes de la operación.

Creemos que nuestro producto de calidad traerá buenos rendimientos de su parte. Además, puede contar con nuestro servicio postventa sin preocupaciones.

¡Gracias!

1. Operaciones detalladas
2. Parámetros técnicos
3. Precauciones de seguridad
4. Qué hacer y qué no hacer
5. Solución de problemas y soluciones
6. Preguntas frecuentes
7. Lista de embalaje
8 diagramas operativos

Parte I

Breve introducción

Actualmente, las máquinas de belleza por ultrasonidos, depuradores faciales y máquinas de belleza ultrasónicas son las máquinas de belleza más populares que trabajan en la limpieza profunda de los poros. Es un reemplazo efectivo de todos los programas tradicionales de limpieza facial y cuidado facial en salones de belleza. Además, son convenientes y fáciles de operar. Resuelve problemas de manejo de la piel y el cuerpo para los amantes de la belleza. Este equipo no requiere inyección, medicación ni operación, por lo que no tiene efectos secundarios. Se usa externamente durante todo el proceso y tiene un efecto inmediato. La dermoabrasión de diamante adopta la tecnología de succión de presión negativa al vacío para reducir la presión de aire interna, eliminando así eficazmente la capa de cutícula desperdiciada, eliminando los puntos negros y el exceso de aceite y otros residuos de poros, de una manera que logra la circulación de la piel de respiración libre, que puede dragar los poros, mejorar los poros y aclara el tono de la piel. Al mismo tiempo, la combinación del tratamiento bio y fotónico también puede aumentar las funciones celulares y la vitalidad, eliminar los radicales libres y hacer que la piel se vea joven.

Ventajas

1. Máquina de belleza 6 en 1 que funciona en tu cuidado facial general.
2. Se pueden reemplazar múltiples sondas de trabajo en diferentes partes de acuerdo con diferentes requisitos.
3. Las sondas especiales de hidro facial pueden mejorar diversos problemas de la piel y revivir una cara limpia.
4. Se adapta a todo tipo de piel y ayuda a mejorar la calidad de la piel y alivia la piel.
5. Sin dolor, no invasivo durante el proceso. Saltarse los períodos de recuperación sin afectar los planes de trabajo y de vida.
6. Sin consumo, bajo costo y devoluciones rápidas.
7. Área de tratamiento más amplia y resultados más rápidos y más visibles.
8. Desigualdad, sangrado, hinchazón y estasis no aparecerán después del tratamiento.
9. El lavador ultrasónico de limpieza de alta frecuencia de 3MHZ puede mejorar efectivamente la absorción de la piel, ayudar a que la nutrición penetre en la dermis

y renovar completamente la piel. La vibración de alta frecuencia refina los nutrientes en pequeñas partículas moleculares y mejora la absorción.

10. A través del efecto de calentamiento generado por la vibración de alta frecuencia, la onda ultrasónica puede infundir efectivamente productos de belleza y nutrición en la piel rápidamente, para que la piel pueda absorber mejor los nutrientes en los productos para el cuidado de la piel.

Limpieza profunda

Principios

Depurador de limpieza facial

El depurador de limpieza facial está equipado con la tecnología única de transformación. La energía de vibración mecánica emitida 28,000 veces / seg tiene un obvio efecto de ósmosis en la piel humana. A través del medio de atomización, un fuerte impacto puede eliminar instantáneamente la suciedad profunda de los poros, eliminar sin dolor el acné y las espinillas para que la piel reciba un tratamiento completo y limpio. La energía de baja frecuencia puede emulsionar el sebo y las secreciones que bloquean los poros, lo que también puede esterilizar. La vibración mecánica no solo puede atomizar las moléculas de agua en los poros, sino que también puede eliminar el exceso de cutina gruesa, purificar los poros, descomponer el aceite, dejarlos sin obstrucciones y apretar los poros, limpiar y alisar la piel.

Efectos físicos

La onda de sonido de vibración de alta frecuencia se combina con un producto suavizante o una crema exfoliante para suavizar la capa de cutícula rugosa dañada y abrir los poros con una onda de sonido, y eliminar la basura y el desperdicio profundo en los poros por vibración de alta frecuencia.

En la parte posterior del instrumento, la vibración de alta frecuencia combinada con el producto de esencia puede inducir el producto en la piel, aumentando la elasticidad de la piel y suavizando las arrugas.

Hidra Dermoabrasión

El agua de oxígeno-hidrógeno es un tipo de agua alcalina, dirigida a la piel parcial de la acidez, mejorando así la piel grasa. Puede penetrar en las células humanas y elimina eficazmente el factor de envejecimiento excesivo (radicales libres), elimina las especies reactivas de oxígeno que son dañinas para el cuerpo humano, y lo convierte en agua completamente inofensiva a través del elemento agua, y elimina el ácido activo dañino, durante el cual También puede complementar la humedad al mismo tiempo.

El elemento agua oxígeno-hidrógeno se refiere al agua pura que se purificará en agua ionizada oxígeno-hidrógeno, que producirá moléculas finas de H₂ en la superficie de la piel, para penetrar rápidamente las moléculas de agua y las células en la piel, logrando la eficacia de ser sensible y translúcido. Sobre la base del tradicional hidro facial, se agrega el innovador cabezal de limpieza giratorio, logrando así un mejor efecto de limpieza de la piel.

En comparación con las partículas de agua ordinarias, el agua que contiene hidrógeno tiene una mayor capacidad antioxidante. Agua reactiva de hidrógeno-oxígeno = fuerte agente antioxidante y antienvjecimiento, que puede eliminar especies reactivas de oxígeno, reducir el PH y aumentar contenido de humedad de la piel.

Martillo frío

Usa el principio del aire acondicionado. Se utilizan cerámicas especiales para obleas para absorber energía y refrigerar a - 5 grados en un instante. El método de acumulación de calor físico producido por la absorción de energía de la oblea hace que un lado produzca calor hasta 40 grados. El ventilador descarga el exceso de energía térmica y logra el efecto de temperatura constante y congelación alternativamente. También promueve el metabolismo, alivia las reacciones alérgicas, reduce los poros, calma la piel, blanquea y suaviza la piel.

Efectos biológicos: durante el proceso de enfriamiento, la temperatura de los tejidos se enfría, los vasos sanguíneos y las venas se contraen, la tasa metabólica se reduce, la actividad celular se inhibe, la sensibilidad del nervio periférico se reduce, lo que tiene un efecto sedante y calmante, contrarrestando o reduciendo los síntomas de una reacción alérgica, como como enrojecimiento, hinchazón y dolor, logrando por lo tanto ciertos efectos, como calmar la piel, reducir el enrojecimiento y la hinchazón, reducir los poros, etc.

Efectos

1. Limpie profundamente y despeje la cara, y mejore los poros obstruidos y agrandados.
2. Retire el exceso de cutícula.
3. Introducir profundamente la nutrición y promover la absorción de la piel.
4. Mejora la textura y elasticidad de la piel.
5. Mejore la piel desigual y limpie profundamente para eliminar puntos negros, puntos blancos, acné, ácaros y polvo.
6. Tonifica e hidrata tu piel para que se vea más brillante y suave.

Rango aplicable

1. Aquellos con piel seca.
2. Aquellos con poros grandes, piel áspera y sin brillo.
3. Aquellos con poca absorción de la piel y falta de agua en la base de la piel.
4. Aquellos con tono de piel oscuro y desigual.
5. Aquellos con secreción excesiva de aceite y piel con acné.
6. Aquellos cuya piel no es lisa debido a una limpieza inadecuada.

Rango Inaplicable

1. Aquellos con piel severamente sensible o aquellos en fase alérgica.
2. Aquellos con trauma facial extenso.
3. Las embarazadas y las que padecen enfermedades cardíacas graves, tres H graves (hipertensión, hiperlipidemia, hiperglucemia), enfermedades graves, etc.
4. Aquellos con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
5. Aquellos que acaban de recibir una inyección, como ácido hialurónico, inyección intradérmica, eliminación de arrugas o cirugía plástica.

Notas después de la operación

1. Fortalecer la hidratación y prestar atención a la protección solar.
2. No use productos estimulantes para el cuidado de la piel, como exfoliantes, exfoliantes y AHA, dentro de una semana después de la operación.
3. Evite quedarse despierto hasta tarde, fumar y beber, y coma más frutas y verduras y menos alimentos grasos.
4. Aplique una máscara hidratante una vez al día durante tres días.
5. Lávese la cara con agua tibia dentro de los 3 días posteriores a la operación.

Reposición de piel

Principios

Hidra Dermoabrasión

Equipado con la función tradicional de limpieza hidro facial, y combinado con iones de oxígeno de hidrógeno, el efecto hidratante de la piel es mejor. Es un cabezal de limpieza de pulido rotativo para tallar el agua, y el cabezal en espiral puede exfoliar la piel muerta y complementar la humedad.

El agua altamente oxigenada hace que las moléculas de agua sean más pequeñas, lo que facilita que el oxígeno se disuelva en el espacio interatómico. El circuito de vacío está formado por presión negativa de vacío, y las burbujas de hidrógeno ultrapequeñas y la solución nutritiva se combinan completamente. El cabezal de succión en espiral especialmente diseñado actúa directamente sobre la piel para promover el efecto de peeling.

Hidro facial e iones de hidrógeno y oxígeno combinados pueden lograr el efecto del rejuvenecimiento de la piel. Bajo la condición de seguro e indoloro, ayuda a abrir el área del embudo del folículo piloso, elimina la basura cutánea de la piel a través del metabolismo, al mismo tiempo proporciona a la piel los nutrientes adecuados, haciendo que la piel cutánea se vuelva húmeda, delicada y lustre, lo que también ayuda con dispositivos de alta gama como ulthera, inyección intradérmica, logrando mejores efectos.

Hydro Spray Jet

Usando oxígeno y agua a alta presión, rocía el flujo de agua sobre la piel con partículas moleculares de menos de 80 micras. Las moléculas de agua activas y el oxígeno puro entran rápidamente en la capa profunda de la piel, acelerando la absorción de la nutrición de la piel. A través de la fuerza de alta presión en los poros de la piel y el agrietamiento de la piel por la penetración de la piel en la capa de la dermis para promover la regeneración celular, proporciona directa y rápidamente una nutrición adecuada para la piel, al mismo tiempo elimina la basura de la capa profunda de la piel. El oxígeno y los nutrientes hiperbáricos pueden estimular el tejido fibroso de la regeneración de la dermis, promover el metabolismo y lograr efectos como la piel

hidratada, sensible y brillante.

Efectos Físicos:

El chorro de hidroaspersión está equipado con una bomba de oxígeno a presión de 8 kg. Adopta el principio avanzado de absorción por oscilación de presión (PSA, separación rápida de alta concentración de oxígeno puro en el aire, y a través del impulso tipo pulso para mezclar 80% de moléculas de oxígeno puro y 0.9% de las moléculas de agua al agua y transportarlas en las células en las capas más profundas de la piel y reemplaza las toxinas de desecho en donde, rápidamente produce energía, promueve el metabolismo, para lograr una piel limpia, translúcida y brillante.

Ultrasonido: cara

El instrumento ultrasónico de belleza facial se basa en la teoría de la vibración de alta frecuencia. Llega profundamente a los tejidos subcutáneos, 4-6 mm para ser exactos, con una fuerte onda de vibración de 2.8MHz. Con su alta energía y permeabilidad, hace vibrar los tejidos en cada capa de su piel, exportando aceite y suciedad de los poros. Además, cambia el volumen de las células para mejorar la circulación sanguínea y estimula la proliferación de las células, haciéndola lustrosa y elástica. Además, gracias a su efecto cálido inducido por vibración de alta frecuencia, ayuda a una mejor absorción de nutrientes en la piel a una mayor velocidad.

Efectos

1. Retire los puntos negros, los puntos blancos y limpie los poros.
2. Elimine el exceso de sebo y cutina en los poros.
3. Elimine la suciedad en los poros y aclare la piel.
4. Mejore los grandes campos petroleros y recupere el equilibrio de la piel.
5. Hidrata las células y mejora la piel opaca.
6. Hidratación profunda y activación celular. Combate los radicales libres y elimina las especies dañinas de oxígeno reactivo.
7. Reduzca la secreción excesiva de aceite y reajuste el equilibrio del nivel de PH de la piel.

Rango Aplicable

1. Aquellos con piel seca con líneas finas y falta de humedad.
2. Aquellos con tez irregular y opaca.
3. Aquellos con poros grandes y gruesos, y secreción vigorosa de aceite.
4. Aquellos con poros obstruidos y poca absorción.

Rango Inaplicable

1. Aquellos que acaban de someterse a una cirugía plástica invasiva con heridas no curadas.
2. Aquellos con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
3. Los que no son realistas acerca de los resultados.
4. Aquellos que acaban de recibir productos inyectables, como ácido hialurónico, inyección intradérmica, eliminación de arrugas o cirugía plástica.
5. Aquellos que tienen una alergia severa (erupción roja).

Notas después de la operación

1. Lávese la cara con agua tibia dentro de los 3 días posteriores a la operación.
2. Fortalecer la hidratación y prestar atención a la protección solar.
3. Evite quedarse despierto hasta tarde, fumar y beber, y coma más frutas y verduras y menos alimentos grasosos.
4. Aplique una máscara hidratante una vez al día durante tres días.
5. Evite comer alimentos picantes o grasosos.

Activación Celular

Principios

Hidra Dermoabrasión

El elemento agua oxígeno-hidrógeno se refiere a que el agua pura se purificará en agua ionizada hidrógeno-oxígeno, que producirá moléculas finas de H₂ en la superficie de la piel, para penetrar rápidamente las moléculas de agua y las células en la piel, logrando la eficacia de ser sensible y translúcido. Sobre la base de la hidra tradicional facial se agrega el innovador cabezal de molienda de agua de limpieza rotativa, logrando así un mejor efecto de limpieza de la piel

En comparación con las partículas de agua ordinarias, el agua que contiene hidrógeno tiene una mayor capacidad antioxidante. Agua reactiva de hidrógeno-oxígeno = agente antioxidante y antienvjecimiento fuerte, que puede eliminar las especies reactivas de oxígeno, reducir el PH y aumentar el contenido de humedad de la piel.

Hydro Spray Jet

Mediante el uso de presión fuerte, se ponen productos salinos esterilizados (solución salina normal) o esencia en equipos de presión de aire, y las gotas de agua granular se transforman en pequeñas moléculas que entran en la piel (5-200vm micras), y las pequeñas gotas de agua serán expulsado en forma de chorro de chorro por una boquilla especialmente diseñada, y la esencia se inyectará en la capa inferior de la piel humana a una velocidad rápida.

A través de la pluma de inyección de oxígeno, tres tubos finos con forma de cabello atomizarán rápidamente moléculas de agua y oxígeno en la piel, a través del tipo de pulso para promover la inyección rápida de moléculas de agua y oxígeno en la piel en todos los niveles, para complementar el agua y el oxígeno requeridos por las células, para restaurar la actividad celular, para lograr una piel llena, húmeda y elástica.

Ultrasonido: Cara

El instrumento ultrasónico de belleza facial se basa en la teoría de la vibración de alta frecuencia. Llega profundamente a los tejidos subcutáneos, 4-6 mm para ser exactos, con una fuerte onda de vibración de 2.8MHz. Con su alta energía y permeabilidad, hace vibrar los tejidos en cada capa de su piel. Al usar un instrumento de belleza ultrasónico para masajes, el calor de las ondas ultrasónicas puede penetrar hasta 6 mm debajo de la piel, hacer que la sangre y la linfa fluyan suavemente, acelerar la circulación sanguínea de las células finas, iniciar el efecto biológico del tejido celular, desvanecer todo tipo de color manchas, blanquear la piel y activar y regenerar las células del tejido profundo.

RF

RF funciona a través de los circuitos formados por electrodos en pareja. La frecuencia óptima del efecto biotérmico de radiofrecuencia es de 3 MHz, y la velocidad máxima de cambio extremo es de 8 millones de partículas cargadas en los tejidos por segundo. En el cambio rápido de electrodos, el tejido dérmico resiste naturalmente la corriente de radiofrecuencia y genera energía térmica. Durante el proceso, la RF promueve el metabolismo y la proliferación del colágeno de la piel a través de un alto cambio de ondas electromagnéticas, por lo tanto, calienta la capa de la dermis de la piel, logrando así efectos como estiramiento, estiramiento, eliminación de arrugas, antienvjecimiento y piel suave.

Efectos Físicos

La corriente de RF se convierte en calor por resistencia. El cuerpo humano es un conductor con una cierta cantidad de resistencia. Cuando se aplica corriente de RF al cuerpo, el cuerpo se convertirá en parte del circuito. Con la fuerza combinada de corriente de alta frecuencia, electrodo neutro y sonda de tratamiento especial, se forma un campo electromagnético de equilibrio profundo debajo de la dermis de la piel, y cuando se aplica a las moléculas de agua dentro del colágeno, provoca la vibración y rotación de las moléculas de agua bipolares. Millones de veces por segundo para generar calor, y se aplica selectivamente a la dermis profunda y la capa fibrosa profunda, estimula la contracción inmediata de la fibra de colágeno. El calor provoca una serie de efectos físicos, como acelerar el metabolismo, generar nuevas fibras de colágeno, restaurar la elasticidad de la piel para que se llene y se vuelva hinchada. La aplicación a largo plazo del dispositivo de belleza RF puede promover la circulación sanguínea de la piel, aumentar el oxígeno, promover la reconstrucción y renovación de la fibra de colágeno para suavizar las arrugas, dejando la piel suave y elástica.

Efectos

1. Limpiar y tensar la piel del rostro.
2. Aligerar la pigmentación y blanquear la piel.
3. Refina la piel, dejando un brillo saludable.
4. Aumente la elasticidad de la piel y evite la flacidez y la laxitud.
5. Hidratación y reducción de poros.
6. Acelerar la circulación sanguínea y el metabolismo.
7. Estimular la proliferación de colágeno y retrasar el envejecimiento.
8. Levante y apriete la piel del rostro.

Rango Aplicable

1. Aquellos con piel oscura y opaca.
2. Aquellos con piel floja y flácida.
3. Aquellos con piel seca, clara y líneas finas.
4. Aquellos con contorno facial poco claro.
5. Aquellos con piel áspera y poros grandes.
6. Los que trabajan en la oficina durante largas horas, frente a la luz ultravioleta.

Rango Inaplicable

1. Aquellos que acaban de someterse a cirugía plástica e implantaron prótesis y materiales metálicos en el sitio de tratamiento.
2. Aquellos que acaban de recibir productos inyectables, como ácido hialurónico, inyección intradérmica, eliminación de arrugas o cirugía plástica.
3. Aquellos con hipertensión, enfermedad cardíaca, diabetes, tiroides severa, tumor maligno, etc.
4. Aquellos que sufren de alergia, piel sensible severa y alergia a metales.
5. Aquellos con trauma en la piel o herida.
6. Los que envejecen demasiado.
7. Aquellos que están durante la menstruación, el embarazo, la lactancia y la recuperación quirúrgica.
8. Aquellos con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
9. Aquellos que tienen expectativas poco realistas de resultados.

Notas después de la operación

1. No se lave la cara con agua sobrecalentada dentro de los tres días (se puede usar agua tibia o fría).
2. Fortalecer la hidratación y el protector solar.
3. No se sumerja en aguas termales, saunas de vapor ni haga ejercicio vigoroso, etc. dentro de los tres días.
4. Use máscaras faciales al menos tres veces por semana.
5. Debe evitarse la comida picante y grasosa. Quedarse despierto hasta tarde, fumar y beber están prohibidos. Más verduras, frutas y alimentos menos grasosos.
6. Evite los alimentos que causen "tres Hs" (presión arterial alta, colesterol alto y azúcar alta en la sangre), se recomienda una comida menos grasosa.

Rejuvenecimiento de piel

Principios

Depurador de limpieza facial

Se adopta el principio de funcionamiento de la onda ultrasónica de alta frecuencia. La onda mecánica de alta frecuencia de la onda ultrasónica tiene características de vibración, masaje y líquido emulsionante. Al mismo tiempo, la propiedad de emulsión de la onda ultrasónica puede eliminar eficazmente la cutícula facial, la suciedad profunda y la espinilla en los poros, etc. El uso eficaz de la cámara de vibración ultrasónica conduce a la atomización del agua, limpia la basura de las profundidades de los poros. Mientras tanto, las impurezas ocultas en los poros se rompen por una onda ultrasónica de 2800KHZ a través de vibración de alta frecuencia y vibración ultrasónica. El uso con productos para el cuidado de la piel también puede acelerar la absorción. Tiene un efecto obvio sobre la piel muerta y la cabeza negra.

Efecto físico

La onda de sonido de vibración de alta frecuencia se combina con un producto suavizante o una crema exfoliante para suavizar la capa de cutícula rugosa dañada y abrir los poros con una onda de sonido, y eliminar la basura y el desperdicio profundo en los poros por vibración de alta frecuencia.

En la parte posterior del instrumento, la vibración de alta frecuencia combinada con el producto de esencia puede inducir el producto en la piel, aumentando la elasticidad y suavizado de la piel.

Ultrasonido: Cara

El instrumento ultrasónico de belleza facial se basa en la teoría de la vibración de alta frecuencia. Llega profundamente a los tejidos subcutáneos, 4-6 mm para ser exactos, con una fuerte onda de vibración de 2.8MHz. Con su alta energía y permeabilidad, hace vibrar los tejidos en cada capa de su piel, exportando aceite y suciedad de los poros. Además, cambia el volumen de las células para mejorar la circulación sanguínea y estimula la proliferación de las células, haciéndola lustrosa y elástica. Además, gracias a su efecto cálido inducido por vibración de alta frecuencia, ayuda a una mejor absorción de nutrientes en la piel a una mayor velocidad.

Hydro Spray Jet

Al usar oxígeno a presión de alta fuerza, la solución salina esterilizada (solución salina normal) y el oxígeno ingresan al equipo del compresor de aire al mismo tiempo, y transfieren partículas de agua a pequeñas moléculas que entran en la piel (5-200 micras), pequeñas gotas de agua. Será en forma de spray (chorro de chorro), con una velocidad (supersónica) de 200 m / s hecha de una boquilla diseñada especialmente, velocidad en el fondo de la piel humana con agua y oxígeno.

Martillo frío

Use el principio del aire acondicionado. Se utilizan cerámicas especiales para obleas para absorber energía y refrigerar a - 5 grados en un instante. El método de acumulación de calor físico producido por la absorción de energía de la oblea hace que un lado produzca calor hasta 40 grados. El ventilador descarga el exceso de energía térmica y logra el efecto de temperatura constante y congelación alternativamente. También promueve el metabolismo, alivia las reacciones alérgicas, reduce los poros, calma la piel, blanquea y suaviza la piel.

Efectos biológicos: durante el proceso de enfriamiento, la temperatura de los tejidos se enfría, los vasos sanguíneos y las venas se contraen, la tasa metabólica se reduce, la actividad celular se inhibe, la sensibilidad del nervio periférico se reduce, lo que tiene un efecto sedante y calmante, contrarrestando o reduciendo los síntomas de una reacción alérgica, como como enrojecimiento, hinchazón y dolor, logrando por lo tanto ciertos efectos, como calmar la piel, reducir el enrojecimiento y la hinchazón, reducir los poros, etc.

Aplice enfriamiento y calentamiento a la piel para obtener el efecto correspondiente. El enfriamiento puede reducir la temperatura del tejido, reducir los vasos sanguíneos y las venas, reducir la tasa metabólica, restringir y ralentizar la actividad celular, reducir la sensibilidad nerviosa periférica, calmar y pacificar, contrarrestar y reducir el enrojecimiento, la hinchazón y el dolor de la piel, especialmente para la piel alérgica. Puede calmar la piel, reducir el enrojecimiento y la hinchazón, y reducir los poros. El calentamiento puede calentar el tejido, elevarse temperatura, ajustar la circulación sanguínea, acelerar el metabolismo y promover la absorción del producto.

Efectos

1. Promover la absorción y penetración del producto.
2. Calma y calma la piel.
3. Eliminar el enrojecimiento, hinchazón, calor, dolor, picazón y molestias.
4. Mejore la hidratación, evite la pérdida de agua y retenga la humedad.
5. Alivia la piel del acné y la piel frágil.
6. Contraer los poros, refinar la piel, suavizar las líneas finas
7. Repare la barrera cutánea, mejore la resistencia de la piel y repare después de

la exposición al sol.

8. Limpie el exceso de suciedad .

Rango aplicable

1. Aquellos con piel seca.
2. Aquellos con poros dilatados, obstruidos y piel clara y sin brillo.
3. Las personas con piel sensible.
4. Aquellos con córnea delgada y piel cuprosa.
5. Aquellos con acné y piel sensible.
6. Aquellos con poros grandes y piel clara.
7. Aquellos con piel opaca.
8. Los del tipo de piel grasa, seca y combinada.
9. Aquellos con enrojecimiento e hinchazón después de la exposición al sol.

Rango no aplicable

1. Aquellos que sufren de alergia o con heridas.
2. Aquellos con piel sensible severa.
3. Los que están durante el embarazo, y la recuperación quirúrgica.
4. Aquellos con absceso en la cara.
5. Los que acaban de someterse a cirugía plástica
6. Quienes padecen enfermedades cardiovasculares y tres three H graves (hipertensión, hiperlipidemia, hiperglucemia).
7. Aquellos con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
8. Aquellos con materiales metálicos implantados en el cuerpo (por ejemplo, marcapasos, placa de acero, dientes metálicos, etc.).
9. Aquellos con lesión cutánea, inflamación y otros signos locales de enfermedad.
10. Los que están durante el período de alergia en la piel.
11. Los que están durante el embarazo y la menstruación.

Notas después de la operación

1. Fortalezca el protector solar y evite la exposición al sol inmediatamente después del tratamiento.
2. Evite tocar, agarrar y resistir.
3. Preste atención para aplicar más máscaras para agregar humedad a la piel para prevenir la sequedad y acelerar el metabolismo.
4. No cambie los productos para el cuidado de la piel con demasiada frecuencia.
5. Asegúrese de quitarse el maquillaje antes de acostarse.
6. Evitar la exposición a altas temperaturas.
7. Evite el alcohol y los productos que contienen hormonas.

Cuidado facial general

Efectos

1. Hidrata y nutre profundamente la piel.
2. Mejorar la calidad y elasticidad de la piel.
3. Mejorar la piel desigual y áspera.
4. Retire las cutículas viejas.
5. Limpieza profunda de la piel.
6. Dragar los poros y regular la secreción de aceite.
7. Ilumina y levanta la piel.

8. Mejora los poros grandes y aligera las líneas finas.
9. Eliminar la nariz de fresa, el acné, los puntos negros.
10. Mejore las líneas secas, líneas finas, círculos oscuros leves y bolsas debajo de los ojos.
11. Promover la absorción de la piel y el metabolismo.

Rango aplicable

1. Aquellos con mala absorción de la piel y falta de agua en la base de la piel.
2. Aquellos con tono de piel oscuro y desigual.
3. Aquellos con secreción excesiva de aceite, piel grasa y seca.
4. Aquellos cuya piel no es lisa debido a una limpieza inadecuada.
5. Aquellos con piel facial floja y flácida.
6. Aquellos con poros obstruidos y mala absorción de la piel.
7. Aquellos cuya piel está deshidratada, opaca e inelástica.
8. Aquellos con piel áspera y poros grandes.
9. Aquellos con alta rotación de secreción de aceite.
10. Aquellos con ojos secos, fatiga visual, fatiga ocular, círculos oscuros leves y bolsas debajo de los ojos.
11. Aquellos con líneas finas secas o leves alrededor de los ojos.
12. Aquellos con mala absorción ocular y metabolismo.

Rango inaplicable

1. Aquellos con piel severamente sensible o aquellos en fase alérgica.
2. Aquellos cuya nariz tiene prótesis.
3. Aquellos con trauma facial extenso.
4. Las embarazadas y las que padecen enfermedades cardíacas graves, tres H graves (hipertensión, hiperlipidemia, hiperglucemia), enfermedades graves, etc.
5. Aquellos con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
6. Aquellos que acaban de recibir una inyección, como ácido hialurónico, inyección intradérmica, eliminación de arrugas o cirugía plástica.
7. Aquellos con implantes metálicos en el cuerpo, como stents y marcapasos, o son alérgicos al metal.

Notas después de la operación

1. Lávese la cara con agua tibia dentro de los 3 días posteriores a la operación.
2. Fortalecer la hidratación y prestar atención a la protección solar.
3. No use productos estimulantes para el cuidado de la piel, incluidos exfoliantes, exfoliantes y AHA, dentro de una semana después de la operación.
4. Evite quedarse despierto hasta tarde, fumar y beber, y coma más frutas y verduras y menos alimentos grasos.
5. Aplique una máscara hidratante una vez al día durante tres días.

Parte II

Operación detallada

1. Después de comprobar que el instrumento está conectado correctamente, aparecerá la siguiente interfaz de inicio cuando se encienda la fuente de alimentación.



Seleccione el idioma y valla a la siguiente imagen.



1.1 Seleccione la Función



Ajustes




Ajuste de Tiempo



Visualización del Tiempo



Eliminar

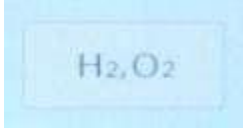

H₂,O₂



Perilla del flujo de agua



Perilla para seleccionar el modo.




Perilla de ajuste de succión.

1.2 Operación detallada: Hidra Dermoabrasión




Hydra dermoabrasión Pantalla de interfaz

Presione  para empezar la operación

1.2 Operación detallada: martillo frío




Martillo frio Pantalla Interface

Presión  para empezar la operación

1.2 Operación detallada: de spray



Hydro pantalla de interfaz de chorro de spray

Presione  para empezar la operación


1.1 1.1 Operación detallada: RF




Pantalla de interfaz RF




Ajuste del horario de trabajo RF

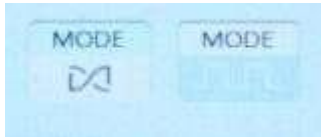

Ajuste del modo de trabajo de RF

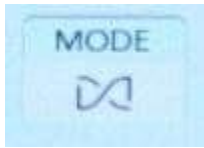


Modo Consecutivo

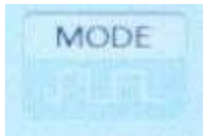

Modo Intermitente


1.2 Operacion Detallada: Ultrasonido

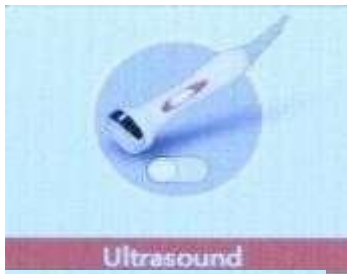


pantalla de interfaz de ultrasonido



Tiempo de Trabajo de Ultrasonido

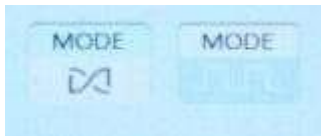

Modo de trabajo

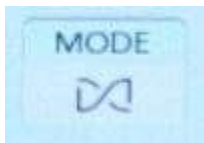

modo consecutivo



modo intermitente


1.3 Operación Detallada: Skin Scrubber




Pantalla de interfaz del Skin Scrubber




Tiempo de trabajo del Skin Scrubber

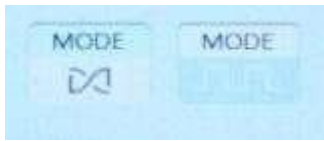

Ajuste del modo de Trabajo

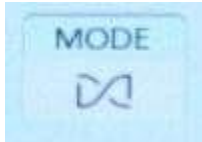

Modo consecutivo

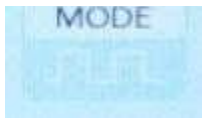

Modo intermitente

2. Parámetros Técnicos

Tipo de artículo: Máquina de belleza Material: ABS

Color: como muestran las imágenes Voltaje: 110-240 V

Enchufe opcional: Enchufe de EE. UU., Enchufe de Reino Unido, Enchufe de AU,

Enchufe de la UE Tamaño del artículo: 25 * 40 * 38 cm / 9.84 * 15.75 * 14.96in Peso del paquete: Aprox. 7000g

3. Precauciones de Seguridad

Consulte a su médico o profesionales antes de usar el dispositivo si tiene los siguientes síntomas:

1. Las que están embarazadas o en periodo de lactancia.
2. Aquellos con enfermedad cardíaca o marcapasos equipados.
3. Aquellos cuyas heridas no han cicatrizado y que se están recuperando de la operación.
4. Aquellos con epilepsia, diabetes severa e hipertiroidismo.
5. Aquellos con tumor maligno, hemofilia o sangrado severo.
6. Aquellos con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
7. Aquellos con implantes metálicos en el cuerpo, como stents y marcapasos, o que son alérgicos al metal.
8. Use con precaución para los usuarios sensibles actuales.

4. Normas

1. Use un pin de conexión a tierra y asegúrese de que la toma de corriente del dispositivo esté conectada correctamente antes de cada operación.
2. Asegúrese de que el voltaje del dispositivo sea apropiado. Si el voltaje de la fuente de alimentación local es inestable, recomendamos que los usuarios aumenten al voltaje de alimentación correspondiente.
3. Para garantizar el efecto terapéutico y la vida útil normal del dispositivo, utilice los accesorios especificados provistos o recomendados por el fabricante original.
4. El dispositivo no debe colocarse en un entorno húmedo o cerca del agua, ni debe exponerse directamente a la luz solar.
5. No coloque el dispositivo cerca de una fuente de calor fuerte, ya que esto puede afectar la vida útil y el uso normal del dispositivo.
6. Por favor, no use el dispositivo en ojos, tiroides, paratiroides, testículos, abdomen de mujeres embarazadas y marcapasos.
7. Los pacientes que padecen enfermedades deben consultar con un médico y obtener el permiso del médico antes de usar.
8. Apague el interruptor de alimentación del dispositivo y asegúrese de que la fuente de alimentación total del dispositivo esté apagada antes de que el personal se vaya después del uso diario, para garantizar la seguridad de los productos eléctricos.
9. Utilice el dispositivo o entrene a los operadores del dispositivo siguiendo estrictamente las instrucciones del manual del usuario.
10. Comience desde el nivel de energía más bajo y sume lentamente.
11. Al usar este dispositivo, las partes operativas deben mantenerse húmedas y se debe evitar la piel seca.
12. Evite usar en ojos y oídos, alrededor de lesiones de la piel o áreas que fueron sometidas a cirugía plástica.
13. Ajuste la presión de succión al vacío de acuerdo con el nivel de comodidad del cliente en consecuencia cuando opere el hidro facial.
14. Recuerde al cliente que debe ajustar la respiración cuando opere en el filtro con chorro de agua pulverizada. Las sondas faciales, de martillo y de ultrasonido se pueden usar por separado y también juntas, y la última tiene un mejor efecto.
15. Limpie el instrumento con solución salina normal después de la operación para garantizar su limpieza e higiene y prolongar su vida útil.
16. La parte delantera del depurador de limpieza es para una limpieza profunda y la parte posterior es para levantar la piel y absorber nutrientes.
17. Varios tipos de filtros hidro faciales se pueden limpiar con agua, empapados en alcohol al 75%.
18. Limpie la botella de desechos inmediatamente después del tratamiento hidrofacial.
19. Limpieza de la cabeza del tornillo: se debe realizar una limpieza básica para mantener la prevención de infecciones. Después de usar la cabeza del tornillo, se puede usar un cepillo de dientes desechable para cepillar las cosas sucias en la ranura de la cabeza del tornillo, enjuagar las tetas con agua limpia, luego remojar con alcohol durante 3 minutos y finalmente enjuagar los ingredientes del alcohol.
20. Limpieza interna (después de usar cada botella de solución):

Reemplace la sonda con un cabezal de limpieza, llene la botella de solución con media botella de agua purificada, encienda el dispositivo, conecte la sonda con la mano, ajuste el flujo de agua al máximo y deje que el agua fluya nuevamente para limpiar la solución residual. en la pipa Alrededor de un minuto.

21. Todas las partes del instrumento deben estar apretadas, de lo contrario, las fugas internas reducirán la presión del aire, lo que no provocará succión o una pequeña corriente de agua.

5. Solución de problemas

1. ¿El instrumento no puede arrancar y la luz de la tecla en la parte posterior del instrumento no funciona?

A. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente que funcione.

B. Asegúrese de que el tubo del fusible en la parte posterior del instrumento no esté flojo o quemado.

2. ¿No hay salida de RF del instrumento?

A. Compruebe si el enchufe que conecta el mango del instrumento y el cuerpo está bien conectado.

B. Compruebe si se ha limpiado el área de tratamiento. Los productos de aceite esencial de grasa o aceite pueden causar un contacto deficiente entre el mango de tratamiento del instrumento y el cuerpo humano, lo que no produce salida de RF.

3. ¿Salida de RF debilitada?

A. Compruebe si el enchufe que conecta el mango del instrumento y el cuerpo está bien conectado.

B. Compruebe si la grasa no conductora y otras sustancias están manchadas en el mango del tratamiento, lo que provocará un contacto deficiente y debilitará la salida.

C. Compruebe si el producto utilizado es el producto adaptativo especificado por el instrumento.

4. ¿No sale succión del hidro facial y no hay salida de nutrientes?

A. Compruebe si la tapa de la botella de recuperación de aguas residuales está apretada o no, y si la botella de solución nutritiva está apretada o no.

B. Compruebe si el botón para ajustar la solución de succión y nutrientes permanece en 0.

C. Compruebe si la producción de solución nutritiva es excesiva.

5. ¿No sale aerosol del chorro de hidroaspersión?

A. Compruebe si la boquilla está bloqueada.

B. Compruebe si la parte de regulación de la cola de la boquilla está apretada.

C. Compruebe si la llave de la pistola pulverizadora está suelta.

6. El instrumento se puede activar, pero ¿aparece información incorrecta en la pantalla?

A. Desenchufe el cable de alimentación detrás del instrumento y espere aproximadamente 1 minuto antes de reiniciar el instrumento.

B. Si el método anterior no funcionó, comuníquese con el distribuidor del instrumento para obtener ayuda.

1. Si no hay succión, verifique:

- A. Si la goma dentro de la tapa de la botella de desechos está apretada.
- B. Si el anillo de goma de la conexión entre la sonda hidráulica y la cabeza del tornillo está separado.
- C. Si el ajuste de succión se ha ajustado al máximo.
- D. Si el interior de la máquina se ha limpiado para evitar bloqueos.

2. Si no hay flujo de agua, verifique:

- A. Si la botella de solución está instalada en su lugar.
- B. Si está bloqueado debido a impureza. Si es así, límpielo.
- C. Si los enchufes no están bien conectados.
- D. Si el flujo de agua está regulado.
- E. Presione la punta de la sonda hidráulica durante aproximadamente 10 segundos, ya que el agua tardará un tiempo en fluir desde la botella de solución a la sonda, tenga paciencia y espere un momento.

6. Preguntas frecuentes

1. Q: ¿Por qué exfoliar?

A: La cutícula es la capa sobre la epidermis donde las células están completamente muertas. Dependiendo de su cuerpo, la cutícula consta de 15 a 20 capas de células muertas. La piel humana tiene un ciclo metabólico, que normalmente es de 28 días. Es el ciclo metabólico de las personas en la pubertad. Para los adultos, el ciclo metabólico debe ser la edad real +10. Pero debido a varias razones, las células córneas muertas pueden no caerse a tiempo y provocar el envejecimiento de las cutinas. Por otro lado, también afecta el color de la piel y el metabolismo de la piel, por lo que debe utilizarse otro método cuando el proceso metabólico normal no hará el trabajo por sí solo.

2. P: ¿Puedo usar maquillaje después de usar este instrumento?

R: Absolutamente, la piel después del tratamiento está húmeda y regordeta, el maquillaje realmente durará más tiempo. Esta es una forma segura, saludable, rápida y efectiva de amamantar sin perforar la piel o dejar cicatrices.

1. P: ¿Cuánto tiempo llevará ver los resultados?

R: Después de un tratamiento, se muestran resultados obvios, como piel limpia y translúcida. Funciona aún mejor de manera continua, mejorando los problemas de la piel, como deshidratación, oscurecimiento, líneas finas y proceso de envejecimiento en las capas más profundas de la piel.

2. P: ¿Cuánto tiempo puedo comenzar a ver los resultados del tratamiento con RF?

A: En circunstancias normales dentro de ese día o una semana. El tejido de colágeno de la piel se calienta y produce contracciones, y obviamente puede sentir un endurecimiento de la piel. Debido a que la RF funciona estimulando el tejido subcutáneo y provoca una regeneración sostenible del colágeno, así que cuanto más lo haga, más efectos visibles recibirá.

3. P: ¿La RF es dañina para la piel?

R: El tratamiento con RF se incluye en la categoría de operación no quirúrgica. Estimula la regeneración de colágeno en el fondo de la piel y aumenta el metabolismo, por lo tanto, no tiene daños en la piel. El enrojecimiento parcial y la fiebre es el fenómeno normal de la circulación sanguínea acelerada, y se resolverá por sí solo después de un momento, por lo que no hay que preocuparse.

1. P: ¿El tratamiento hidro facial aumentará los poros?

R: No. El tratamiento de limpieza profunda facial facial sigue la secuencia de tres pasos. El primer paso es usar el líquido de exportación para suavizar la capa cutánea de la piel; el segundo paso se combina con diferentes soluciones (AS1 AHA, AS2 BHA, solución nutritiva AS3; elija una solución diferente según el tipo de piel diferente); el tercer paso es hidratar la piel. Hydra facial es adecuado para todo tipo de piel y no agranda los poros sino que refina la piel.

2. P: ¿Es Indispensable?

R: No, esto es para que los problemas de la piel mejoren y limpien profundamente la piel, que pertenece al mantenimiento y mejora de la desnutrición de la piel causada por otros factores. Se utiliza para ayudar a la piel a absorber productos nutricionales, resolver otros problemas como la piel oscura, amarillenta, la escasez de agua, la piel áspera y la piel arrugada. Sin el tratamiento, su piel solo volverá a la secreción propia y al envejecimiento, por lo tanto, no está involucrado el factor de dependencia.

7. El paquete Incluye:

1 x Maquina principal

1 x Cabezal Martillo frio

1 xCabezal RF

1 x Pluma Hydro Dermoabrasión





1 x Cabezal de Ultrasonido


1xPluma Atomizador




1 x Skin Scrubber

1 x Cable de Alimentación

8. Diagrama de Operación

Ajuste de parámetros	Producto	técnica	Diagrama
<p>Limpieza profunda: 60 min, una vez / semana</p>			
<p>Hydra Dermabrasion Energy: Se recomienda configurar el volumen de exportación de líquido, ya que la succión pequeña se puede ajustar en función del nivel de comodidad</p> <p>Modo depurador de limpieza: modo de trabajo consecutivo</p> <p>Martillo frío: encienda la operación</p>	<p>Aceite desmaquillante + lavado facial + Líquido de exportación de espinillas + vapor caliente + esencia facial + esencia de ojos + dispositivo + máscara facial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desmaquillarse, 5 min. 2. Aplicar tóner, 1 min. 3. Aplique líquido de exportación de espinillas + vapor caliente en la zona T (nariz, frente, mentón) o área obstruida, 5-8 min. 4. Operación de dermoabrasión con hidra: presione suavemente la frente con la punta del cristal durante 3-5 veces, luego apriete la frente con fuerza y permanezca por un segundo, luego gire suavemente la sonda con el dedo y recójala; cada área de tratamiento debe estar justo al lado de otra (frente → nariz → chin → mejillas) puede duplicar la operación en la zona T donde los poros están severamente obstruidos, alrededor de 10 minutos. 5. Lavar la cara limpia, 2 min. 6. Aplique un poco de algodón con agua y la cara húmeda, luego comience la operación de limpieza del depurador mientras limpia la cara con el algodón húmedo. 7. Comience desde la mandíbula, luego mueva hacia arriba con el depurador; puedes duplicar el operación en córneo grueso, 	<p>Técnica 4</p>  <hr/> <p>Técnica 7</p>  <hr/> <p>Técnica 10</p>  <hr/> <p>Técnica 11</p> 

		<p>5-8 min.</p> <p>8. Lave la cara limpia, 2 min.</p> <p>9. Aplique esencia hidratante de manera uniforme en la cara y sujete la piel con la parte posterior del depurador.</p> <p>10. Combinado con la mano y arriestra la piel en líneas para mantener el área de tratamiento apretada y levantada, 3-5 veces.</p> <p>11. Muévase hacia arriba y levante hacia la línea del cabello en la frente, 3-5 veces.</p> <p>12. Haz lo mismo en el otro lado.</p> <p>13. Aplicar mascarilla facial hidratante, 15 min.</p> <p>14. Retirar la mascarilla y lavarla, 2 min.</p> <p>15. Aplique tóner y esencia uniformemente en el área de tratamiento, y use un martillo frío para ayudar a reducir los poros, 5 min.</p> <p>16. Aplicar crema y protector solar</p>	
<p>Tratamiento recomendado</p> <p>10 tratamientos representan un curso completo. Después de un tratamiento, la piel se siente hidratada y limpia. Después de un curso completo, la piel parece estar uniformemente brillante y poros y relativamente más pequeña. Después de 3 cursos, la piel puede mantenerse hidratada por hasta 24 horas, haciendo que la piel esté rojiza, translúcida y elástica..</p>			
<p>Reposición de la piel: 60 min, una vez / semana</p>			
<p>Hydra Dermabrasion Energy: Se recomienda configurar el volumen de exportación de líquido, ya que se</p>	<p>Aceite desmaquillante + lavado facial + Líquido de exportación de espinillas + vapor caliente +</p>	<p>1. Desmaquillar y limpiar la cara, 5 min.</p> <p>2. Aplicar tóner, 2 min.</p> <p>3. Aplique líquido de exportación de espinillas + vapor caliente en la zona T (nariz, frente, mentón) o área obstruida, 5-8 min.</p> <p>4. Operación de</p>	<p>Técnica 4</p> 

<p>puede ajustar una pequeña succión sujeto a</p>	<p>esencia facial + esencia de ojos + dispositivo + máscara facial</p>	<p>dermoabrasión de hidra: presión suavemente en la frente con el cristal</p>	<p>Técnica 8</p> 
<p>el nivel de comodidad de uno</p> <p>Chorro de spray hidráulico: Se recomienda configurar el volumen de exportación de líquido como pequeño</p> <p>Nivel de energía ultrasónica: 30% -80%</p>		<p>incline de 3 a 5 veces, luego apriete la frente con fuerza y permanezca por un segundo, luego gire suavemente la sonda con el dedo y recójala; cada área de tratamiento debe estar justo al lado de otra (frente → nariz → chin → mejillas) puede duplicar la operación en la zona T donde los poros están severamente obstruidos, alrededor de 10 minutos.</p> <p>5. Lavar la cara limpia, 2 min.</p> <p>6. Aplicar tóner, 1 min.</p> <p>7. Vierta la esencia (hidratante) en la botella hidráulica (con la proporción de esencia: el agua destilada es 2: 1), 2 min.</p> <p>8. Operación del chorro de spray hidráulico: comience desde la barbilla hasta el lóbulo de la oreja, luego desde la esquina de la boca hasta la puerta de la oreja. Muévase en líneas paralelas, mientras tanto, sujete la piel con la mano libre para mantener la superficie de tratamiento apretada, 2 veces.</p> <p>9. Muévase verticalmente hacia la línea del cabello en la frente, mientras tanto,</p>	<p>Técnica 9</p>  <p>Técnica 11.12</p> 





		<p>sujete la piel con la mano libre para mantener la superficie de tratamiento apretada, 2 veces.</p> <p>10. Aplicar esencia de manera uniforme en la cara, 2 min.</p> <p>11. Operación ultrasónica: comience desde la barbilla, sujete la piel horizontalmente en círculos para mantener la superficie de tratamiento apretada, 3-5 veces.</p> <p>12. Muévase horizontalmente en círculos en la frente, 3-5 veces.</p> <p>13. Aplicar facial hidratante mask, 15 min.</p> <p>14 Qúitese la máscara y lávese la cara limpia, 2 min.</p> <p>15 Aplicar tóner, esencia, crema y protector solar.</p>	
--	--	--	--

Tratamiento recomendado:

10 tratamientos representan un curso completo. Después de un tratamiento, su piel parecerá limpia y translúcida. Después de un curso completo, verá que su piel está completamente hidratada con menos secreción de aceite y lentamente para recuperar el equilibrio. Después de dos cursos, su piel estará suave, fina, brillante y llena de elasticidad. Tres cursos ayudan a que su piel permanezca en el estado actual y previenen el envejecimiento de la piel..

Activación celular: 60 min, una vez / semana




<p>Hydra Dermabrasion Energy: Se recomienda a configurar el volumen de exportación de líquido, ya que la succión pequeña se puede ajustar en función del nivel de comodidad</p> <p>Chorro de spray hidráulico: Se recomienda configurar el volumen de exportación de líquido como pequeño</p> <p>Nivel de energía ultrasónica: 30% -80%</p> <p>Nivel de energía de RF: 30% -80%</p> <p>LED: rojo</p>	<p>Aceite desmaquillante + lavado facial + Líquido de exportación de espinillas + vapor caliente + esencia facial + esencia de ojos + dispositivo + máscara facial</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Desmaquillar y limpiar la cara, 5 min.2. Aplicar tóner, 2 min.3. Aplique líquido de exportación de espinillas + vapor caliente en la zona T (nariz, frente, mentón) o área obstruida, 5-8 min.4. Operación de dermoabrasión con hidra: presione suavemente la frente con la punta del cristal durante 3-5 veces, luego apriete la frente con fuerza y permanezca por un segundo, luego gire suavemente la sonda con el dedo y recójala; cada área de tratamiento debe estar justo al lado de otra (frente → nariz → chin → mejillas) puede duplicar la operación en la zona T donde los poros están severamente obstruidos, alrededor de 10 minutos.5. Lavar la cara limpia, 2 min.6. Aplicar tóner, 1 min.7. Vierta la esencia (hidratante) en la botella hidráulica (con la proporción de esencia: el agua destilada es 2: 1), 2 min.	<p>Técnica 4</p>  <p>Técnica 8</p>  <p>Técnica 9</p>  <p>Técnica 11.12</p> 
--	--	--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desmaquillar y limpiar la cara, 5 min. 2. Aplicar tóner, 2 min. 3. Aplique líquido de exportación de espinillas + vapor caliente en la zona T (nariz, frente, mentón) o área obstruida, 5-8 min. 4. Operación de dermoabrasión con hidratación: presione suavemente el frente con la punta del cristal durante 3-5 veces, luego apriete la frente con fuerza y permanezca por un segundo, luego gire suavemente la sonda con el dedo y recójala; cada área de tratamiento debe estar justo al lado de otra (frente → nariz → mentón → mejillas) puede duplicar la operación en la zona T donde los poros están severamente obstruidos, alrededor de 10 minutos. 5. Lavar la cara limpia, 2 min. 6. Aplicar tóner, 1 min. 7. Vierta la esencia (hidratante) en la botella hidráulica (con la proporción de esencia: el agua destilada es 2: 1), 2 min. 19. 19. Haz lo mismo en el otro lado. 8. Aplicar esencia de manera uniforme en la cara, 2 min. 9. Aplicar mascarilla hidratante, 15 min. 10. Aplique la máscara facial y encienda el LED (rojo). 11. Quítese la máscara y lávese la cara limpia, 2 min. 12. Aplicar tóner, esencia, crema y protector solar. 	<p>Técnica 15</p>  <p>Técnica 16</p>  <p>Técnica 17</p>  <p>Técnica 18</p> 
--	---	--

Tratamiento Sugerido:

10 tratamientos representan un curso completo. Una vez hecho esto, la piel se hidrata y se ilumina, levantando las comisuras de los ojos. Después de un curso, la piel parece estar nutrida, regordeta y uniformemente brillante. Después de 2 cursos, la piel parece estar lisa, brillante y completamente nutrida. Después de 3 cursos, la piel parece estar brillante, translúcida. La estimulación por RF también ayuda con la regeneración de colágeno y retrasa el envejecimiento, refrescando la piel para que parezca joven nuevamente.

Rejuvenecimiento de la piel: 60 min, una vez por semana.

Chorro de spray hidráulico:	Aceite desmaquillante + lavado facial + vapor caliente + Esencia hidratante + Dispositivo + Mascarilla facial	1. Desmaquillarse, 5 min. 2. Aplicar tóner, 1 min. 3. Limpie la cara y aplique vapor caliente, 2-5 min. 4. Frote el algodón con agua y la cara húmeda, luego comience la limpieza del limpiador mientras limpia la cara con el algodón húmedo. 5. Comience desde la mandíbula, luego muévase hacia arriba con el lavador; Puede duplicar la operación en el córneo grueso, 5-8 min. 6. Lavar la cara limpia, 2 min. 7. Aplicar tóner, 1 min. 8. Vierta la esencia (hidratante) en la botella hidráulica (con la proporción de esencia: el agua destilada es 2: 1), 2 min.	Técnica 5 
Se recomienda configurar el volumen de exportación de líquido como pequeño			Técnica 9. 10 
			Técnica 12.13 



		<p>9. Operación del chorro de spray hidráulico: comience desde la barbilla hasta el lóbulo de la oreja, luego desde la esquina de la boca hasta la puerta de la oreja. Muévase en líneas paralelas, mientras tanto, sujete la piel con la mano libre para mantener la superficie de tratamiento apretada, 2 veces.</p> <p>10. Muévase verticalmente hacia la línea del cabello en la frente, mientras tanto, sujete la piel con la mano libre para mantener la superficie de tratamiento apretada, 2 veces.</p> <p>11. Aplicar esencia de manera uniforme en la cara, 2 min.</p> <p>12. Operación ultrasónica: comience desde la barbilla, sujete la piel horizontalmente en círculos para mantener la superficie de tratamiento apretada, 3-5 veces.</p> <p>13. Muévase horizontalmente en círculos en la frente, 3-5 veces.</p> <p>14. Haz lo mismo en el otro lado.</p> <p>15. Aplicar mascarilla facial hidratante, 15 min.</p> <p>16. Encienda el LED (azul, verde) mientras hace la máscara.</p> <p>17. Quítese la máscara y lávese la cara limpia, 2 min.</p> <p>18. Aplique tóner, esencia y use un martillo frío para cubrir la piel.</p> <p>19. Mueva la sonda de la mandíbula a toda la cara en círculos pequeños, alrededor de 5 min.</p> <p>20. Aplicar crema y protector solar</p>	
--	--	--	--




Tratamiento Sugerido:

10 tratamientos representan un curso completo. Después de un curso, la piel recuperará un estado normal y será menos propensa a las alergias debido a la deshidratación, los cosméticos o el cambio de estación. Después de 2 cursos, la tasa de alergia se reduce y se construye la resistencia de la piel.

Después de 3 cursos, la piel es lisa y translúcida, y la circulación sanguínea aumentará, dejando la piel con una suavidad aterciopelada.

Cuidado general de la piel: 60 min, una vez / semana

<p>Nivel de energía de Hydra Microdermabrasion: Operar de acuerdo con diferentes tipos de piel de clientes (pruebe la energía establecida en la parte inferior del brazo primero y luego en la cara, mientras tanto verifique con los clientes constantemente).</p> <p>La succión se puede ajustar en función del nivel de comodidad.</p> <p>Depurador de limpieza: modo de trabajo consecutivo</p> <p>Nivel de energía del chorro de spray hidráulico: se recomienda configurar el volumen de exportación de líquido</p>	<p>Aceite desmaquillante + lavado facial + vapor caliente + Esencia hidratante + Dispositivo + Mascarilla facial</p>	<ol style="list-style-type: none"> Desmaquillarse, 5 min. Aplicar tóner, 1 min. Aplique líquido de exportación de espinillas + vapor caliente en la zona T (nariz, frente, mentón) o área obstruida, 5-8 min. Operación de dermoabrasión con hidra: presione suavemente la frente con la punta del cristal durante 3-5 veces, luego apriete la frente con fuerza y permanezca por un segundo, luego gire suavemente la sonda con el dedo y recójala; cada área de tratamiento debe estar justo al lado de otra (frente → nariz → chin → mejillas) puede duplicar la operación en la zona T donde los poros están severamente obstruidos, alrededor de 10 minutos. Lavar la cara limpia, 2 min. Aplique un poco de algodón con agua y la cara húmeda, luego comience la operación de limpieza del depurador mientras limpia la cara con el algodón húmedo. Comience desde la mandíbula, luego mueva hacia arriba con el depurador; Puede duplicar la operación en el córneo grueso, 5-8 min. Lave la cara limpia, 2 min. Aplicar tóner, 1 min. Vierta esencia (hidratante) en la botella hidráulica (con la proporción de esencia: agua destilada siendo 2: 1), 2 min. Operación de chorro de spray hidráulico: comience desde la barbilla hasta el lóbulo de la oreja, luego desde la esquina de la 	<p>Técnica 4</p>  <p>Técnica 7</p>  <p>Técnica 11.12.14.15</p>  <p>Técnica 18</p>  <p>Técnica 19</p>  <p>Técnica 22</p>  <p>Técnica 23</p>
---	--	--	---

<p>como pequeño</p> <p>Nivel de energía ultrasónica: 30-80%</p> <p>Nivel de energía de RF: 30-80%</p> <p>Martillo frío: encienda la operación</p> <p>LED: rojo, azul</p>		<p>boca hasta la puerta de la oreja. Muévase en líneas paralelas, mientras tanto, sujete la piel con la mano libre para mantener la superficie de tratamiento apretada, 2 veces.</p> <p>12. Muévase verticalmente hacia la línea del cabello en la frente, mientras tanto, sujete la piel con la mano libre para mantener la superficie de tratamiento apretada, 2 veces.</p> <p>13. Aplicar esencia de manera uniforme en la cara, 2 min.</p> <p>14. Operación ultrasónica: comience desde la barbilla, sujete la piel horizontalmente en círculos para mantener la superficie de tratamiento apretada, 3-5 veces.</p> <p>15. Mueve horizontalmente en círculos en la frente, 3-5 veces.</p> <p>16. Haz lo mismo en el otro lado.</p> <p>17. Aplique esencia hidratante de manera uniforme en la cara y sujete la piel con la parte posterior del depurador.</p> <p>18. Combinado con la mano y apuntalar la piel en líneas para mantener el área de tratamiento apretada y levantada, 3-5 veces.</p> <p>19. Mover hacia arriba y levantar hacia la línea del cabello en la frente, 3-5 veces.</p> <p>20. Haz lo mismo en el otro lado.</p> <p>21. Operación RF del ojo: aplique la esencia del ojo de manera uniforme en los ojos, 1 minuto.</p> <p>22. Mueva la sonda hacia adentro</p>	 <p>Técnica 24</p>  <p>Técnica 25</p> 
--	--	--	--

		<p>movimiento circular debajo de los párpados inferiores en círculos pequeños hasta las sienes, 3-5 veces.</p> <p>23. Combinado con la mano, sujete la piel y levántela debajo de los párpados inferiores con la sonda hasta las sienes, 3-5 veces.</p> <p>24. Levante desde el principio de la ceja hasta el final, 3-5 veces.</p> <p>25. Combinado con la mano, muévase de la esquina de los ojos a la línea del cabello, 3-5 veces.</p> <p>26. Haz lo mismo en el otro lado.</p> <p>27. Aplicar esencia de manera uniforme en la cara, 2 min.</p> <p>28. Aplicar mascarilla hidratante, 15 min.</p> <p>29. Encienda el LED (rojo, amarillo o azul) mientras realiza la máscara.</p> <p>30. Quitar la máscara y lavar la cara limpia, 2 min.</p> <p>31. Aplique tóner, esencia y use un martillo frío para almejar la piel.</p> <p>32. Mueva la sonda de la mandíbula a toda la cara en círculos pequeños, alrededor de 5 min.</p> <p>33. Aplicar crema y protector solar</p>	
--	--	---	--

Tratamiento recomendado:

10 tratamientos representan un curso completo. Después de un tratamiento, sentirá una piel limpia, y poros más pequeños. Después de un curso completo, verá una piel uniforme y una cara brillante e hidratada. Después de dos cursos, la piel está limpia, lisa, translúcida y rojiza. Las líneas finas se aligeran y la piel está tensa y levantada. Tres platos ayudan a mantener las buenas condiciones de la piel. También ayuda a retrasar el envejecimiento.

Clasificación de Riesgos Sanitarios

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos.

Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283, 1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.

