

Modelo: MESOTERAPIA VIRTUAL

Marca: MYCHWAY

En base a lo establecido en la NOM-016-SSA3-2012

Numerales:

-5.1.13 Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, instalaciones, equipamiento mecánico y electromecánico del establecimiento, de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad operativa, asimismo, registrarlo en las bitácoras de control. El personal que opera los equipos, debe comprobar documentalmente haber recibido capacitación en el uso, conservación y mantenimiento de los equipos que opera, según corresponda.

-5.1.13.1 El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad hospitalaria o de belleza, dichas acciones, deberán ser registradas en las bitácoras.

Este equipo es exclusivamente para uso estético

CONTENIDO:

- Manual de Fábrica
- Traducción al Español del Manual de Fabrica
- Ficha técnica del Equipo
- Protocolos para Utilizar el Equipo
- Clasificación de Riesgo Sanitario

Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación:

Documentación oficial. Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a la vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio.

Rotulación. Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención médica y un rótulo que indique el horario de su asistencia.

Espacio físico externo. El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores.

Espacio físico interno. El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables.

Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios.

Expediente clínico. En relación a este punto, debes tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal y como lo establece la NOM-004-SSA3-2012.

En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso.

Documentación interna. La clínica o consultorio debe tener hoja diaria para el registro de pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimientos y fecha de expedición.

Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio en donde se detallen las políticas de atención a pacientes.

Seguridad e Higiene. El área comprendida para consultorio debe contar con un bote para bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben de llenar a menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el aseo, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos y utensilios.

Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que esta no sea mezclada con la basura municipal.

Prevención. El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas.

En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo:

Artículo 107.- ... DE LA LEY de salud de la ciudad de México


En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedan sujetos a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantil

Mesoterapia Virtual

Manual de uso



1.Instruccion de panel:

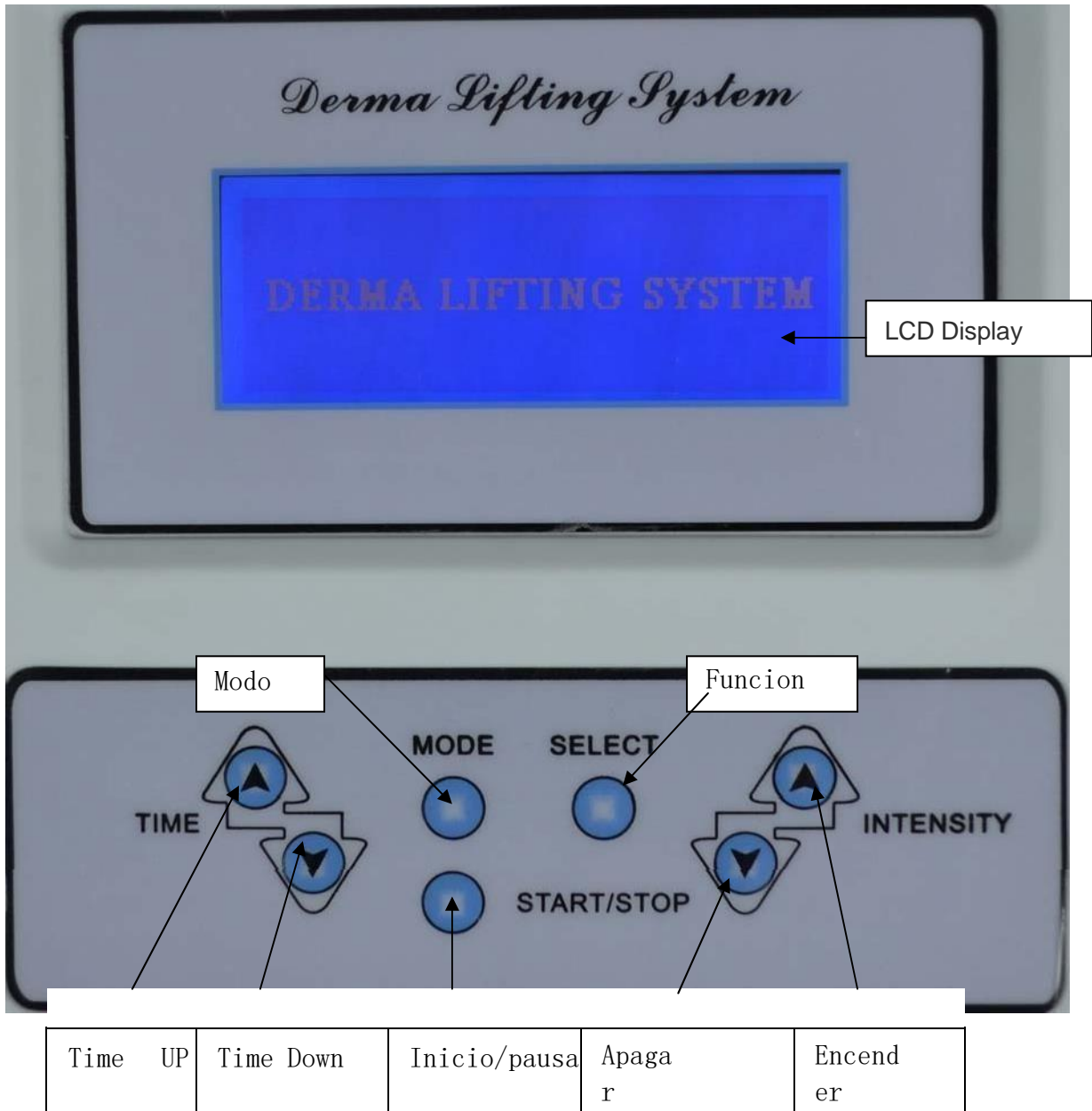

Parte Trasera



Entrada de poder	MARTILLO de energia	Eye Pen	Frio MARTILLO	Electroorador	Mesoterapia	Boton de encendido
------------------	---------------------	---------	---------------	---------------	-------------	--------------------

2、 Accesorios:



eye pen



Mesoterapia



Electroporador



Martillo Frio



Tierra de corriente

3、 Principio de operacion:

Ninguna terapia plástica de belleza con aguja puede reemplazar la belleza con aguja, con terapia plástica de electroforesis de agua, la misma tecnología y completa en el ingrediente activo o nutrientes necesarios transportados directamente a los tejidos de la piel, rápidamente absorbidos por el tejido de la piel de las superficies, efecto curativo notable. En comparación con los productos de belleza puros, no aumentó la belleza de la aguja de la terapia plástica de tasa de absorción efectiva. Fundamental resolverá toda la piel que enfrenta la barrera de la membrana de la piel y el problema transdérmico, este logro puede hacer que la piel sea más joven a corto plazo en el interior puede convertirse en realidad, acortar en gran medida la duración, se convierte en la belleza.

Perforación de la electricidad: papel directo en la piel, al instante mejora la permeabilidad del tejido cutáneo. En estado de shock, bajo la acción de la capa lipídica de células formando agujeros de choque. En estado de shock, al mismo tiempo, la formación de poros que antes no pueden ser células para absorber las moléculas hidrófilas para penetrar y entrar en las células. Utilice la tecnología de ósmosis de energía de electroforesis, canales de agua de membrana de células abiertas, membrana de ósmosis, a través del folículo piloso, la glándula sudorípara y la capa córnea, para promover la circulación.

Penetración de la electricidad: papel principal en el material molecular disperso, para ayudar a su suave penetración en la piel y en el interior, del mismo carácter, por ejemplo, cargar la molécula de nutrición positiva actual molecular mutuamente excluyente, empujar los tejidos de la piel. En este momento, las moléculas neutras a través y en la piel es un interior. Bajo el efecto de la membrana celular en la electroforesis aparece temporalmente el proceso físico microporoso, el resultado es un aumento significativo de las células, el intercambio molecular interno y externo de las células para absorber todo tipo de medicamentos, material genético, proteínas y otras moléculas, como cierre eléctrico microporoso sin cualquier impacto de las células.

4. Accesorios:

- | | |
|------------------------|------|
| 1. Electroporador | 1pcs |
| 2. Mesoterapia | 1pcs |
| 3. Martillo frio | 1pcs |
| 4. Eye pen | 1pcs |
| 5. Tierra de corriente | 1pcs |

5. Parametros Tecnicos:

1. Voltage: 100~240V
2. Voltaje de trabajo: $\leq 12V$
3. Currency: $\leq 2.08A$
4. Poder: $\leq 25W$
5. RF Bipolar: 100-500KHZ
6. Rango ultrasonico: 0.3~0.5MHz
7. BIO Slaida: 20-60HZ
8. G.W/N.W: 8/5.5kg
9. Empaque: 370*370*300MM

6. Guia de Proyecto:

1. Blanqueamiento y antiarrugas
2. Ascensión, apriete
3. Escultura del contorno facial
4. Mentón de convergencia
5. Quitar el tatuaje del cuello
6. Poro contractivo, calmado, alergia
7. Mejorar los problemas oculares (líneas finales de los ojos, bolsa, borde negro del ojo)

7. Pasos de Operacion:

1. Conexión de accesorios: según el mapa del aparato, los accesorios y la conexión del instrumento (asegúrese de que la conexión sea correcta).
2. Conexión de alimentación: el cable de alimentación y los instrumentos de la conexión del enchufe de la fuente de alimentación estarán detrás, el interruptor de alimentación rojo, el panel sugirió que la ventana digital del instrumento en el estado de funcionamiento.
3. De acuerdo con lo anterior para el botón de inicio / pausa en espera, ventana de visualización de tiempo, el instrumento comenzó a parpadear en trabajo decimal, el tiempo predeterminado es de 30 minutos (el tiempo se puede ajustar libremente).
4. Luego, consulte el ajuste libre del panel del esquema de teclas correspondiente.

8. Pasos:

Pseudoperforación - caliente con penetración de electricidad - cuidado de los ojos de belleza - congelado

1. El cabezal de la pared: a través de una fuerte onda de vibración, la pared celular abierta forma una pseudoperforación facial, facilita la absorción del producto.
2. Cabezal de electroforesis: a través del canal de agua, la proteína nota la permeabilidad, las ondas de alta frecuencia tienen células que estimulan la paga, la generación de calor por

fricción celular, complementan eficazmente la brecha celular, activan la célula perezosa, hacen que la piel opaca tenga un brillo rojizo, restaura la elasticidad de la piel, suaviza las arrugas, ascensión , apriete.

3. Lápiz de ojos hermoso: a través de la onda de iones para estimular las células del ojo, resuelva los seis problemas. La cabeza del ojo: puede bloquear el agua congelada y los nutrientes, mejorar los poros ásperos y los problemas de alergia facial.

9. Procesos

1、 1, limpieza de la piel: use líquido de desinstalación y la abuela limpia la piel completamente con aceite y suciedad.

2、 Perforación de la piel: usando la perforación fuwa con la piel del cuerpo humano, el papel de la cabeza si son productos solubles en agua se pueden usar jeringas, empuje la cabeza de perforación fuwa interna; Si los productos no solubles en agua (como crema, espera, gel, etc.), son el primer producto distribuido uniformemente en la superficie de la piel, luego use el masaje de cabeza de perforación fuwa, poro abierto, completo y no invasivo a través del canal celular interno, haga que la piel Produce un agujero de choque, pero al mismo tiempo, en la superficie de la piel, para productos sin aguja, pared rota lista, frente operativa, operación lateral con el detector, el borde puede ser operación de ambos contactos. (tiempo de uso medio facial durante cinco minutos)

3、 Sin pared rota con aguja: las manos del cliente sujetan el martillo de inducción de energía de la mano, sin efecto de esteticista de pared rota con aguja en la piel del cliente, la cabeza a su vez ajusta la intensidad de la energía y la intensidad de la cabeza del martillo de la pared rota, la superficie de la piel ha sido absorbida uniformemente por la esencia de inyección del orificio de electroshocks de piel profunda, deje que las células de la piel se recubren hasta que se absorban profundamente, aproveche al máximo el efecto de cosmología pasivo de una sola vez (tiempo de uso de la mitad de la cara durante 10 minutos; el efecto en la frente, el ajuste de la intensidad del martillo de energía es de 1 a 4 archivos, la resistencia de la cabeza de la pared rota de cuatro a seis marchas. Nota: después de operar sin la pared rota con aguja, ajuste la fuerza de la cabeza a "00")

4、 Piel congelada: inyección de producto, para que la pérdida nutricional no sea fácil y volátil, con la cabeza cerrada inteligente, cierre la piel reafirmante, cierre el orificio de choque, haga que la piel obtenga la nutrición en la consolidación más perfecta. (tiempo de uso medio facial durante cinco minutos)

5、 Película de aplicación facial: toda la cara sin pared rota con aguja después de la operación, aplique el instrumento un nivel después de la membrana (opción), según el proyecto tenga un efecto consolidado, calme el efecto de la piel. (toda la pieza facial durante 10 minutos)

10. Aplicacion:

1, mejora de la reforma de la piel facial

(1) grasa, poros voluminosos, grosor de la capa de cutina Purifica la piel, elimina la

cutina extra gruesa. Purifica los poros, descompone la grasa, alisa y reafirma los poros, restaura la piel clara y sedosa.

(2) color de la piel oscuro pesado, fatiga, pálido, edema, piel con oxígeno activo, acelerar la absorción de oxígeno, mejorar la circulación oscura muda.

(3) madura, relajación, sequedad, arrugas, reafirmación ascendente seca, aprieta la piel caída, hidratación profunda añadida, estimula la formación de colágeno. Piel actualizada, estimular

revestimiento celular, acelerar la regeneración de la división celular, restaurar la condición de la piel joven.

2, el cuidado de los ojos elimina debajo de los ojos y la bolsa, deja la apariencia de líneas finas, alivia el edema, elimina la fatiga ocular

3, tratamiento adelgazante

(1) celulitis repelida por celulitis, piel suave.

(2) subvencionar edema frívolo, vasos sanguíneos mejorados, edema de la circulación linfática.

(3) después de adelgazar la piel flácida, la piel flácida tensa, el estiramiento ascendente.

11. Precaucion:

1, la piel tiene una herida, evita la operación de la herida.

2, los que sufren de epilepsia tienen prohibido hacer

3, enfermedad cardíaca (como persona con arritmia), especialmente aquellos con marcapasos cardíaco prohibido.

4, los pacientes con cáncer prohíben hacer

5, pacientes con enfermedades infecciosas prohibidos.

6, embarazada prohibido hacer.

7, pacientes de cirugía mayor, personas con diabetes prohibidas.

8, tiene prohibido hacer cualquier metal en el cuerpo.

Clasificación de Riesgos Sanitarios

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos. Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283, 1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.