



### ¿Qué es este producto

Se toma su inspiración de los manantiales naturales conocidos por inducir el oxígeno de la piel. Al simular este efecto, desencadena una respuesta corporal que envía oxígeno a la zona tratada. Al mismo tiempo exfolia la piel y crea un entorno óptimo para la infusión de nutrientes esenciales tanto durante como después del tratamiento. La capacidad para reducir la frecuencia de Radio induce y elastina regeneración en la capa de la dermis, lo que conduce a una piel más suave y más estrecha y una reducción en líneas finas y arrugas.

### Aplicación

1. células revivir, cuidado de la piel de oxígeno del carbono.
2. rejuvenecimiento de la piel, reparación de la piel aburrada.
3. rostro reafirmante, mejorar y prevenir el envejecimiento de la piel, estrechos poros gruesos, blanqueando la piel.
4. cosméticos infusión, utilice la tecnología de ultrasonido para infectar cosméticos líquido en profundidad de la piel a través de un sistema de control exacto de la velocidad de infusión de líquido.
5. Calefacción de frecuencia de Radio, estimula la generación de albúmina para el levantamiento de la cara, la elasticidad de la piel, etc.
6. limpieza Facial profunda, limpieza microburbuja.
7. hidratante profundo.

### Mejor que microdermabrasión

Piel reafirmante hidratante y  
 Piel restaurada volumen  
 Renovado brillo juvenil  
 Reducir la hiperpigmentación  
 Mejorar la piel celular producción  
 Reducir la apariencia de las arrugas  
 Seguro para cualquier tipo de piel



### **-Ultrasonidos**

100 millones a 300 millones de veces por segunda frecuencia ultrasónica, el proceso de transmisión del cuerpo, siendo la piel, dermis, tejido subcutáneo de la absorción, la absorción de ondas ultrasónicas en calor, los efectos térmicos ultrasónicos de la temperatura del tejido biológico aumentaron ligeramente ( $0,5 \sim 1,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ), Para promover la función capilar de los vasos sanguíneos y el flujo de células linfáticas, los nutrientes necesarios para ayudar al transporte de las células a los capilares, promueven el metabolismo. Cerca de la superficie de la piel sin partes de la sangre capilar del tubo, en lugar de un flujo sanguíneo linfático que puede ayudar a cambiar el flujo de linfático tiene aspecto de piel áspera, promover el metabolismo. Y para ayudar al bajo de la linfática, mantener la piel sana. Mantener la elasticidad de la piel/romper la grasa y prevenir la obesidad. 100 millones de veces por segunda vibración ultrasónica transferida a la Organización, la organización producirá junto con vibraciones ultrasónicas por segundo, un millón de veces leve vibración. Ligera vibración para estimular el tejido biológico y el tejido de la piel, aliviar la tensión, mantener la elasticidad de la piel, el calor generado por la vibración más fácil, ayuda a prevenir la obesidad.

### **-CO2 oxígeno**

La máquina facial del chorro de agua y oxígeno utiliza oxígeno bajo la presión extrema y el agua, toma pequeñas gotas de agua, A través del tipo de aerosol para actuar sobre la piel. Puede penetrar componentes de nutrientes a los poros y grietas de la piel desde la epidermis hasta la capa de dermis, A continuación, promover el renacimiento de las células, proporcionar rápidamente y directamente suministro de nutrientes ricos para la piel.

Simultáneamente, puede limpiar la suciedad profunda en epidermis. El oxígeno de la presión extrema y el líquido nutritivo pueden estimular el renacimiento del tejido de fibra en la dermis, hacer que el metabolismo de las células. Para mejorar la piel oscuro, amarillo, chloasma, obtener buen efecto de la eliminación de las arrugas, rejuvenecimiento de la piel y etc.

Puede tratar: acné de la cabeza negra, mancha, eliminación de la bolsa, secado, arruga, Frente, hidratante, áspero, aburrido, suelto, blanqueador de la piel



### **Funciones:**

- 1. rejuvenecer sol dañado piel-Cara cuello hombros brazos y piernas.*
- 2. Reducir los puntos de edad.*
- 3. minimizar la coloración de la piel.*
- 4. Reducir el acné y las cicatrices superficiales del daño pasado.*
- 5. Retire los cabezas negras y cabezas blancas.*
- 6. Reducir la piel grasa, mejorar la salud general de la piel*

# EnoRevive

Skin rejuvenation gel



**EnoRevive**  
Skin rejuvenation gel  
6 x 0.68 fl.oz. 20ml.e

**Capsugen**  
Mild exfoliation capsule  
6 x 0.01 lb 6gr.e

[kongfuli.en.alibaba.com](http://kongfuli.en.alibaba.com)

# EnoBright

Skin lightening get



**EnoBright**  
Skin lightening get  
6 x 0.68 fl.oz. 20ml.e

**Capsugen**  
Mild exfoliation capsule  
6 x 0.01 lb 6gr.e



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After







**Nota: También vendemos el Kit de suero de soluciones faciales de burbujas de oxígeno CO2.**

**For Ultrasound CO2 Oxygen Bubble Beauty Device**



**Ultrasonidos faciales CO2 Oxygen RF máquina de belleza rejuvenecimiento de la piel brillo Tripollar RF estiramiento Facial reducción de poros antiarrugas**

### **Especificación**

Tipo de artículo: máquina de oxígeno Facial CO2

Color: blanco

Material:ABS

Voltaje de la fuente de alimentación: 110-220V 50-60Hz

Potencia: 5-30Hz

Peso: 3645g

Tamaño: 38\*31,5 cm/14,96 \* 12.4in

## **El producto incluye**

### **Máquina de belleza de oxígeno CO2 RF con ultrasonido 3 en 1**

- 1 \* de la máquina principal
- 1 \* Base
- 1 \* ultrasonido la cabeza
- 1 cabeza de oxígeno CO2
- 1 \* Tripolar RF de la cabeza
- 9 \* tornillo
- 1 \* destornillador
- 1 \* cepillo
- 2 \* cinturones
- 2 \* pieza de soporte
- 2 \* pieza cubierta
- 1 \* adaptador
- 1 caja \*

### **Máquina para el cuidado de la piel facial**

Este es un dispositivo de belleza para la piel 3 en 1, el uso de CO2 activa el mecanismo natural del cuerpo. Efecto Boer, por lo que la piel puede liberar el oxígeno en high-CO2 medio ambiente. Mejora el contenido de oxígeno de la piel, estimula el músculo celular y acelerar la función de reparación de la piel. Mejora la textura de la piel desde el interior hasta el exterior.

### **¿Cómo funciona la máquina facial de oxígeno para ajustar la piel por radiofrecuencia?**

#### **1 exfoliar:**

Exfolia la capa superior de la piel para eliminar las células muertas, alisar y renovar la piel y preparar la piel para recibir nutrientes activos.

#### **2 infundir:**

Limpia la piel, preparándola para infusión de ingredientes activos.

#### **3 de oxígeno:**

El efecto de la máquina facial de oxígeno produce burbujas de CO2 que revisan suavemente en la superficie de la piel, creando una respuesta fisiológica, enviando sangre rica en oxígeno a la zona. Esto aumenta el flujo capilar y el intercambio de la piel. La oxigenación resulta en la absorción óptima de los ingredientes activos.

#### **Aplicación**

1. Células revitalizantes, cuidado de la piel con oxígeno de carbono.
2. Rejuvenecimiento de la piel, reparación de la piel opaca.
3. Reafirmante facial, mejora y previene el envejecimiento de la piel, estiliza los poros gruesos y blanquea la piel.

4. Infusión de cosméticos, utiliza tecnología de ultrasonido para infusión de líquido cosmético en las aguas profundas de la piel a través de un sistema de control preciso de la velocidad de infusión del líquido.

5. Favorece la generación de albúmina de colágeno para lifting facial, estiramiento de la piel, etc.

6. Limpieza Profunda Facial, limpieza de microburbujas.

7 hidratante profundo

## 3IN1 CO2 OXYGEN

RF + ULTRASONIC + OXYGENATION



# 3 in 1 + 1 box Nee Bright + 1 box Nee Revive



## Package includes:

- 1\*Main Machine
- 1\*Base
- 1\*Ultrasound Head
- 1\*CO2 Oxygen Head
- 1\*Tripollar RF Head
- 9\*Screw
- 1\*Screwdriver
- 1\*Brush
- 2\*Belts
- 2\*Handpiece Bracket
- 2\*Handpiece Cover
- 1\*Adapter
- 1\*Box



- **Item Type:** Facial CO2 Oxygen Machine

- **Color:** White

- **Material:** ABS

- **Power Supply Voltage:** 110-220V 50-60Hz

- **Power:** 5-30Hz

- **Weight:** 3645g



SKIN  
REJUVENATION



CLEAN



LIFT



OXYGEN





## KIT FOR OXYGEN

NeeRevive-Skin Rejuvenation

NeeBrighe-Skin Whitening

# ENOBRIGHT

## Function

Lightens skin tone, minimizes the appearance of skin pigmentations and uneven skin tone

## Main Ingredients

Non diacid, tronic acid, rose essential oil



# ENOREVIVE

## Function

Revitalizes a dull complexion making the skin smooth and reduces the appearance of fine lines and wrinkles

## Main Ingredients

Hyaluronic acid, protein peptide, retinol



## TWO SPECIALIZED FORMULAS



### ENOBRIGHT

#### Function

Lightens skin tone, minimizes the appearance of skin pigmentations and uneven skin tone

#### Main Ingredients

Non diacid, tronic acid, rose essential oil



### ENOREVIVE

#### Function

Revitalizes a dull complexion making the skin smooth and reduces the appearance of fine lines and wrinkles

#### Main Ingredients

Hyaluronic acid, protein peptide, retinol





① Switch

② Official Information

③ Mode Setting

**Notes:** These 2 buttons are frozen and cannot be adjusted



- ① The Handle Socket
- ② The Rack Hole
- ③ Handset USB Charging Jack
- ④ The Handle Socket
- ⑤ The Handle Socket
- ⑥ Electrical Outlet
- ⑦ On/Off Button





### The third generation of multi - level radio frequency controller


It has a strong lifting effect on the eyes, removes dark circles, stimulates the absorption of collagen etc

### Oxygen bubble handle

Wrinkle removal, rejuvenation, moisturizing and shrinking pores, etc



**Tip:** Need to use specialized products

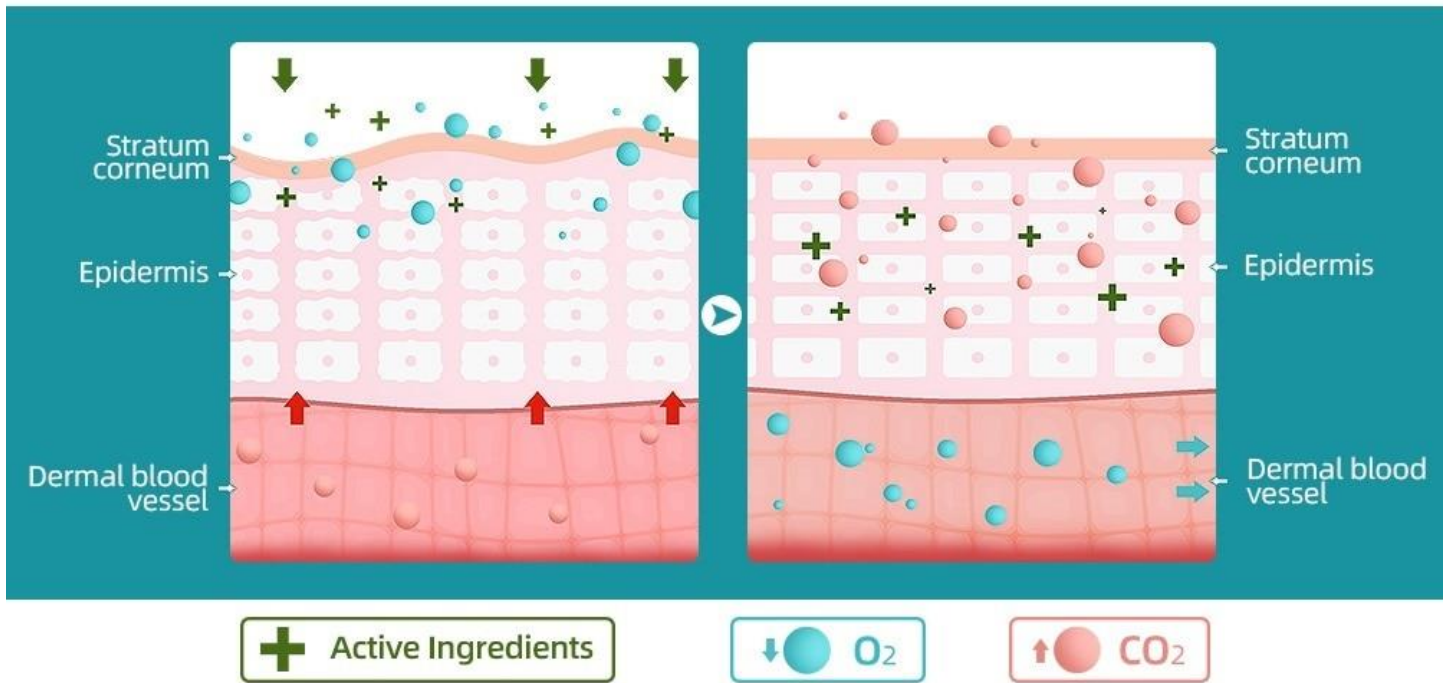



Lighten fine lines



Repair skin



Fill water moisturizing



Balance oil water



Firming skin



Sterilization  
Disinfection



Before



After



Before



After



Before



After



**Before**



**After**







Ultrasound Technology



CO2 Oxygen Technology



Tripollar RF Technology