

Hidrodermoabrasión 11 en 1

Manual de Usuario



Advertencia

Estimados usuarios:

Gracias por elegir el producto de nuestra empresa, para utilizarlos por completo, le sugerimos sinceramente que siga:

- ◆◆ Lea las instrucciones en detalle y guárdelas bien para leer y consultar más.
- ◆◆ Siga las instrucciones para instalar y operar la máquina correctamente.
- ◆◆ No quite ni cambie ningún accesorio de la máquina.
- ◆◆ Prohíbe que otros abran y eliminen el mainframe, excepto las personas autorizadas en la empresa.
- ◆◆ Prohíbe a otros cambiar y mantener la máquina, excepto las personas profesionales.
- ◆◆ Póngase en contacto con nosotros si hay algún problema durante la operación.



Lea atentamente las NOTAS antes de utilizar la máquina.

1. 1. Prueba: encienda la máquina primero antes de conectar toda la pieza de mano para ver si la máquina funciona.
2. 2. Encienda la máquina, luego conecte el rociador
3. 3. Instale la botella de agua pura y la botella de agua de lavado en el lugar correcto de acuerdo con la marca
4. 4. No conecte el pulverizador cuando use hidrodermoabrasión y dermoabrasión de diamante.

I. Condiciones de trabajo

Utilizando a temperaturas y presión normales. No te quedes demasiado frío, demasiado caliente, demasiado seco y demasiado húmedo..

I. Introducción

HYDRA/HYDRO-DERMABRASION

Hydro-Microdermabrasion cambió por completo la forma tradicional, que es la limpieza de la piel de las manos basándose en las habilidades de práctica del individuo, Hydro-Microdermabrasion utiliza el modo de succión al vacío controlado por un proceso inteligente, a través de la combinación de productos y equipos para mejorar la textura de la piel.

Utiliza puntas de hidropeel específicamente diseñadas que exfolian suavemente la piel mediante un movimiento de cepillado de dermis. Las puntas en espiral permiten que los SERUMES DE PIEL duren más en la piel, mientras que los bordes en espiral están diseñados para empujar los sueros más profundamente en la piel, ¡produciendo un efecto hinchado!

El tratamiento de rejuvenecimiento con hidro-microdermabrasión mejora completamente la piel mediante la tecnología de vórtice para limpiar, exfoliar, extraer e hidratar simultáneamente. Combina terapias de spa relajantes y estimulantes con tecnología médica avanzada para lograr resultados instantáneos duraderos. El procedimiento es alisador, hidratante, no irritante e inmediatamente efectivo.

ULTRASONIDO

¿Qué es el masaje ultrasónico? Uso ultrasónico de ondas de ultrasonidos de alta frecuencia (1000000/3000000) para promover la circulación sanguínea humana y acelerar el metabolismo. La aplicación de ultrasonido, con todo tipo de cosméticos en crema, penetra en la piel para fortalecer la organización con efecto de belleza..

RADIO FRECUENCIA

La radiofrecuencia también se llama diatermia (calentamiento profundo), que es el sistema para proporcionar el tratamiento al generar el calor desde el interior del cuerpo humano. Las arrugas y la piel suelta pueden afectar su apariencia. Incluso las personas sanas y activas finalmente muestran signos de envejecimiento en sus rostros. Dado que es la característica visual más importante de su cuerpo, la que la mayoría de las personas lo reconocerá, es importante mantener su rostro fresco y juvenil. Más y más personas han intentado estiramientos faciales a lo largo de los años para combatir las arrugas y las imperfecciones de la piel. Aunque a menudo tienen éxito, los estiramientos faciales tradicionales requieren cirugía menor y períodos de recuperación prolongados. Hay una creciente demanda de técnicas no quirúrgicas para refrescar las apariencias faciales. Ahí es donde entran en juego los estiramientos faciales de radiofrecuencia.

Se presiona un emisor de radiofrecuencia contra la piel. Estas ondas de radio pasan las capas externas de la piel y entregan energía térmica a los músculos y tejidos debajo. los

El calor ayuda a contraer estas capas y construir niveles de colágeno. El resultado general tensa las capas externas de la piel y reduce los efectos de arrugas. Como hay mucho calor involucrado, se debe aplicar algo de enfriamiento a la piel al mismo tiempo.

El estiramiento facial por radiofrecuencia fue un tratamiento no quirúrgico para las arrugas y las imperfecciones de la piel del rostro. Es un procedimiento médico comprobado que no requiere escalpelos ni suturas. También es una opción popular para profesionales ocupados que se preocupan por su aspecto. El tratamiento solo toma alrededor de una hora, y se espera una recuperación completa en unos pocos días. Sin embargo, los resultados tardan un poco en mostrarse completamente. Algunos resultados son visibles de inmediato, mientras que los resultados completos tardan unos meses en desarrollarse a medida que las capas de tejido profundo sanan.

BIO MICRO CORRIENTE

Al generar biocorriente humana simulada, puede pasar a través de la piel hacia las células musculares, estipulando la energía ATP contenida dentro de la célula, permitiendo que la célula recupere el funcionamiento y la función normales. La unidad es una aplicación de la última tecnología con un programa de computadora preestablecido que puede ayudar a mejorar la formación de líneas, afilado facial, doble capa de mentón, arrugas, patas de gallo, bolsas, ojo negro, etc., aumentando la circulación sanguínea facial y la metástasis, reduciendo el tratamiento facial salpicadura y constricción de poros. BIO apretará y refinará la piel de la piel del rostro en un estado sanguíneo, que tiene un efecto de prueba para aflojar la piel y alcanzar el propósito de mejorar la belleza..

Pistola de OXÍGENO HIDRÁULICO

El producto nutricional o cosmético se puede llenar en la botella de acero inoxidable. Con alta presión, la nutrición y el oxígeno se rocían en el área de la piel, lo que mejora enormemente la nutrición para ser absorbida al máximo, la limpieza de la piel y el rejuvenecimiento de la piel.

FOTO LED PDT

¿Cómo funcionan las luces?

La luz LED es el uso de longitudes de onda específicas de luz que emiten energía que se utiliza en muchas aplicaciones, esto se conoce como fotón. Soporte LED para diodos emisores de luz, los diodos emiten energía en forma de luz, potente, brillante, eficiente y se usan para matar las bacterias que causan manchas.

Cómo funciona el LED de piel

La luz azul LED ayuda a matar las bacterias que causan manchas, reduce la inflamación y proporciona un efecto de rejuvenecimiento general en la piel. Las manchas comienzan cuando los poros se obstruyen o bloquean y las bacterias comienzan a crecer, lo que resulta en las manchas de pesadilla de cada adolescente.

Luz azul (415nm)

Las bacterias en el acné contienen porfirinas, la luz azul es capaz de matar las porfirinas debido a la alta afinidad con esta longitud de onda. Además, la luz azul tiene una acción calmante que es muy efectiva para la hipersensibilidad

Luz verde (525-550 nm)

El equilibrio de la luz verde puede equilibrar el pigmento de color, reducir las líneas finas, el envejecimiento de la piel, acelerar el proceso de curación de la herida y aliviar el susto.

Luz roja (630nm)

Estimulará la producción de colágeno, el colágeno es una proteína esencial utilizada para reparar el tejido dañado y reemplazar el tejido viejo, lo mejor para las líneas finas, y también ayudará a reducir los poros grandes.

Luz violeta

Es una luz de doble banda roja y azul, es una combinación de dos tipos de efecto de fototerapia.

Luz amarilla

Agregue energía a las células de la piel, promueva la función de las glándulas, ayude a la digestión, el tratamiento de enfermedades de la piel y mejore la función inmune.

Luz LED (luz blanca)

Penetra profundamente en la piel, acelera el tejido vivo del metabolismo de chen xin, descompone las salpicaduras y mejora la apariencia de líneas finas y flacidez de la piel.

Talla de línea de radar

Ayuda a eliminar las arrugas y mejorar la elasticidad de la piel y a formar colágeno. Produce la energía a 65 °C para entregar a la capa SMAS (aproximadamente 3.0 mm ~ 4.5 mm) en la piel de la cara y contrae la capa muscular de la piel.

Vanadio-Titanio

Solía digerir las arrugas, mejorar la piel flácida, micro puntos y sequedad. Debe usarse con una jeringa de 5 ml..

II. Accesorios

1x máquina principal

1x máscara de luz de siete colores

1x mango de spray de oxígeno

1x mango de reparación de hielo

1x mango de ultrasonido

1x mango de radiofrecuencia RF

1x manija limpiador de burbujas

1x mango de terapia micro eléctrica BIO

1x VANADIO-TITANIO

1x mango de forma de radar 3.0

1x 4.5 mango de forma de radar

1x masajeador de vibración


1x juego de tornillos

Luego aparecerá la siguiente imagen:



Cepillo de burbuja




Presione , entonces vendrá a la siguiente imagen:




Presione  para ajustar la intensidad.

Presione  para ajustar el tiempo de trabajo.

Presione  para iniciar la máquina.


Presione  para detener la máquina.


Presione  para regresar a la pantalla principal.

ULTRASONIDO

Antes del tratamiento, aplique el gel en la cara.

Presione el modo de ultrasonido y configure el parámetro y el tiempo de tratamiento.

Presione , entonces vendrá a la siguiente imagen:

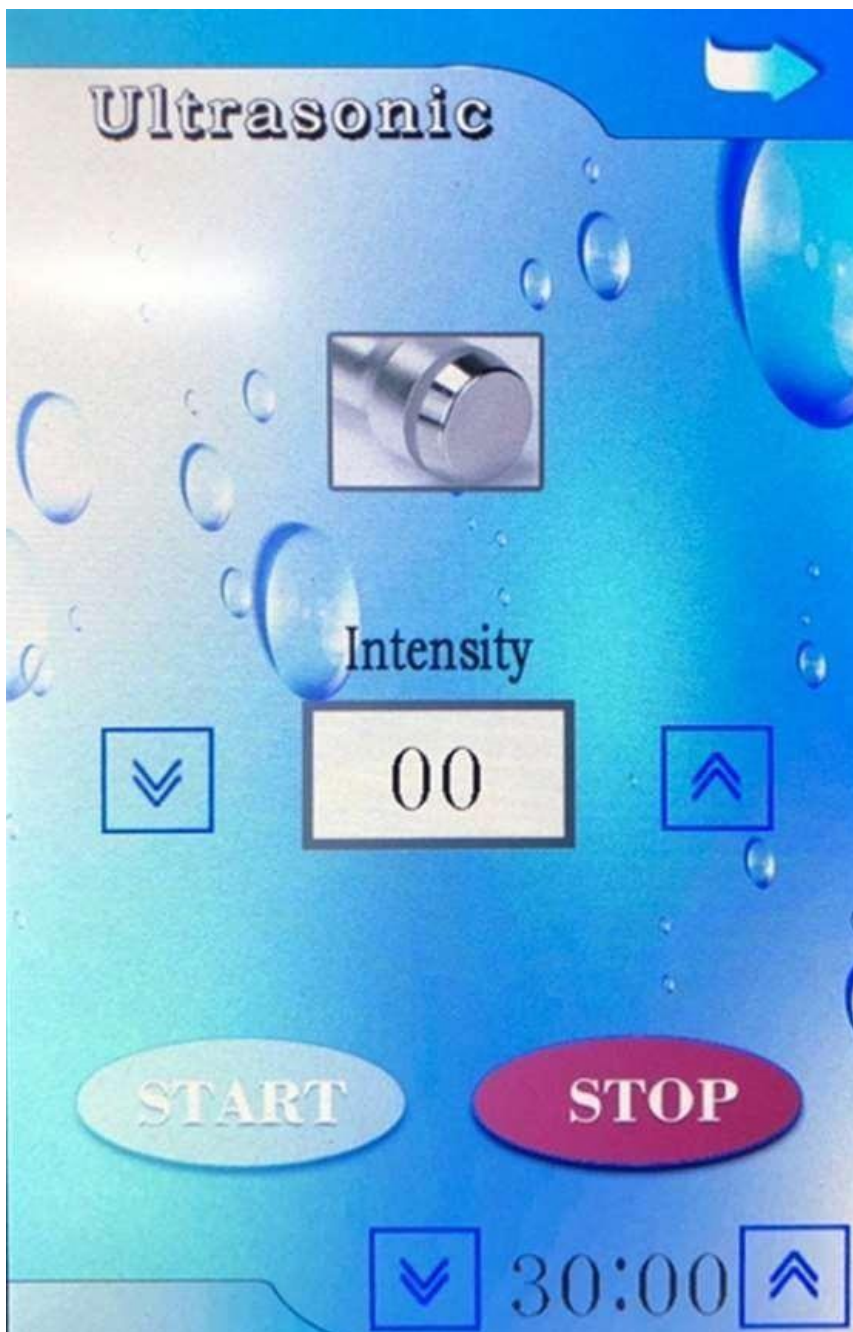


Presione  para ajustar la intensidad.

Presione  para ajustar el tiempo de trabajo.

Presione  para iniciar la máquina.

Presione  para detener la máquina.

Presione  para regresar a la pantalla principal.

Cabezal Frio

Presione , entonces vendrá a la siguiente imagen:

Ice Seal Imports



10



START

STOP



30:00




Presione  para ajustar la intensidad.


Presione  para ajustar el tiempo de trabajo.


Presione  para iniciar la máquina.

Presione  para detener la máquina.

Presione  para regresar a la pantalla principal.

Pistola de Oxígeno

Presione , entonces vendrá a la siguiente imagen:

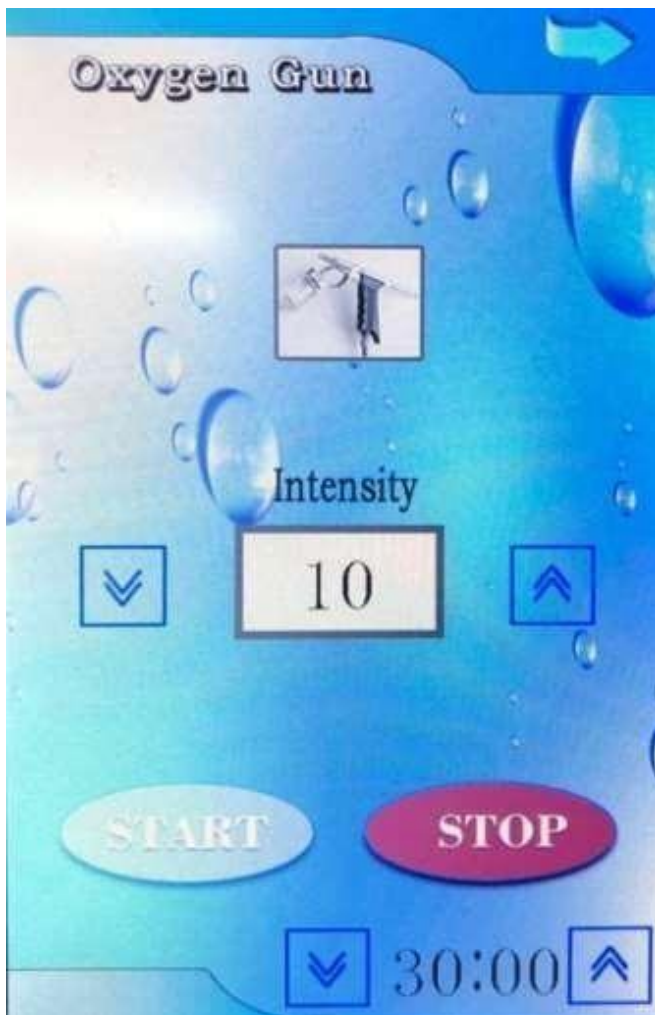


Presione  para ajustar la intensidad.


Presione  para ajustar el tiempo de trabajo.


Presione  para iniciar la máquina.

Presione  para detener la máquina.

Presione  para regresar a la pantalla principal.

Mascara LED

Presionar , entonces vendrá a la siguiente imagen :

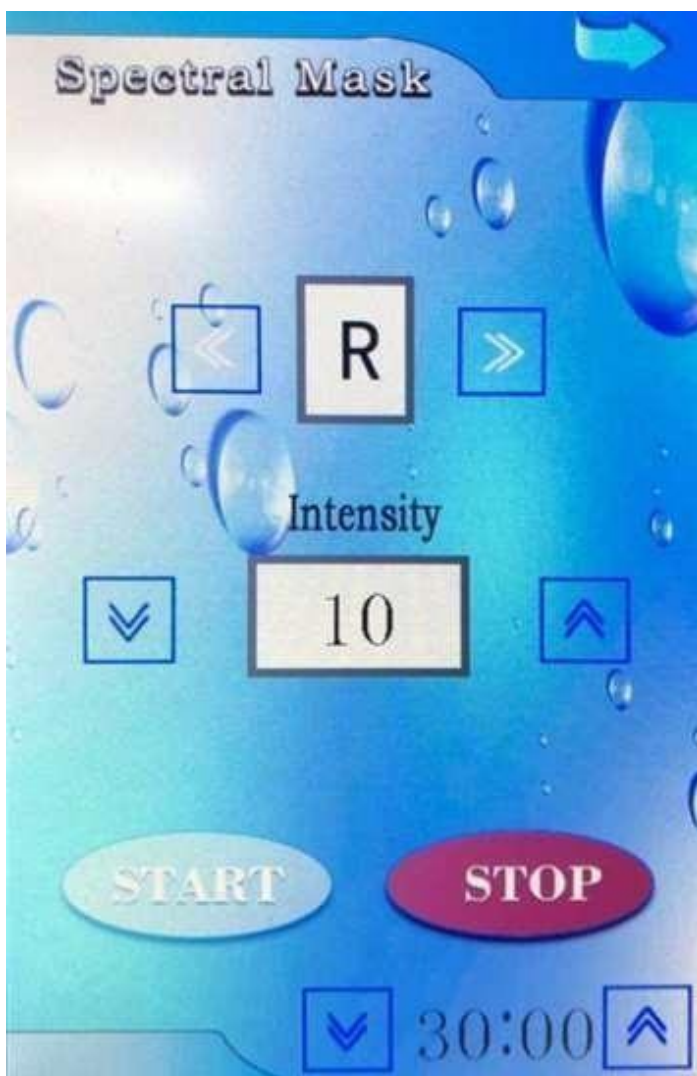



Presione para elegir el color.



Presione para ajustar la intensidad.



Presione para ajustar el tiempo de trabajo.



Presione para iniciar la máquina.



Presione para detener la máquina.




Presione para regresar a la pantalla principal.

Radio Frecuencia



Presionar , entonces vendrá a la siguiente imagen:

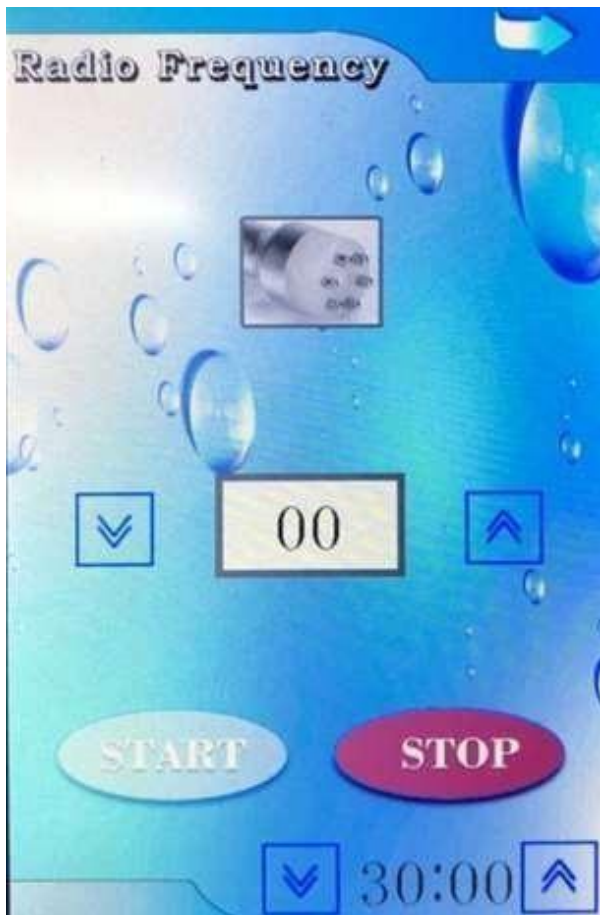


Presione  para ajustar la intensidad.


Presione  para ajustar el tiempo de trabajo.

Presione  para iniciar la máquina.

Presione  para detener la máquina.

Presione  para regresar a la pantalla principal

Micro poder

Presionar , entonces vendrá a la siguiente imagen:




Presione  para ajustar la intensidad.


Presione  para ajustar el tiempo de trabajo.


Presione  para iniciar la máquina.

Presione  para detener la máquina.

Presione  para regresar a la pantalla principal.

Línea de Radar 3.0mm

Presionar , entonces vendrá a la siguiente imagen:

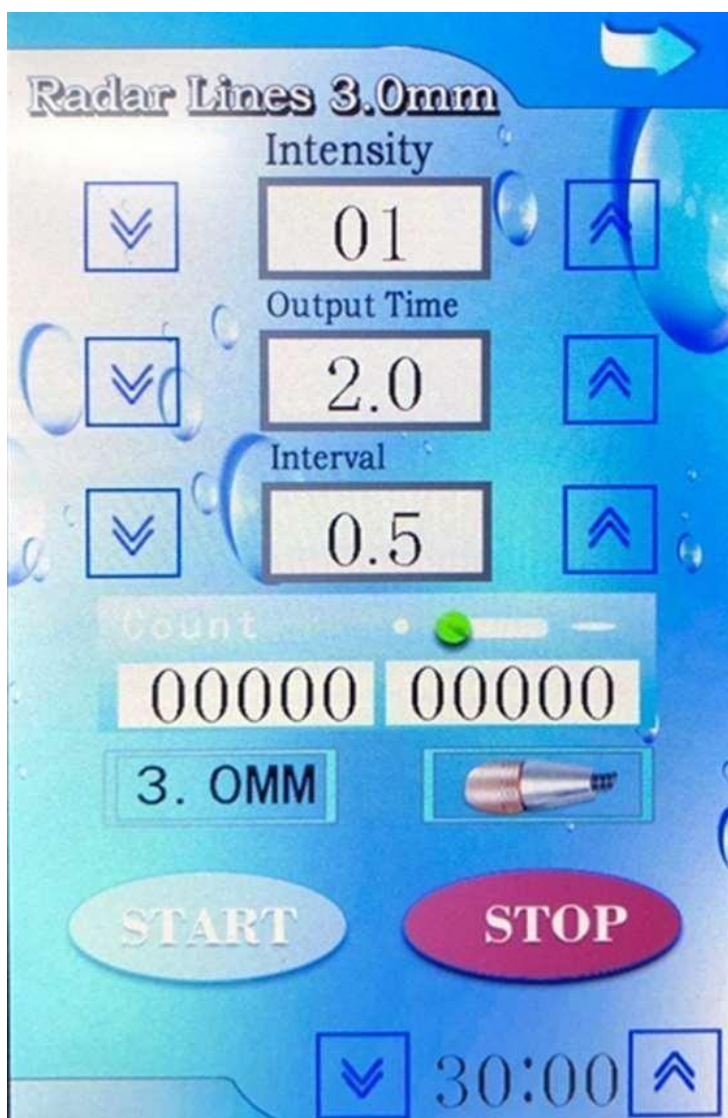


Presione  para ajustar la intensidad.

Presione  para ajustar el tiempo de salida.


Presione  para ajustar el intervalo.

Presione  para iniciar la máquina.

Presione  para detener la máquina.

Presione  para regresar a la pantalla principal.

Línea de Radar 4.5mm

Presionar , entonces vendrá a la siguiente imagen:




Presione  para ajustar la intensidad.

Presione  para ajustar el tiempo de salida.


Presione  para ajustar el intervalo.

Presione  para iniciar la máquina.

Presione  para detener la máquina.

Presione  para regresar a la pantalla principal.


Vanadio Titanio

Presionar  , entonces vendrá a la siguiente imagen:




Presione  para ajustar la velocidad de salida del agua.

Presione  para ajustar la velocidad de entrada del agua.

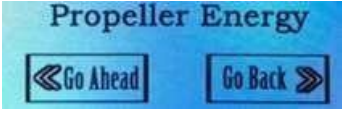Presione  para ajustar la energía de la hélice.

Presione  para iniciar la máquina.

Presione  para detener la máquina.

Presione  para regresar a la pantalla principal.

HYDRA/HYDRO-DERMABRACION

Atención de hidrodermoabrasión:

- no usar en la herida
- vierta el agua en la botella de reciclaje de desechos a tiempo, para evitar daños causados por el desbordamiento.
- diferentes tamaños de cabezales pueden enjuagarse directamente con agua y luego remojarse con 75% de alcohol.

Grupo prohibido de hidrodermoabrasión

- personas que tienen fiebre, infecciones, enfermedades, enfermedades agudas
- personas con enfermedad hemorrágica, trauma, ruptura vascular, inflamación de la piel, enfermedad de la piel

Esteticista sostenga el mango al vacío sobre la piel por un tiempo hasta que el agua fluya hacia el cabezal de trabajo, y luego deje caer un poco de agua sobre la piel por puntos, para humedecer la superficie de la piel y luego aplique el producto de limpieza sobre la piel, y mueva la aspiradora trabajar la cabeza sobre la piel de un lado a otro.

Después de usar

1. Haga una máscara hidratante después del tratamiento.
2. El próximo tratamiento debe ser después de la mitad del mes.