

Cavi Color 10-1 Malva




Contraindicación

1. Mujeres embarazadas o mujeres durante la menstruación.
2. Epiléptico.
3. Pacientes con malignidad.
4. Paciente cuya herida después de la operación no ha cicatrizado hasta.
5. Inflamación aguda o pacientes epidémicos.
6. Aquellos con enfermedades del corazón o con marcapasos cardíaco.
7. Aquellos con enfermedad renal (cálculos biliares).
8. Aquellos con objeto de metal incrustado o gel de sílice.
9. Aquellas en menstruación, bajo control de la natalidad, con período de incontinencia de emisión, o sometidas a operación de barriga.
10. Aquellos con hipersensibilidad genética.

AVISO

1. Asegúrese de usar el gel ultrasónico especial.
2. Manipular los cabezales con cuidado, evitar golpes.
3. Utilice y prepare suficiente gel para evitar el sobrecalentamiento de las cabezas.
4. No se demore demasiado en una sola región y evite los huesos.
5. No use desinfectantes para desinfectar las cabezas, use algodón húmedo o una toalla seca.
6. Asegúrese en cambio de que la fuente de alimentación esté conectada y enchufada correctamente.
7. Si no va a utilizar la máquina durante un largo período de tiempo, apáguela y desenchúfela. poder suministro.
8. Los operadores y los pacientes no deben llevar joyas ni artículos metálicos.
9. La máquina debe descansar cada hora de funcionamiento continuo durante unos 10 minutos.
10. Durante la operación, asegúrese de no aceptar otros tratamientos.

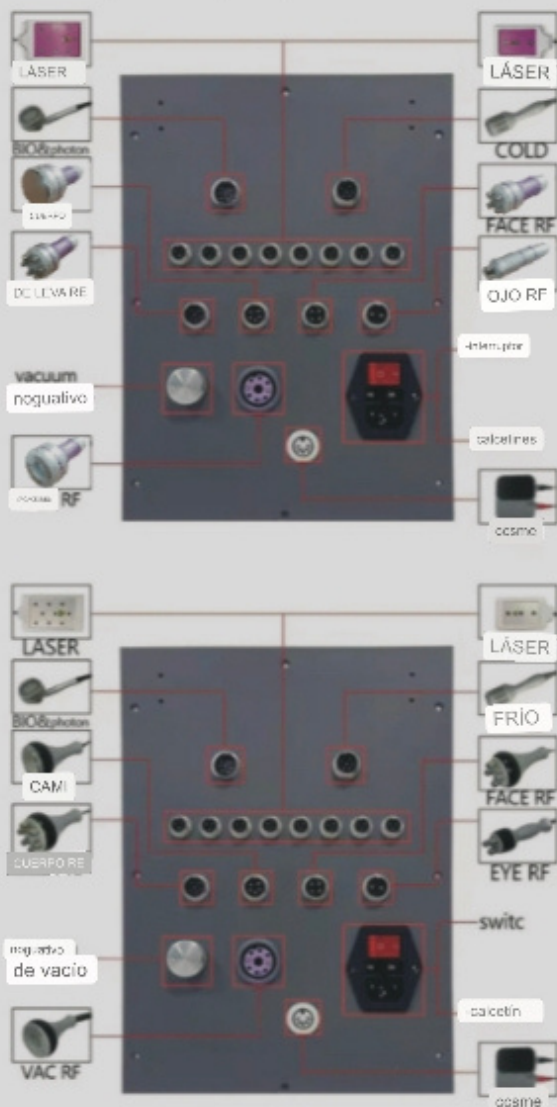

Paquete que incluye:

- Mango RF ocular * 1
- Mango RF facial * 1
- Mango RF del cuerpo * 1
- Mango CAVI * 1
- Manija de RF de VCA * 1
- Mango frío * 1
- BIO y mango de fotones * 1
- Mango ccsme * 1
- Lipólisis láser * 8
- Cable de alimentación * 1
- Cinturón *
- 2 Soporte * 3

Mango Ultrasónico 40Khz (Cavitación)

Cabeza gorda de explosión de onda de sonido fuerte: con la cabeza de onda de sonido fuerte colectiva, se puede emitir una onda de sonido fuerte de 40 KHZ al cuerpo humano para impactar ferozmente las células de grasa y causar un movimiento de fricción entre las células de grasa. Esto puede causar un consumo efectivo de calorías y humedad en las células grasas y reducir el tamaño de las células grasas. Además, la vibración de las ondas de sonido puede causar un impacto feroz

de células grasas para hacerlas explotar instantáneamente, reducir la cantidad de células grasas y así lograr los efectos de eliminar grasa.

Hay 4 modos de M1, M2, M3 y M4 como se describe a continuación:

"M1" es de trabajo continuo durante 3 segundos y discontinuo durante 3 segundos.

"M2" es de trabajo continuo durante 2 segundos y discontinuo durante 2 segundos.

"M3" es de trabajo continuo durante 1 segundo y discontinuo durante 1 segundo. "M4"

es de trabajo continuo durante 0,5 segundos y discontinuo durante 0,5 segundos. Opere

con el cabezal de cavitación de 40 KHZ durante 15-20 minutos principalmente con el movimiento en espiral en el cuerpo



Pulse "-" "+" para ajustar la duración de la operación.

Toque para ajustar el modo de cavitación entre los modos M1, M2, M3, M4.

Haga clic en "-" para disminuir la fuerza o haga clic en "+" para aumentarla. Presione

"INICIO" para iniciar la cabeza gorda de explosión de onda de sonido fuerte.

Método: Use la sonda para masajear circularmente la parte específica de la piel a tratar después aplicando la crema reductora durante unos 15 a 20 minutos. Podría acelerar la sangre circulación en la parte tratada de la piel y tiene el efecto de descomponer la grasa.

Asuntos que requieren atención:

1. Aplicar crema reductora o gel refrescante en la parte de la piel a tratar antes del tratamiento. 2. Mantenga un estrecho contacto entre la sonda y la piel.
3. Ajuste la intensidad de nivel bajo a nivel alto.
4. No mantenga el aplicador en el mismo lugar.
5. Mueva el aplicador lentamente, pero constantemente.
6. Evite el tratamiento sobre el hueso y no apunte directamente a la articulación.
7. Preste atención a la temperatura del mango de cavitación cuando lo use y deje de usarlo. durante diez minutos después de media hora de uso.
8. La cavitación está prohibida para trabajar sin gel. Si no funciona y necesita volver a ajustar la frecuencia, póngase en contacto con el proveedor.

Mango RF bipolar de vacío

Disuelve la grasa, mejora el drenaje linfático, reafirma la piel y mejora la elasticidad de la piel. Tiene un efecto de atracción anti-gravitatoria sobre la piel. Eso atrae y extiende el tejido conectivo fibrilar de diferentes cortezas a través del masaje rítmico y descompone efectivamente la grasa subcutánea y reduce la acumulación de grasa en el tejido celular. Junto con el uso de la metodología patentada de masajear profundamente con un rodillo sobre diferentes partes del cuerpo para levantar la capa de grasa en la dermis curio y subcutánea. Libera vasos linfáticos microvasculares al mismo tiempo que promueve el metabolismo y convierte las células grasas en un movimiento pasivo en ácidos grasos. Las toxinas dentro de las células también se eliminan del sistema linfático. In vitro, la desintoxicación mejora la función hasta cuatro veces. La piel se volverá más elástica y brillante. El perfecto experto en "gestión de la escultura corporal saludable".



Ajuste de succión

Ajuste de relajación

Presione "VAC RF" en la pantalla para seleccionar la salida RF bipolar de vacío.

Configure el modo RF: Toque para ajustar el modo RF entre los modos Auto, M1, M2, M3. Salida de modo automático siempre, salida M1 durante 0,5 segundos, salida M2 durante 1 segundo, salida M3 durante 1,5 segundos, seleccione la intensidad adecuada (ajuste de acuerdo con el nivel aceptable del cliente. Se recomienda 20%-60%) y presione la tecla "INICIO" para comenzar la operación. Ajuste la succión

de vacío adecuada (Ajuste la perilla en la parte posterior) Método: Después de aplicar aceite en el área de la piel a tratar, realice un masaje circulatorio. en áreas específicas de la piel durante aproximadamente 30 a 40 minutos, lo que puede acelerar la sangre circulación, tiene la función de descomponer la grasa.

Nota:

1. Aplicar suficiente cantidad de aceite.
2. Mantenga un estrecho contacto entre la sonda y la piel.
3. Ajuste la intensidad de nivel bajo a nivel alto.
4. No mantenga el aplicador en el mismo lugar.
5. Mueva el aplicador lentamente, pero constantemente.
6. Evite el tratamiento sobre el hueso y no apunte directamente a la articulación.
7. Realice siempre un pliegue cutáneo para acceder mejor al tejido graso.
8. En caso de descansar durante el tratamiento, "PAUSE" y luego "STOP" para evitar el exceso de rendimiento de la máquina.
9. Limpie el aceite del interior con alcohol/toalla de papel después de usarlo y luego colóquelo en el estante.

Manija de RF del cuerpo del sextupolo (cuerpo de RF)

Al estar integrado con la tecnología RF avanzada, el instrumento puede alcanzar directamente la capa de grasa profunda con la capacidad de posicionamiento incisivo de RF. En el estado de acción rápida. El tejido de las células grasas puede generar calor por fricción, aumentar la temperatura local y eliminar el exceso de grasa y toxinas del cuerpo a través de las glándulas sudoríparas, la circulación enterohepática y la linfa. En última instancia, lograr el efecto de disolver la grasa. Con tecnología de profundidad controlada. Los efectos son muy obvios: mejoran la circulación sanguínea, aceleran la descomposición de la grasa, eliminan los desechos, mejoran el efecto de eliminar la celulitis, mejoran efectivamente el estado del tejido areolar, eliminan la grasa rebelde.



Presione "BODY RF" en la pantalla para seleccionar la salida de RF del cuerpo.

Configure el modo de RF: Toque para ajustar el modo de RF entre los modos Auto, M1, M2, M3, modo automático siempre con salida, salida M1 durante 0,5 segundos, salida M2 durante 1 segundo, salida M3 para un segundos, Extienda el gel en el área tratada de manera uniforme. seleccionar la intensidad adecuada (ajustar según las necesidades del cliente) nivel aceptable de 1.5, se recomienda 20% -60%) y presione la tecla "INICIO" para comenzar la operación (arrastre las áreas de grasa en la posición para perder peso a la posición donde está más cerca de la linfa glándula) durante unos 20 minutos.

Notas:

1. Extienda el gel en el área tratada de manera uniforme.
2. Comience con poca energía. Sugerimos probar la energía adecuada Nivel para usar en la espalda de los clientes antes de usar en las áreas a tratar.
3. No use aceite esencial como medio.
4. En funcionamiento, comience a tirar solo después de que el cabezal de presión negativa esté adherido a la piel.
5. Mueva el aplicador lentamente, pero constantemente.
6. En caso de descansar durante el tratamiento, "PAUSE" y luego "STOP" para evitar exceso de rendimiento de la máquina

Mango Radio Frecuencia para Rostro

Un electrodo de acoplamiento capacitivo se utiliza para transmitir energía de ondas de radio y generar un campo eléctrico para entrar en el tejido subcutáneo a través de la superficie de la piel. En la alta frecuencia al cambio rápido en el electrodo, también se cambian las direcciones de las partículas eléctricas en la

piel. En ese momento, la resistencia eléctrica natural en el tejido subcutáneo se mueve y genera energía térmica. Como el colágeno de la dermis papilar puede encogerse inmediatamente cuando la temperatura está dentro del rango de 60 a 70 grados centígrados. Después del tratamiento antiarrugas, el cliente puede sentir inmediatamente los efectos de estiramiento de la piel a medida que se levanta y reafirma. Cuando el colágeno se produce continuamente, el grosor y la densidad de la dermis papilar de la piel pueden aumentar para eliminar arrugas, eliminar cicatrices, restaurar la elasticidad y el brillo de la piel y hacerla rubia

y suave. Mientras se aumenta el colágeno, se genera una piel fresca en la posición de tratamiento y las arrugas se eliminan en gran cantidad. Además, cuando la corteza sin elasticidad o con

Se separa la capa córnea gruesa en el área con arrugas, la piel circundante también se renovará.



Presione "FACE RF" en la pantalla para seleccionar la salida RF de la cara.

Configure el modo RF: Toque para ajustar el modo RF entre los modos Auto, M1, M2, M3. Salida de modo automático siempre, salida M1 durante 0,5 segundos, salida M2 durante 1 segundo, salida M3 durante 1,5 segundos, seleccione la intensidad adecuada (ajuste de acuerdo con el nivel aceptable del cliente, se recomienda 20%-60%) y presione la tecla "INICIO" para comenzar la operación. opere con el cabezal de radiofrecuencia facial durante 15 a 20 minutos principalmente con un movimiento en espiral en la cara y alrededor de los ojos.

Nota:

1. Extienda el gel o la esencia en el área tratada de manera uniforme.
2. Mantenga un estrecho contacto entre la sonda y la piel.
3. Ajuste la intensidad de nivel bajo a nivel alto.
4. No mantenga el aplicador en el mismo lugar.
5. Mueva el aplicador lentamente, pero constantemente.
6. La piel alrededor de los ojos y la frente es muy sensible, la intensidad de salida de RF debe mantenerse relativamente bajo en tales áreas.
7. En caso de descansar durante el tratamiento, "PAUSE" y luego "STOP" para evitar exceso de rendimiento de la máquina.

Mango de ojo tripolar (RF tripolar)

La radiofrecuencia es un tipo de onda electromagnética de alta frecuencia, puede penetrar la dermis y el tejido subcutáneo para calentar el colágeno en la capa de la dermis, el colágeno en la capa de la dermis se encogerá inmediatamente después del aumento de la temperatura y la proliferación de colágeno nuevo, para lograr la piel. rejuvenecimiento y tensado, mejora del pigmento, etc. Elimina gradualmente las arrugas, restaurando la elasticidad de la piel y la mejora facial. Comió las arrugas y previno el envejecimiento de la piel, restaurando la elasticidad de la piel.



Presione "Eye RF handle" en la pantalla para seleccionar la salida de RF, configure el modo de RF: toque para ajustar el modo de RF entre los modos Auto, M1, M2, M3, modo automático siempre con salida, salida M1 durante 0,5 segundos, salida M2 durante 1 segundo, salida M3 durante 1,5 segundos, esparcir gel o esencia en el área tratada de manera uniforme. seleccione la intensidad adecuada (ajuste de acuerdo con el nivel aceptable del cliente, se recomienda 20%-60%) y presione la tecla "INICIO" para comenzar la operación.

Nota:

1. Extienda el gel o la esencia en el área tratada de manera uniforme.
2. Mantenga un estrecho contacto entre la sonda y la piel.
3. Ajuste la intensidad de nivel bajo a nivel alto.
4. No mantenga el aplicador en el mismo lugar.
5. Mueva el aplicador lentamente, pero constantemente.
6. La piel alrededor de los ojos y la frente es muy sensible, la intensidad de salida de RF debe mantenerse relativamente bajo en tales áreas.
7. En caso de descansar durante el tratamiento, "PAUSE" y luego "STOP" para evitar sobrecargue la máquina.

Lipólisis Láser

Diode Lipo Laser emite bajos niveles de energía láser que crea una señal química en la célula de grasa,

Descomponer los triglicéridos almacenados en ácidos grasos libres y glicerol y liberarlos a través de canales en las membranas celulares. Los ácidos grasos y el glicerol luego se transportan por todo el cuerpo hacia las partes que los usarán durante el metabolismo para producir energía. Este proceso de liberación de ácidos grasos es una respuesta natural del cuerpo cuando el cuerpo necesita usar las reservas de energía almacenadas, por lo que no creará ninguna reacción antinatural en el cuerpo ni causará ningún daño a las estructuras circundantes, como la piel, vasos sanguíneos y nervios periféricos. Un período de ejercicio posterior al tratamiento garantizará el metabolismo completo y, por lo tanto, eliminará del cuerpo los ácidos grasos liberados. Este sistema de lipóláser de 5 mw puede adoptar la luz para penetrar en un nivel profundo de la piel para estimular el metabolismo para un tratamiento adelgazante efectivo. Banda de tablero láser atada en el sitio que necesita tratamiento y uso de láser durante 20 minutos.



Presione "Láser" en la pantalla para seleccionar la salida de lipólisis láser.

Presione "-" para ajustar la duración de la operación

Toque para ajustar el modo láser entre los modos M1, M2, M3, M4.

Hacer clic para disminuir la fuerza o hacer clic en "+" para aumentarla.

Pulse "START" para iniciar la lipólisis láser. M1, M2,

M3 y M4, que se describen a continuación: "M1" funciona de

forma continua, "M2" funciona de forma continua durante 0,5 segundos y se detiene durante 0,5

segundos. "M3" funciona continuamente durante 0,2 segundos y se detiene durante 0,2 segundos. "M4"

funciona de forma continua durante 0,1 segundos y se detiene durante 0,1 segundos.

Método: Ate la banda de la placa láser en el sitio que necesita tratamiento y use el láser durante 20 minutos. Podría acelerar la circulación sanguínea en la parte tratada de la piel y tiene el efecto de descomponer la grasa.

Asuntos que requieren atención:

1. No irradie el globo ocular directamente con luz de color.

Tratamiento frío

1. Ayuda a la firmeza de la piel, mantiene la elasticidad, previene alergias y otros problemas;

2. Reduce los poros, bloquea el agua y reduce las arrugas;

Presione el "mango FRÍO" en la pantalla para seleccionar la salida FRÍO, de acuerdo con el nivel aceptable del cliente), luego presione "iniciar" o presione el interruptor en el cabezal de tratamiento, la luz indicadora se encenderá y comenzará a funcionar



Estimulador muscular EMS

Es una tecnología de tratamiento adelgazante no invasivo que puede quemar grasa mientras hace ejercicio. Al igual que completar 20,000 abdominales o sentadillas en solo 30 minutos, cada 2 a 3 semanas, durante 4 a 6 tratamientos, la grasa promedio disminuye y la masa muscular aumenta. El área de tratamiento incluye el abdomen, las nalgas, los brazos y los muslos. Método de tratamiento seguro y cómodo: Conecte el parche de electrodo (independientemente de si es positivo o negativo), ate el parche de electroterapia al área de tratamiento con una banda para ajustar la energía de salida y el modo. Hay 4 modos, M1, M2, M3 y M4, que se describen a continuación: "M1" funciona de forma continua, "M2" funciona de forma continua durante 2 segundos y hace una pausa de 2 segundos. "M3" funciona continuamente durante 1 segundo y se detiene durante 1 segundo. "M4" funciona continuamente para 0,5 segundos y pausas de 0,5 segundos.



El cableado no se divide en dos niveles, más o menos. Debe insertarse hasta el final, de lo contrario, la conexión será deficiente.

Asuntos que requieren atención

1. Las personas que tienen una enfermedad cardíaca y se han sometido a una cirugía cardíaca tienen prohibido mediante electroterapia EMS.
2. Está prohibido colocar parches de electroterapia alrededor del corazón.
3. Cuando la piel está muy seca y la conductividad es baja, puedes aplicar un poco de agua sobre la piel. No exceda los 30 minutos cada vez.
4. Si siente alguna sensación incómoda después de usar el producto, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con su minorista/distribuidor local.

BIO Microcurrent & LED photon Treatment

Application : forehead, eyes' around, cheek, mouth, double chin, neck, body
Microcurrent-safe and painless facial helps erase fine lines and wrinkles, while firming your skin and defining your features



Method : Use the probe to massage the specific part of skin to be treated circularly after applying the essence
adjust the output energy and mode

There are 4 modes, M1, M2, M3, and M4, which are described as follows:

"M1" works continuously, "M2" works continuously for 2 seconds, and pauses for 2 seconds. "M3" works continuously for 1 second and pauses for 1 second. "M4" works continuously for 0.5 seconds and pauses for 0.5 seconds.

The handle can adjust 7 photon modes. First, turn on the switch on the machine screen to ensure that the power is greater than 0, Press "-" "+" to adjust the LED color.


- 1.Red: Vitalize be suitable for any skin, promote blood circulation, and regenerate collagen protein in order to smooth skin and heal xerodermia, exuviation, degenerate losing hair and folliculosis.
- 2.Green:Balance Normalize sebaceous glands, Reduce black heads and sores, balance moisture.
- 3.Blue: Calm be suitable for sensitive, oil, and comedo skin-diminish and eliminate acne bacillus to remove acne, whelk, promote to compound protein with ossein, activate skin, tighten slack skin and gravity wrinkle.
- 4.Purple: Drain Renew skin, reduce wrinkles.
- 5.Orange: Brighten whiten decompose pigment, and smooth scares.
- 6.Cyan: Defense strengthen the ability to protect skin, calm down, release stress.
- 7.White: Guide guide skin to absorb nutrients and anti-aging.
- 8.Loop.

Guía de usuario

1. Dibujo esquemático de operación de la cabeza de trabajo de explosión de cavitación de 40K Masajee la grasa del muslo en círculos



2. Dibujo esquemático de operación de la cabeza del láser sextupolo RF para el cuerpo Cuidado de cintura y abdomen (25 minutos, 2-3 días/hora)

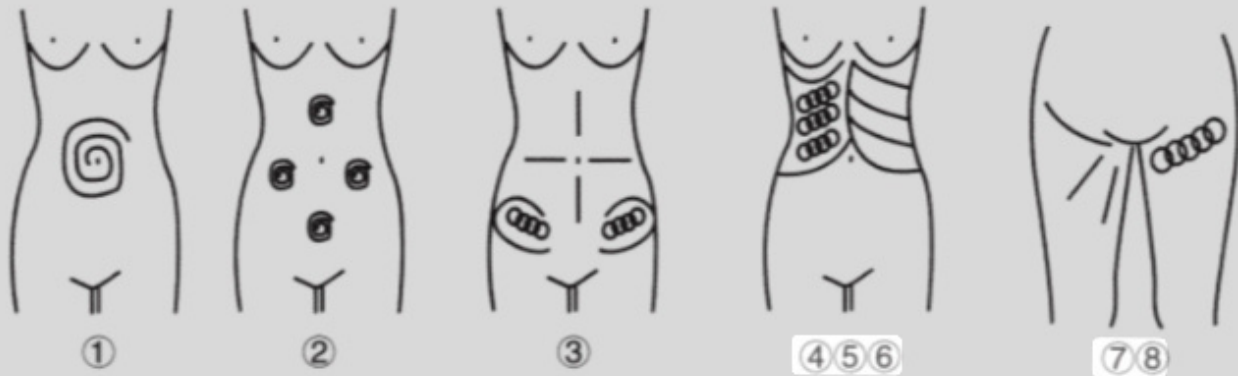

1. Masajee hasta el ombligo como centro y expanda gradualmente el rango.

2. Masajee el nido del pecho, ambos lados del abdomen anterior y debajo del ombligo (en forma de diamante) desde adentro hacia afuera en círculos.

3. Concentrado en la grasa de 4 direcciones el ombligo como centro.

4. Masajee desde la costilla interior hasta el borde exterior en círculos.

5. Masajee desde el final de la pelvis hasta la ingle en círculos.

6. Masajee de un lado a otro desde la costilla interior hasta el borde exterior en línea recta.

7. Levante la cadera y la parte inferior del cuidado del cuerpo (30 minutos, 2-3 días/tiempo).

8. Concentrado desde la cadera hasta la ingle en círculos o en línea recta. Repita el masaje desde el borde interior hacia el exterior. Reciclar el movimiento.

3. Dibujo esquemático de funcionamiento del cabezal de trabajo FACE RF para cara.

1. Masajee el centro de la mandíbula en círculos para producir calor profundo.

2. Masajee la mandíbula inferior en líneas.

3. Masajee la zona triangular de ambos lados de la cara en círculos.

4. Masaje desde la mandíbula hasta el ángulo de la boca hasta la oreja en líneas.

