

MANUAL DE USUARIO

CAVI PURPLE DIGITAL



Mesa de Contenido

Prefaci	
o	
Parte 1	
Introducción	
1. Ventajas	
2. Trabajando Principios	
3. Piel Reafirmante y Antienvjecimiento	
4. Ojo Antienvjecimiento	
5. Cuello Cuidado	
6. Cuerpo administración	
(1). Conformación de cintura y abdomen	
(2). Brazo Formación	
(3). atrás Formación	
(4). Conformación de la cadera	
(5). Modelado de piernas	
Parte 2	
2. Especificaciones tecnicas	
3. que si! y que no!	
4. Solución de problemas y soluciones	
5. preguntas frecuentes	
6. Pasos de tratamiento simplificados	
7. Lista de empaque	
8. Diagramas Operacionales	

Parte 1

Introducción

La RF multipolar, el vacío, la cavitación ultrasónica, el fotón y la microcorriente y el calor y el frío son ampliamente usados en la industria de la belleza. Belleza máquinas basadas sobre esos enfoques están populares entre las personas. Y esta máquina MS-76D1MAX, que agrupa a ellos juntos como uno, puede efectivamente ayudar a las personas a reafirmar la piel, moldear el cuerpo y combatir el envejecimiento. Por lo tanto, esta máquina es un eficaz reemplazo de todos los tratamientos faciales y corporales en los salones de belleza. Es más, eso es conveniente y fácil de operar. Resuelve los problemas de manejo de la piel y el cuerpo para la belleza. Este equipo no requiere inyección, medicación ni operación, para lo cual ha sin efectos secundarios. Se utiliza externamente durante todo el proceso y tiene un efecto inmediato. La RF calienta las capas más profundas de la piel, estimula el colágeno a regenerarse y reorganizar en la dermis, y promueve la circulación sanguínea en la parte inferior de la piel, lo que puede lograr los resultados de reafirmación de la piel y anti-envejecimiento. Los ultrasonidos con frecuencias específicas apuntan a aquellas partes en las que hay que traer clientes. Impresionantes resultados.

1. Ventajas

1. 8 en 1 belleza máquina que trabaja en facial y cuerpo cuidado.
2. La onda ultrasónica puede quemar y eliminar grasa poderosamente, lo que supera a la liposucción para resolver los problemas de las personas obesas.
3. La radiofrecuencia calienta las capas más profundas de la piel, estimula el colágeno para que se regenere y se reorganice en la dermis y promueve la circulación sanguínea en la parte inferior de la piel, lo que puede lograr los resultados de reafirmación de la piel y anti-envejecimiento.
4. Varias piezas de mano pueden ser utilizadas en diferentes partes de acuerdo a diferentes necesidades.
5. La combinación perfecta de ultrasonido y radiofrecuencia resuelve los principales problemas de pérdida de peso. Ayuda con la pérdida de peso y al mismo tiempo reafirma la piel, aumenta la elasticidad de la piel, promueve el metabolismo, y por último fortalece las constituciones de las personas.
6. Eso adopta la avanzada tecnología de onda ultrasónica para la quema de grasa.
7. Eso es indoloro y el proceso de tratamiento no invasivo. Una vez el tratamiento ha terminado, el cliente puede ir a casa y ahí es el período de recuperación, lo cual no afecta la vida y el trabajo.
8. No consumo, bajo costo y rápidas devoluciones.
9. Más amplio rango de tratamiento para el cuerpo y rostro.
10. Desnivel, sangrado, y hinchazón voluntaria no aparecen después del tratamiento.

2. Trabajando Principios

(3 polos, 4 polos, 6 polos)RF

Para esos mangos, no importa si es un mango unipolar, bipolar o multipolar, habrá un efecto RF. Después un circuito eléctrico es formado entre dos electrodos. Para el unipolar y 2 polos mango, solo se forma un circuito eléctrico, pero hay tres y cuatro circuitos eléctricos respectivamente por los 3 polos y 4 polos manejados. Cuando los electrodos tocan la piel humana del cuerpo, las salidas de RF del mango multipolar tenderán a ser las mismas a pesar del hecho de que la piel es no absolutamente incluso y allí están

resultante contacto diferencias, cuales voluntad prevenir la Ocurrencia de sensación irritante como posible como lo lata.

La onda RF puede penetrar directamente en la piel y utiliza la resistencia formada por la piel para producir energía, que eleva la temperatura de la capa inferior de la piel. Usando el principio de dermis colágeno proteína apretando y estimulante colágeno proteína regeneración, eso posee dos

terapéutico efectos: oportuno piel reafirmante y perdurable colágeno proteína regeneración.

La onda ultrasónica se usa para hacer que las células adiposas humanas reciban un fuerte impacto y produzcan fricción. movimiento después de que fuertes ondas de sonido ingresen al cuerpo humano, que puede consumir efectivamente calor y agua de las células y reducir las células adiposas. Además, cuando la onda sonora vibra, eso puede producir un fuerte impacto en las células. Y entonces el las células adiposas se estalló al instante, y ellos voluntad ser reducido asi que como a lograr la efecto de gordo eliminación.

Ultrasónico Cavitación: decenas de miles de diminuto burbujas, a saber cavitación burbujas, están producido por la vibración del líquido. Estas burbujas crecen en la región de presión negativa formada por la transmisión longitudinal de ultrasonido, que se cerrará rápidamente en la presión positiva región a ser comprimida y estirada bajo presiones positivas y negativas alternas. Cuándo la burbujas explosión, allí voluntad ser enorme instantáneo presión de hasta a decenas de MPa a cientosde MPa, y fuerte vibración y ruido voluntad ser producido.

Ventajas: Solo apunta al tejido adiposo de baja densidad para su frecuencia específica, y protege alta densidad pañuelo de papel semejante como vascular y nervio pañuelo de papel.

Aspiradora RF

Masajear la piel y los músculos con un mango especial de succión al vacío puede mejorar efectivamente la fluidez humoral de las células humanas y aumentar el movimiento de las células para mejorar la elasticidad de la piel. Mientras tanto, puede acelerar la circulación sanguínea de los microvasos, expulsar las toxinas del cuerpo. a través de la normal circulación de la linfático sistema, y reducir la probabilidad de aparición de condiciones adversas tales como manchas, pigmentación y congestión en varias partes de la cuerpo. Él amasadura sensación generado por Aspirar succión puede incrementar la pañuelo de papel actividad de la piel y el músculo, y por lo tanto ayuda a reducir el tejido duro y aumentar la elasticidad de la piel tejido, de modo que tanto el adelgazamiento como la conformación del cuerpo se puedan realizar al mismo tiempo. además, el movimienot de Aspirar taza puede además estimular simpático nervioso sistema a más bajo piel sensibilidad. El proceso de succión y liberación de la presión del aire no solo puede mejorar el sistema capilar pero también promueve el flujo entre las venas más profundas y la red de glándulas linfoides para fortalecer vasos sanguíneos y aliviar la condición de varicoso venas ventajas: es superior a el vacío anterior trabajando modo que es único y simple. Usar diferentes modos para diferentes partes puede ser más eficiente y efectivo para adelgazar y moldeando el cuerpo, y nunca lo hará daño cuerpo humano. Diseño único Las puntas de RF se integran RF y Aspirar como a todo, en cuales RF y Aspirar puede existir independientemente y además están complementarios entre sí. Comparado con el RF unipolar ordinario, idealmente puede dar forma al cuerpo en un más eficaz, más rápido y incluso más manera.

Aspiradora Físico Efectos

1. Piel capa

Él succión y liberación de aire presión:

(1) Eso puede mejorar la fluidez de células, por lo tanto creciente la movimienot de células, y puede tratarenfermedades relacionadas a estasis de sangre y sangre estancamiento.

(2) Puede drenar el exceso de agua de los ganglios linfáticos y las venas. Efectos: redundante agua es descargado de pañuelo de papel fibras

2. Vascular capa

Él succión y liberación de aire presión:

(1) Mejorar la sangre circulación de microvasos por la capilar sistema, y además promover la flujo entre la Más adentro venas y linfático redes

(2) Eliminar dañino sustancia en la cuerpo.

Efectos: Fortalecer sangre vasos, eliminar toxinas y aliviar él condición de varicoso venas

3. Fibroso capa

Él succión y liberación de aire presión:

Eso puede entregar dos tipos de efectos en diferente tejidos (incluido piel, músculo y asi que en).

(1) Reparar células y incrementar su actividad.

(2) Restaurar y mejorar piel elasticidad.

(3) Estimular la producción de hueso colágeno y mejorar la piel gordura.

(4) Mejora la absorción de oxígeno de la piel y aumenta el consumo de dióxido de carbono.

Efectos: Rotura la duro fibras de celulitis, y fabricar eso más elástico asi que como a lograr la efecto dedarle forma al cuerpo.

4. Nervio capa

Él succión y liberación de aire presión:

Eso estimula la superficie y profundo capa de simpático nervioso sistema.

(1) Más bajo la sensibilidad de piel.

(2) Restaura la elasticidad de la piel y ayuda a resistir la

fibrosis tisular. Efectos: Reparar células y más bajo piel sensibilidad.

Fotón y microcorriente

Estimula la energía contenida en los ATP de las células para restablecer el funcionamiento normal y función de células después su imitando humano Fotón y microcorriente lógica Actual entra en músculo células a través de piel a proveer energía por músculo y cuerpo. Eso puede mejorar celda permeabilidad para que sea un 30%-40% más alta de lo habitual. Puede ayudar al cuerpo a absorber mejor la nutrición, agua, oxígeno, etc., y eliminar los desechos, toxinas y líquidos retenidos lo antes posible. Puede promover la síntesis de músculo fibras a fabricar eso 68% más alto que habitual, guardar la piel hidratado, suave, firme y brillante, y aumenta la síntesis de colágeno en un 73% para reducir las arrugas y fabricar la piel más suave, elástico y brillante.

caliente y frio

Utiliza el principio de expansión térmica y contracción en frío. Nuestra piel reduce el metabolismo velocidad a 5 grados centígrados, ralentiza el movimiento de las células y ralentiza la sensibilidad de terminaciones nerviosas, que inhibe el dolor y la hinchazón de la piel por reacciones alérgicas. Debido a la térmica expansión y frío contracción, la la temperatura de 5 grados Celsius causas la sangre buques para contraerse, lo que resulta en la contracción de los poros para contener los poros gruesos y reafirmar la piel. Por lo tanto puede liso facial arrugas y de cuervo pies.

Fisiológico efectos de 5 °C :

1. Puede contraer los vasos sanguíneos, lo que resulta en el estrechamiento de los poros, lo que puede mejorar en gran medida la Talla de poros

2. Eso puede fortalecer miofibrilla, fabricar la piel firme y elástico y suave las arrugas y patas de gallo.

3. Puede contraer los vasos sanguíneos y reducir las venas varicosas y las venas rojas de manera efectiva. Es más fácil de purificar y desintoxicar venoso sangre en términos de daño sustancias, y eso posee a importante efecto en reducción y eliminación de lugares.

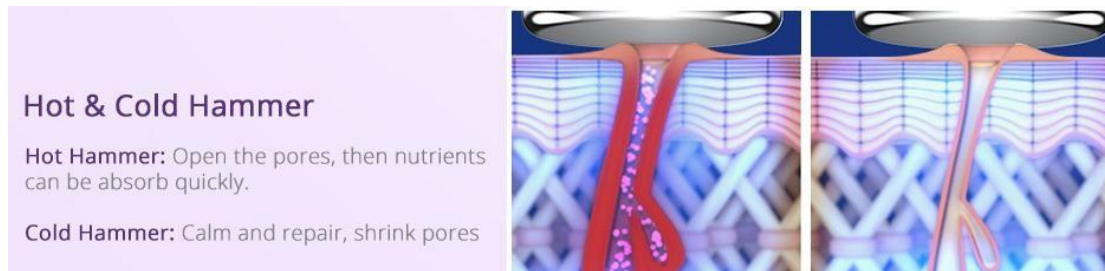
4. Puede reducir la tasa metabólica, inhibir y ralentizar la actividad celular, reducir la sensibilidad del nervio periférico para tener un efecto calmante y calmante, y aliviar la hinchazón y el dolor de la piel, especialmente por alérgico piel.

Fisiológico respuesta de 40 °C tratamiento :

1. 40 °C hace que las personas se sientan cálidas y cómodas, lo que podrá relajar los músculos, mantener el equilibrio de vegetativo nervioso sistema y aliviar dolor y dolor.

2. Puede promover circulación sanguínea, aumentar el contenido de oxígeno en la sangre y abrir los poros y extender los vasos sanguíneos para que la piel absorba los nutrientes rápidamente, lo cual es más suave y más cómodo absorbente manera.
3. Puede aumentar la tasa metabólica de la piel, aumentar el contenido de energía térmica del tejido, y fabricar piel naturalmente eliminar la residuos y toxinas, cuales posee a determinado efecto sobre la eliminación de bolsas bajo la ojos y círculos oscuros.

El alterno usar de frío y calor martillo posee multiplicando efecto sobre protección de la piel, y puede activar las células, y mejorar y purificar la piel, que es un buen instrumento para la salud y la belleza tratamiento.



¡Advertencia!

1. Cuando la frio calor martillo es trabajando, hacer no tocar alguna parte de este martillar a evitar quemaduras
2. Después la martillo es usado, es quieto debido caliente a calor transmisión.
1. Este dispositivo es no destinado por personas con físico debilidad, lento respuesta o mental (incluidos los niños), excepto en el caso de que la persona responsable de su seguridad pueda dar orientación o ayudar a ellos para hacer La musa eso en a seguro manera.
3. Niños deberían ser supervisado a fabricar seguro ellos hacer no tocar con este dispositivo.

Fotón y microcorriente & Fotón

La terapia de fotones LED utiliza el principio de la fotodinámica para activar las células profundas y estimular la piel metabolismo. Después de que la piel absorbe la luz, la energía de la luz se transforma en energía intracelular. energía, que expande y fortalece los microvasos y produce fotoquímico--enzimático reacción con la piel, aumentando la actividad de la catalasa y la superóxido dismutasa (SOD), que servir como "guardia" y "trabajador de limpieza" de las celdas. La descomposición del trifosfato de adenosina (ATP), a fuente de celular energía, aumenta, y glucógeno y proteína contenido aumento. Por lo tanto, eso promueve celda metabolismo y síntesis. Eso estimula básico fibroblasto crecimiento (BFGF) y el factor de crecimiento epidérmico (EGF) para secretar, lo que puede reorganizar el colágeno fibras y fibra elástica, bloquean y eliminan la formación de melanina, aceleran el crecimiento celular y circulación sanguínea y estimular las células de fibra para producir colágeno para aumentar la elasticidad de la piel. Juega un importante role en el cuidado de la piel como reparando la piel envejecida y la piel con acné, manchas que se desvanecen, piel reafirmante y aliviar quemaduras de sol

Fotón y microcorriente lógica efecto

Usando fotodinámica principio, eso activa profundo células y aumenta piel metabolismo. Después la luz es absorbida por la piel, la energía de la luz se convierte en energía celular, que puede relajar y fortalecer los micro vasos y producir reacciones fotoquímicas-enzimáticas con la piel para aumentar el contenido de glucógeno y proteínas. De esta forma, favorece el metabolismo y síntesis de células.

Luz LED roja: 635NM. La luz LED roja de longitud de onda específica calienta la parte inferior de la piel, promueve regeneración de colágeno, acelera la microcirculación de la piel y aumenta la elasticidad de la piel, dejando piel rosado y liso y haciendo piel verse más joven y tiene menos

arrugas

Promover la regeneración de piel células y activar activo ingredientes.

Luz LED azul: 462 NM. La luz LED azul de longitud de onda específica reduce los poros, elimina la grasa de la piel, calma piel, combatir el acné, con rapidez cerrar con llave en humedad y esencia, dejando la piel más elástico.

Aliviar piel inflamación, matar bacterias, conseguir deshacerse de acné.

LED verde Luz: 527NM. Luz LED verde de longitud de onda específica ayuda calmar, reparar piel, aliviar el dolor y promover la circulación sanguínea. Es adecuado para aquellos con córnea delgada y que están propenso a la alergia y enrojecimiento.

Luz LED púrpura: 600 NM, frecuencia dual de luces LED rojas y azules. Combina la eficacia de dos tipos de fototerapia y posee a particularmente bueno reparando efecto especialmente por la tratamiento de acné y acné marcas.

Luz LED amarilla: 590NM. Puede agregar energía a las células de la piel, promover el papel de las glándulas, ayudar digestión, tratar enfermedades de la piel, mejorar la inmunidad, acelerar la circulación sanguínea, reparar eficazmente rojo marcas, rojo manchas y aliviar hinchado y pigmentado manchas, y es adecuado para eliminar lugares y brillo

Blanco CONDUJO Ligerito: 670NM. Eso alcanza profundo en piel, acelera metabolismo de activo células, descompone los pigmentos, reduce las líneas finas y reafirma la piel. También puede relajar la piel, equilibrar el sebo. producción y controlar la secreción de aceite.

Luz LED turquesa: 610 NM, frecuencia dual de luces LED verdes y azules. Se mejora gradualmente celda energía, y posee positivo impacto sobre metabolismo.

3. Reafirmante de la piel y antienvjecimiento

(1). Efectos

1. Firma rostro y habilitar la introducción profunda de nutrientes
2. Incrementar piel elasticidad y suavidad
3. hidratar la piel y incrementar la absorción Velocidad de la piel.
4. Acelerar sangre circulación y metabolismo.
5. Aliviar la síntomas de doble barbilla y apretar piel.
6. Estimular colágeno proliferación y demora envejecimiento

(2). Aplicable Rango

1. Esos cuyo caras están oscuro y tedioso.
2. Esos cuyo piel es flácido y hundimiento.
3. Esos quién tener bien líneas, nasolabial pliegues , arrugas a ojo esquinas
4. Esos cuyo rostro contornos están no claro.
5. Esos quién tener áspero piel y largo poros
6. Esos quién trabajar por a largo hora en la oficina y están expuesto a ultravioleta rayos
7. Esos quién tener flacidez piel, edema o hinchazón después de dar nacimiento

(3). Inaplicable Rango

1. Esos quién tengo solo sufrido el plastico cirugía con prótesis y metal materiales, etc., implantado en la operación zona.
2. Esos quién tengo experiencia en inyección productos hace poco, semejante como hialuronico ácido, o esosquién tengo mesoterapia, arruga eliminación, o el plastico cirugía.

3. Esos quién tengo hipertensión, corazón enfermedad, diabetes, severo hipertiroidismo, maligno

tumor, etc

4. Esos quién están en alérgico período y tengo severamente sensitivo piel y metal alergias
5. Esos quién tengo trauma o herida sobre el piel.
6. Esos quién están de avanzado años.
7. Esos quién están en menstruación, el embarazo, lactancia, quirúrgico recuperación.
8. Esos quién tengo piel enfermedades y infeccioso enfermedades.
9. Esos quién tener poco realista ilusiones sobre la efecto.

(4). hacer y no hacer después operación

1. Hacer no lavar tu rostro con sobrecalentado agua por Tres días (usted puede lavar tu rostro concálido o frío agua).
2. Fortalecer hidratación, hidratante y evitar bronceado.
3. Hacer no ir para caliente muelles, saunas, ejercicio violento, etc para tres días.
4. Eso es recomendado a solicitar la máscara a menos tres veces a semana.
5. Evitar comiendo picante y grasiento alimento, evitar quedarse hasta tarde, de fumar y Bebiendo, y come másfrutas y vegetales y comida con menos grasa.
6. Evitar esos comida cuales Guías a alto sangre presión, alto colesterol y alto sangre azúcar).

4. Ojo Anti arrugas

(1). Efectos

1. Aliviar Fatiga ocular, oscuro círculos, ojo bolsas y edema.
2. Reducir líneas alrededor ojos y de cuervo pies.
3. Reducir oscuro lugares y acelerar sangre circulación.
4. Acelerar metabolismo y prevenir pigmentación.
5. Suplemento ojos con nutrición y hidratar piel.
6. Firma y ablandar piel, levantar la esquinas de la ojos.
7. Acelerar sangre circulación alrededor ojos y ayudar piel absorber nutrientes eficientemente.

(2). Aplicable Rango

1. Esos con arrugas, bien líneas, bolsas y oscuro círculos alrededor la ojos.
2. Esos con piel seca, seco líneas y dinámica arrugas
3. Esos con ojos propenso a fatiga y sequedad.
4. Esos quién frecuentemente rostro computadora pantallas y móvil Los telefonos.
5. Esos quién a menudo Quédate hasta tarde y tiene oscuro círculos
6. Esos quién a menudo Quédate en a seco o caliente ambiente.

(3). Inaplicable Rango

1. Esos quién tuvo solo plástico sufrido cirugía.
2. Esos quién tengo hipertensión, corazón enfermedad, diabetes, severo hipertiroidismo ytumores malignos.
3. Esos quién están teniendo un reacción alérgica y tengo sensible severo piel o son alérgico arieles.
4. Esos quién tengo piel lesiones
5. Esos quién están de avanzado años.
6. Esos quién estas embarazada o convalecientes
7. Esos quién tengo piel enfermedades y contagioso enfermedades.
8. Esos quién son sensibles a eléctrico corrientes

(4). hacer y no hacer después Operación

1. Evitar excesivo exposición a la sol. crema solar es alentado a usar.
2. Después operación, la tratado zona es relativamente seco y así que siendo hidratado y protección contra bronceado están alentado.
3. Dentro de 1-3 días después operación, eso es mejor no a usar alcohol, Ajá o otro exfoliante productos
4. Evitar facial Lavado con sobrecalentado agua, tomando a sauna, yendo por caliente muelles o otro ejercicio violento dentro de 7 días después operación.
5. Hidratantes y ojo mascarillas están alentado a usar. Eso voluntad ser preferible a usar ojo mascarillas 3 tiempos o más una semana.

5. Cuidado del cuello

(1). Efectos

1. Reducir la flojedad, aspereza y aburrimiento del cuello piel.
2. Firma piel y incrementar piel elasticidad.
3. Eliminar doble barbilla.
4. Acelerar linfa desintoxicación y mejorar facial piel.
5. Prevenir cuello y linfa enfermedades.

(2). Aplicable Rango

1. Esos con áspero y tedioso piel en la cuello.
2. Esos con linfático bloqueando
3. Esos con hundimiento e inelástico cuello piel.
4. Esos quién a menudo inclinar su cabezas
5. Esos quién están no Satisfecho con su cuello tono.

(3). Inaplicable Rango

1. Esos quién tener sólo sufrido el plástico cirugía.
2. Esos con hipertensión, enfermedad del corazón, diabetes, severo hipertiroidismo y malignotumores
3. Esos quién están teniendo un reacción alérgica, o personas con severo sensitivo piel.
4. Esos con piel trauma o herida.
5. Esos quién son de avanzado años.
6. Esos quién estas embarazada o convalecientes
7. Esos con piel enfermedad y otro contagioso enfermedades.

(4). hacer y no hacer después Operación

1. Evitar bronceado. Guardar la cuello cálido.
2. Después operación, la tratado zona es relativamente seco, hidratante y sol protección es alentado.
3. Dentro de 1-3 días después operación, eso es mejor no a usar alcohol, Ajá o otro exfoliante productos
4. Evitar facial Lavado con sobrecalentado agua, tomando a sauna, ir por caliente muelles o violento ejercicio dentro de 7 días después operación.
5. Hidratante y máscara por la cuello es alentado, Usa máscaras a el menos 3 veces a semana. Esencia o cuello la crema es alentado.
6. Evitar reverencia cabeza por a largo hora.

6. Cuerpo

administración (1).

Conformación de cintura y abdomen Efectos

1. Aliviar frío las manos y frío pies, frío matriz o frío cuerpo De mujer.
2. Apretar la piel sobre la cintura y abdomen.
3. Reducir lumbar y abdominal gordo.
4. Apretar piel, aliviar estirar marcas, obesidad líneas y incrementar piel elasticidad.
5. Acelerar metabolismo, aliviar constipación y mejorar intestinal peristalsis.

Aplicable Rango

1. Esos con pies fríos, manos frías, frío matriz y frío cuerpo.
2. Esos con lumbar y abdominal gordo o quién tengo hundimiento piel después nacimiento.
3. Esos quién a menudo sentarse por a largo tiempo, o tengo insatisfactorio cinturas
4. Esos con estirar marcas.
5. Esos con constipación o obstrucción de abdominal meridianos

Inaplicable Rango

1. Esos con "3 Hs" (hipertensión, hiperglucemia, hiperlipidemia) y quién tengo corazón enfermedad.
2. Esos en el embarazo, menstruación o lactancia.
3. Esos cuyo incisiones están sanando o quién están sobre la camino a recuperación.
4. Esos con epilepsia y severo diabetes y hipertiroidismo
5. Esos con maligno tumores, hemofilia o severo sangrado.
6. Esos con piel enfermedades y infeccioso enfermedades.
7. Esos con severo ginecológico enfermedades.
8. Esos cuyo ginecológico enfermedades están siendo tratado

hacer y no hacer después Operación

1. Evitar cultivo parte superior o cualquier cosa exposición cintura y abdomen como bien como frío y ventoso ambiente.
2. Evitar borrachera comiendo o Bebiendo. No alcohol, no picante y grasiento comida. quedarse hasta tarde deberían serevitado Bebe agua tibia.
3. Guardar abdomen cálido. Tomar un bañera después 4-6 horas.
4. Vapor sauna, caliente primavera o agotador ejercicio deberían ser evitado dentro de 7 dias después operación.
5. Antes yendo a cama a noche, Uds puede frotar tu abdomen agujas del reloj con tu las manos, asi que como a Ayuda con metabolismo y peso pérdida.

(2). Brazo Formación

Efectos

1. Estimular colágeno adelgazar la abajo de la piel a forma y firme eso.
2. Mejorar hundimiento piel.
3. Mejorar flácido brazos y grueso brazos.
4. Calmar y flacidez firme piel.

5. Apretar piel.

6. Acelerar sangre circulación y dragar meridianos y garantías

Aplicable Rango

1. Esos con grueso brazos y desear a Mira mejor en ropa.
2. Esos con flácido brazos.
3. Esos con hundimiento brazo piel.
4. Esos cuyo brazos son propensos a dolor y entumecimiento.
5. Esos quién a menudo sostener bebé o niños

Inaplicable Rango

1. Esos quién tener sólo tuvo el plastico cirugía.
2. Esos con hipertensión, corazón enfermedad, diabetes, severo hipertiroidismo, maligno tumor, etc.
3. Esos quién son durante alérgico período y posee severamente sensitivo piel.
4. Esos con piel trauma o Corte.
5. Esos quién están de avanzado años.
6. Esos quién están embarazada y quién están recuperación de cirugía.
7. Esos con piel enfermedades y infeccioso enfermedades.

hacer y no hacer después Operación

1. Guardar cálido después operación. Hacer no come frío comida.
2. Llevar ducharse 4-6 horas.
3. Bebida infinidad de agua tibia a Quédate hidratado.
4. Hacer no comer y beber también mucho o Quédate hasta tarde.
5. Evitar sauna, caliente primavera o agotador ejercicio dentro de una semana después operación.

(3). atrás Formación

Efectos

1. Aliviar hombro y espalda dolor, y mejorar la bulto sobre espalda de la cuello.
2. Dragar canales y garantías, y mejorar canales y garantías bloqueo
3. Incrementar sangre circulación y metabolismo.
4. mejorar la sangre suministro a la cabeza y dormir.
5. Regular las funciones de vísceras y fortalecer la cuerpo.
6. Firma piel y prevenir piel de hundimiento.
7. Reducir exceso gordo sobre la espalda y forma espalda.

Aplicable Rango

1. Esos con úlcera espalda y espaldas y tieso cuellos
2. Esos quién sufrir de insomnio, sueño a lote o tengo a peor memoria.
3. Esos quién están propenso a fatiga, somnolencia y pobre circulación de qi y sangre.
4. Esos con grueso espalda y querer a Mira mejor en ropa.
5. Esos quién tengo un bulto en el espalda de la cuello.

Inaplicable Rango

1. Esos con metal implantes en la cuerpo, semejante como stents y marcapasos, están alérgico a metal.
2. Esos están durante el embarazo, menstruación y lactancia.
1. Esos cuyo quirúrgico herida es cicatrización o convalecencia
2. Esos quién posee "Tres Hs", enfermedad del corazón, epilepsia y severo diabetes y hipertiroidismo

3. Esos con maligno tumor y hemofilia o Sangrado severo.
4. Esos con piel enfermedades y infeccioso enfermedades.

5. Esos quién están también débil.
6. Esos quién están borrachos, sediento, con exceso de trabajo, sobre a lleno o estomago vacío.

hacer y no hacer después Operación

1. Guardar cálido, evitar frío aire y beber infinidad de caliente agua.
2. Llevar ducha en 4-6 horas después operación.
3. Evitar quedarse hasta tarde, Bebiendo y comer en exceso
4. Evitar crudo, frío y picante alimentos y obtener suficiente dormir.
5. Evitar dejando al descubierto los hombros y escotado por detrás ropa

(4). Cadera Formación

La cadera está ubicada en el medio del cuerpo humano y es el centro clave del qi y la circulación sanguínea de meridianos Es el interruptor principal de seis meridianos y también el puente que conecta el qi y la sangre. Circulación de las partes superior e inferior del cuerpo humano, que juega un papel importante en la construcción de S- curva en forma y promover femenino atractivo.

Efectos

1. Mejorar sangre circulación y velocidad hasta metabolismo.
2. Mejorar menstrual dolor, irregular menstruación, anormal leucorrea y otro femenino enfermedades.
3. Mejorar dormir calidad, mejorar femenino sexual función y apretar la vagina.
4. Activar la cálido nido función, estimular la secreción de glándulas, y incrementar la sentimientos entre marido y esposa.
5. Fabricar tez rubicundo, desvanecerse color lugares y devolver a joven Expresar.
6. Forma caderas, mejorar hundimiento y exterior expansión de caderas, apretar piel y incrementarelasticidad.

Aplicable Rango

1. Esos con caído caderas y gordo acumulación.
2. Esos con estirar marcas inducido por obesidad y obesidad.
3. Esos cuyo extremo forma es no guapo, plano y suave exterior expansión.
4. Esos con frío y Frío caderas con cadera baja temperatura.
5. Esos con frío matriz, dismenorrea, irregular menstruación, ginecológico inflamación y otra problemas.
6. Esos con disminución de estrógeno niveles y pobre sexo vidas.

Inaplicable Rango

1. Esos quién están en menstruación, el embarazo, lactancia y operación recuperación.
2. Esos con hipertensión, corazón enfermedad, diabetes, severo tiroides glándula, maligno tumor, etc.
3. Esos con piel enfermedades, pacientes con infeccioso enfermedades y piel sensitivo período.
4. Esos con heridas durante recuperación de cirugía.
5. Esos con alérgico y severamente sensitivo piel.
6. Esos quién tengo sólo tenía liposucción
7. Esos quién están de avanzado años.

hacer y no hacer después Operación

1. Guardar caderas cálido y evitar agotador minifaldas y pantalones cortos.

2. Llevar Ducha en 4-6 horas después operación.
3. Bebida infinidad de caliente agua a evitar frío aire.

4. Evitar quedarse hasta tarde, Bebiendo y comer en exceso
5. Evitar comiendo crudo, frio y picante alimentos y obten suficiente dormir.
6. Sauna, caliente primavera o agotador ejercicio deberían ser evitado dentro de 7 dias después operación.

(5). Modelado de piernas

Efectos

1. Apretar piel y prevenir hundimiento.
2. Estimular colágeno regeneración y mejorar gordo líneas.
3. Incrementar pierna circulación y desintoxicación, metabolismo.
4. Promover sangre circulación y retirar sangre estasis, dragar canales y garantías, y prevenir las várices venas
5. Apretar excesivo saliente gordo sobre piernas y conseguir deshacerse de gordo sobre grueso muslos.

Aplicable Rango

1. Esos con pobre circulación de más bajo extremidades, edema y obeso personas.
2. Esos quién tengo bajo inmunidad y sentir malestar y dolor todos sobre la cuerpo están propenso aresfriados
3. Esos con constipación y posee grueso, flácido piel.
4. Esos cuyo canales y garantías de la piernas están obstruido, y la proporción del piernas es pobre.

Inaplicable Rango

1. Esos quién están en menstruación, el embarazo o lactancia.
2. Esos con hipertensión, corazón enfermedad, diabetes, severo hipertiroidismo, maligno tumor,etc.
3. Esos con piel enfermedades o infeccioso enfermedades.
4. Esos quién tengo incisiones en su cuerpos.
5. Pacientes con severo varicoso venas y tumores
6. Esos quién están teniendo reacciones alérgicas o quién tengo severamente sensitivo piel.
7. Personas quién tener sólo tuvo liposucción
8. Esos quién están de avanzado años.
9. Embarazada mujeres o quién están en la camino a recuperación.

hacer y no hacer después Operación

1. Guardar cálido después de la operación. Hacer no come frío comida.
2. Llevar ducharse 4-6 horas más tarde.
3. Bebida más cálido agua a guardar hidratado y velocidad hasta metabolismo.
4. Hacer no comer y beber también mucho o Quédate hasta tarde.
5. Evitar sauna, caliente primavera o agotador ejercicio por 7 dias después operación.
6. Vestir pantalones después operación. Evitar agotador minifaldas y pantalones cortos.

2. Técnico Especificaciones

Entrada de fuente de
alimentación: 100V-240V Poder
:190W

Mango 40K Unoisetion Cavitation 2.0
Frecuencia: 40KHz
Potencia: 20W

Mango sextupolar RF con fotón para el
cuerpo Frecuencia: 1MHz
Potencia: 50W

Mango de vacío y RF bipolar con fotón
Frecuencia: 1MHz
Potencia: 50W
Vacío: <-80kPa
Presión: >250kPa
Aire flujo: >10L/minuto
Ruido nivel: <70dB (30 centímetros fuera)

Mango de RF cuadrupolo con fotón Para la
cara Frecuencia: 1MHz
Potencia: 30W

Mango de RF tripolar con
fotón Frecuencia: 1MHz
Potencia: 10W

Sonda de frío para cuerpo y rostro
Temperatura: 0 ~ 5 grado
centígrado

3. Que si y no hacer

1. El enchufe con puesta a tierra pin debe ser utilizado antes se utiliza el instrumento y la potencia enchufe de la instrumento es adecuadamente conectado a tierra.
2. Asegúrese de que el voltaje del instrumento sea adecuado. Si el voltaje de la fuente de alimentación local es no es estable, sugerimos que el usuario agregue un regulador de voltaje con potencia coincidente entre el red y la instrumento.
3. En ordenar a asegurar la tratamiento efecto y normal Servicio vida de la instrumento, por favor usarla especificado piezas proporcionadas o sugirió por la fabricante original.
4. El instrumento deberían no Colocarse en húmedo lugares o cerca agua fuentes, y deberían no serdirectamente expuesto a la luz del sol
5. Hacer no sitio la instrumento cerca a fuerte calor fuente, como este puede afectar la vida y normalusar de la instrumento.
6. Antes tratamiento, por favor retirar todos metal objetos de la cuerpo primero, asi que como a evitar

inesperado condiciones e influencia la curativo efecto.

7. Absténgase de usar el dispositivo en ojos, tiroides, paratiroides, testículos, abdomen de mujeres embarazadas, y marcapasos

8. Los pacientes que padecen alguna enfermedad deben consultar con un médico y obtener el permiso de la doctor antes de usando.

9. Apague el interruptor de alimentación del dispositivo y asegúrese de que la fuente de alimentación total del El dispositivo se apaga antes de que el personal se vaya después del uso diario, para garantizar la seguridad de los eléctrico productos

10. Cuando el receptor del tratamiento esté tomando otros medicamentos para bajar de peso, se recomienda dejar de tomando a ellos por 1 a 2 meses antes de tratamiento. Extensión de la curso de tratamiento es recomendado si la tratamiento receptor querer usar este máquina inmediatamente.

11. No utilice el instrumento con el estómago vacío. después de que esté lleno, tu debe esperar a las menos 1 hora antes de tomando la tratamiento.

12. Durante la operación, el instrumento debe estar en pleno contacto con la piel para evitar irregularidades. calefacción.

13. Colocar la energía a más bajo nivel a la comienzo y lentamente aumentar eso después la cliente se adaptalo.

14. El área de tratamiento debe mantenerse humectada durante la operación y no realizar el tratamiento en piel seca (excepto la lipo láser almohadilla)

15. El nivel de succión no debe ser demasiado alto cuando se utiliza la pieza de mano de vacío y RF para evitar causando incomodidad.

16. los40K función deberían No ser usó en la cabeza, espalda y pecho

17. Cuándo usando calor y función de frío, no tapar la salida de aire a evitar afectar su servicio vida adeudado a insuficiente calor disipación

18. Limpio la instrumento con normal salina después operación a asegurar su limpieza a prolongarsu Servicio vida.

19. Utilizar máquina o tren máquina operadores en estricto conformidad con instrucciones en la usuariomanual.

4. Solución de problemas y Soluciones

1. La maquina no enciende

A. Asegurarse que el cable de alimentación es conectado a la enchufe con normal poder suministro.

B. Por favor controlar si el fusible sobre la espalda de la el instrumento es perder o estropeado.

2. ¿La máquina se puede encender pero no hay salida de energía de RF o está debilitada? R: Compruebe si la pieza de mano está conectada correctamente a la máquina. B: Él alambres en el pieza de mano son perder o roto.

3. puedo comenzar el instrumento, pero la pantalla tiene mensaje de error

A. Por favor desenchufar la poder cable detrás la instrumento y Espere por sobre 1 minuto antes dereiniciar el instrumento.

B. Si la arriba método no poder resolver la problema, por favor contacto la instrumento distribuidor porasistencia.

4. ¿No hay succión o la succión es débil cuando se usa la pieza de mano de vacío y RF? A: Por favor comprobar si la filtrar ha sido instalado correctamente

B: Por favor controlar ya sea la pieza de mano es conectado a la máquina adecuadamente.

C: Por favor controlar ya sea la cable de conexión la pieza de mano a la máquina está roto

D: Por favor controlar ya sea allí es bloqueo adeudado a tierra o extranjero objeto a la succión agujero. Si así que, limpia el succión agujero.

5. La máquina se puede iniciar pero no hay corriente eléctrica cuando se usa Fotón y microcorriente ¿función?

R: Compruebe si la pieza de mano está conectada correctamente a la

máquina. B: Por favor controlar ya sea tú tienes ajustar la energía a correcto nivel

C: Por favor controlar ya sea la piel producto usó en la tratamiento es qué nosotros recomendar es preferible a usar líquido piel producto cuando Uds usar este pieza de mano.)

6. ¿Se puede arrancar la máquina pero el martillo frío no funciona? A: El enfriamiento ventilador dentro es roto y luego no funciona

B: El circuito tablero en el interior es perder o estropeado

C: Si citado problemas ocurrir, Uds necesitar a reemplazar la pieza de mano

5. preguntas frecuentes

1. P: Cuan largo puede ser el tiempo en el que comienzo a ver resultados de RF ¿tratamiento?

R: Normalmente, puede ver los resultados del tratamiento ese día cuando se realiza la operación o dentro de una semana. El tejido de colágeno de la piel se calienta y luego se contrae, y obviamente puedes sentir el sensación de piel siendo apretado Porque RF obras a estimular subcutáneo pañuelo de papel a promover la regeneración de colágeno, por lo que cuanto más se toma el tratamiento, más se nota el efectos estarán.

2. P: Es RF perjudicial para la piel?

R: El tratamiento de radiofrecuencia es una operación no quirúrgica. Estimula la regeneración de colágeno en la parte inferior de la piel. y aumenta el metabolismo y, por lo tanto, no daña la piel. El enrojecimiento y el calor locales son las condiciones normales de aceleración circulación sanguínea, que se aliviará después de un momento. Asi que hay no hay necesidad preocuparse de ese.

3. P: Cuan largo puede ser un tratamiento ?

A: Una tratamiento sesión es 60 minutos. Nosotros voluntad combinar profesional tecnicas y instrumentos para lograr notable resultados.

4. P: que funciones lo hace este instrumento tiene?

R: Tiene las funciones de disolver la grasa y moldear el cuerpo, suavizar y rejuvenecer la piel, relajar y reparando la piel, reafirmando y levantando la piel y antienvjecimiento. Se puede operar en cada parte del cuerpo. En cuanto al cuidado facial, puede moldear el contorno del rostro, aliviar las arrugas y la flacidez de la piel. En términos del cuidado del cuerpo, puede reducir la grasa regional y construir una curva en forma de S, y promover el metabolismo y desintoxicación de la todo cuerpo. Mientras tanto, eso puede además mejorar la funciones de vísceras y resolver sub-salud problemas.

5. P: Cuales una es mejor en términos de peso pérdida, liposucción o este ¿máquina?

R: El principio de la liposucción es succionar el exceso de grasa en una parte del cuerpo a través de Succión de presión negativa para lograr el propósito de una rápida pérdida de peso. es quirurgico tratamiento requiriendo anestesia y así que allí es recuperación período, cuales posee riesgos A pesar de su resultados inmediatos. Sin embargo, nuestro instrumento está libre de riesgos y sin efectos secundarios. No solo puede ayudar reduce la grasa pero también estimula la regeneración de colágeno para levantar y tensar la piel. También puede construir Perfecto curvas

levantando piel, y acentuar De las mujeres sexual encanto.

6. P: Voluntad yo recuperar peso después ¿operación?

R: El tratamiento 40K funciona para disolver la grasa para reducir el peso y los usuarios no son propensos a recuperar su peso. Porque qué disuelto a través de este tratamiento es gordo, no agua. Gordo necesidades a

más extenso período de hora a acumular, así que normalmente la gente no recupera peso.

7. P: ¿Hacer yo necesito ser sobre a ¿dieta?

R: Presta atención a lo que comes. Debido a que la radiofrecuencia y el tratamiento ultrasónico funcionan para disolver la grasa y acelerar el metabolismo. Es mejor evitar comer alimentos picantes, aceitosos o fritos en caso de que afecten el metabolismo regular. El entrenamiento adecuado para sudar ayuda con el proceso de metabolismo de las grasas. De tal forma, los resultados voluntarios serán más perceptibles.

8. P: ¿Tiene eso algún efecto sobre el cuerpo?

R: El tratamiento de belleza RF no es invasivo y es uno de los enfoques más efectivos y seguros para eliminar las arrugas y moldear el cuerpo. En términos generales, los efectos secundarios no aparecerán. Un pequeño número de personas pueden experimentar enrojecimiento o hinchazón transitoria que desaparecerá después de unas horas. Las personas con piel seca pueden experimentar atrofia después del tratamiento, que desaparecerá después de tres días porque la regeneración de colágeno hará que la piel se llene, aunque el calor de radiofrecuencia puede causar pérdida de humedad de la piel. Generalmente, allí no hay efectos sobre la salud.

9. P: ¿Puede el ultrasonido ser realizado sobre cada parte del cuerpo?

R: El tratamiento con ultrasonido funciona para romper las células grasas, por lo que la grasa se libera de las células y luego es metabolizada a través del sistema linfático. Entonces su poder es muy alto. El corazón es sensible a las altas frecuencias de ondas sonoras. Desde que es un órgano hueco. Después de ser vibrado por ondas de sonido, el corazón puede reflejar las ondas de sonido a la diferente transmisión de ondas de sonido por el tejido muscular y la sangre en el corazón. Esta fuerza puede alejar las válvulas del músculo cardíaco. Si se usa el instrumento en los ojos, puede provocar un desprendimiento de retina, por lo que el tratamiento con ultrasonido debería no ser realizado sobre las áreas de ojos y corazón. (no sobre el área de cintura, espalda y tórax)

10. P: ¿Lo hace el ultrasonido tener efectos secundarios sobre el humano ¿cuerpo?

R: El tratamiento de belleza ultrasónico es un programa no quirúrgico y no invasivo sin anestesia. Eso confía en ultrasonido (onda de sonido mecánica) - disolver la grasa a través de la cavitación - ultrasonido enfoque. Y los resultados están gordos aplastados - gordos disueltos - piel reafirmante y cuerpo esculpido respectivamente. Solo se dirige a las células grasas de baja densidad, pero deja el tejido de alta densidad como los vasos sanguíneos intacto, y por lo tanto no tiene efectos secundarios en el cuerpo humano. Leve el tinnitus se probablemente ocurrirá durante el tratamiento, que es dentro del alcance normal. Así que no hay necesidad de preocuparse sobre eso.

11. P: ¿Por qué ocurre el tinnitus?

R: Es porque el ultrasonido viene con una vibración de alta frecuencia, que puede llegar hasta los 20 kHz. Eso penetra en 20 mm de profundidad de la piel y las capas de grasa a través del ultrasonido enfoque. Muy intensificado el ultrasonido puede causar una fricción de alta velocidad entre las células grasas, que pueden calentarlas y disolverlas. Y durante el proceso, el sonido puede ser producido así que ese cliente voluntario puede tener la sensación de tinnitus.

12. P: ¿Qué es el colágeno?

R: El colágeno es un tipo de sustancia de macromolécula de fotón y microcorriente, un tipo de blanco, opaco y no ramificado fibroso proteína. Eso puede ser un suplemento de nutrientes necesario por todas las capas de la piel, mejora la actividad del colágeno en la piel, retiene la humedad, nutre la piel, ralentiza el envejecimiento, alivia la relajación facial, provee nutrientes por el pelo, etcétera. El colágeno es un nutriente que el cuerpo humano debe reponer para retrasar el envejecimiento. Con el crecimiento de la edad, el colágeno gradualmente está siendo perdido. Para las mujeres,

colágeno Comenzará disminuir desde la edad de 20. En la edad de 25, colágeno voluntad de pérdida llegar a su pico. A la edad de 40, el colágeno el contenido es menor que medio de ese una posee a años de 18 Eso es la pérdida de colágeno y agua ese causas la arrugas sobre la rostro de los ancianos. La rotura de las fibras de colágeno y de las fibras elásticas provocará la oxidación del tejido cutáneo, atrofiado y se derrumbó. La piel estará seca, arrugado, fofo e inelástico. Por lo tanto, en ordena retrasar el envejecimiento, allí debe ser mucho colágeno

13. P: Por qué hacer yo necesitar cadera ¿tratamiento?

A: Porque eso puede ayudar con desintoxicación de linfático sistema de cuerpo, aliviar ginecológico enfermedades, y proteger a las mujeres del daño provocado por el bloqueo de las nalgas. El bloqueo de la cadera provocará condiciones ginecológicas por el hecho de que las caderas son las áreas donde se encuentran muchos órganos importantes de cuerpo humano existe. Si las caderas sufren la contracción de los meridianos energizantes superior e inferior, serán vulnerables al frío, la humedad y la estasis de sangre. Cuando las caderas se ven afectadas por el frío, el meridiano de la cadera ocurrirá una contracción, y luego habrá algunos síntomas como dismenorrea, irregular menstruación, menstruación oscura, coágulo de sangre, bloqueo de sangre y meridianos. También afecta a las mujeres. fertilización.

14. P: Cómo lo hace Aspirar ¿desintoxicar?

R: El vacío puede causar congestión capilar, estimular las células para aumentar la vitalidad. La succión y liberación de presión durante la operación puede hacer poros locales continuar abriéndose y cerrándose, lo que puede promover la respiración de la piel, aumentar la cantidad de oxígeno de la piel, y velocidad hasta la eliminación de residuos. Así que eso logra la efectos de promoviendo qi y sangre circulación, disipación frío y húmedo, dragado de meridianos y garantías, limpieza de toxinas, disipando calor y así sobre.

6. Embalaje Lista

1x Máquina Cuerpo

1 pieza de mano de

RF para ojos. 1 pieza

de mano RF facial1x

Cuerpo RF pieza de

mano

1x pieza de mano RF de

vacío1x 40K pieza de

mano

1x Caliente & Frío pieza de mano

1 pieza de mano de fotones y

microcorriente.2x Poseedor

1x Poder

Cable2x

Fusible

1x Filtrar

7. Simplificado Tratamiento Pasos

1. Piel reafirmante y anti-envejecimiento

Eliminar maquillaje y limpio cara --- hidro máscara y caliente limpia a vapor cara---tóner---masaje crema+masaje técnicas---masaje crema/esencia+Rostro RF --- limpio rostro--- agua máscara--- cara limpia---esencia, martillo frío y caliente---máscara facial+FOTONµcorriente---quitar máscara y limpio cara --- aplicar tóner, esencia, rostro crema y pronto.

2. Ojo anti envejecimiento

Eliminar maquillaje --- tóner --- ojos esencia+masaje técnicas---ojo esencia+Ojo RF - limpio ojo área---aplicar ojo máscara --- ojo limpio área---aplicar virador, ojo esencia y ojo crema.

3. Cuello cuidado

Eliminar maquillaje---tónier---masaje crema+masaje técnicas---masaje crema/esencia+RostrorF -
limpio cuello área --- cuello máscara---quitar máscara y limpio cuello --- aplicar tónier y cuello
crema.

4. Abdomen y cintura/cadera/pierna

Masaje técnicas---RF crema/gel+40K tratamiento---esencial aceite/RF crema+VACÍO & RF---

pasar un trapo la tratado zona limpio

5. atrás


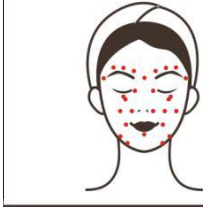

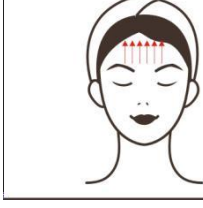
Masaje técnicas---esencial aceite/RF crema+cuerpo RF---esencial aceite/RF crema+VACÍO & RF---
pasar un trapo la tratado área limpia




6. Brazo

Técnicas de aceite masaje --- Crema RF/gel+tratamiento 40K ---
esencial / esencial / crema RF+Corporal RFtratamiento---limpieza
la tratado zona limpio

8. Operacional diagramas

Parámetro	Producto	Técnicas	diagramas
Ajustamiento			
Rostro Reafirmante y Antienvjecimiento: 70 min una vez a semana			

<p>Cara RF Tiempo: 15 minutos Energía nivel: 3-7 Modo: A (predeterminado modo)</p> <p>caliente y frío Hora: 8-10 minutos Energía nivel: 3-7 Modo: A</p> <p>Fotón y Micro actual Hora: 5-8 minutos Energía nivel: 3-7 Modo: A (predeterminado modo) Elige la luz con específico color basado en tus necesidades.</p>	<p>Maquillaje Removedor+Car a Limpador+Frío& Caliente Vapor+Masaje Crema+Hidro Máscara+Esencia+Mas Múscara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eliminar maquillaje y limpiar rostro, 5 minutos. 2. Solicitar hidratación máscara y calientevapor, 10 minutos 3. Limpio la rostro, 2 minutos. 4. Solicitar virador , 1 minuto 5. Aplicar la crema de masaje uniformemente. a rostro y calmar rostro, 3 veces. 6. Solicitar digital prensado técnica sobre la siguiente puntos de acupuntura (RN-24, DU-26, ST-4, ST-6, LI-20, BL-1, BL-2, EM3, TE- 23, el templo, GB-1, ST-1, ST-2),3 veces. 7. Calmar rostro, 3 veces 8. Aplicar alternativamente lifting técnica desde el mentón hasta el lóbulo de la oreja, esquina de la boca a Ermen (SJ21), y el ala de la nariz a la sien, levante el ojoesquina desde el párpado inferior hasta templo con ambas cosas las manos, 3 veces. 9. Repetir la técnica sobre la otro lado. 10. Aplicar la técnica de elevación hacia la línea del cabello en la frente, 3 veces 11. Aplicar técnica de depilación con los dedos alternativamente para levantarrostro. 12. Solicitar punteo técnica 	<p>Técnica5,7</p>  <p>Técnica6</p>  <p>Técnica8,9,13</p>  <p>Técnica10</p>  <p>Técnica15</p>
---	---	---	--






		<p>con una mano hacia línea de pelo en la frente</p> <p>13. Un lado, aplicar depilación técnica con ambas manos alternativamente para levantar la cara, 2-3 minutos</p> <p>14. Repita la técnica en el otro lado.</p> <p>15. Muévase en un movimiento en zigzag en frente con medio y anillo dedos, deslice hacia el lado frontal de orejas y levante adelante y atrás por 3 veces y luego deslice hacia atrás de orejas</p> <p>16. É l final</p> <p>17. Rostro RF operación</p> <p>18. Aplicar técnica de lifting desde mandíbula al lóbulo de la oreja, comisura de la boca a centro del oído, y nariz hacia sien moviendo la pieza de mano en curva espiral línea por línea, 3 veces.</p> <p>19. Repita la técnica en el otro lado.</p> <p>20. Aplicar técnica de lifting por moviendo la pieza de mano en forma circular movimiento hacia la línea del cabello en frente, 3 veces.</p> <p>21. Lavar rostro limpio, 2 minutos</p> <p>22. Aplicar hidromascarilla en el rostro, 10 minutos.</p> <p>23. Eliminar máscara, 2 minutos.</p> <p>24. Solicitar esencia igualmente a rostro.</p> <p>25. Caliente y frío: levantamiento de la mandíbula hacia la frente en forma circular movimiento, 3 veces</p> <p>26. Haz lo mismo con el otro lado.</p> <p>27. Operar el calor y el frío pieza de mano en la frente en círculos horizontalmente, 3 veces.</p> <p>28. Solicitar rostro máscara, 15 minutos</p>	 <p>Técnica 18, 19, 20, 25, 26, 27</p>  <p>20, 27</p> 
--	--	---	---




		<p>29. Utilice la técnica de estampado para operar el Pieza de mano de fotones y microcorriente en toda la cara simultáneamente, 3 veces.</p> <p>30. Retire la máscara facial, limpie la rostro, 2 minutos</p> <p>31. Aplicar tóner, esencia, crema.y crema solar</p>	
--	--	---	--

Tratamiento Sugerencias

Un curso de tratamiento consta de diez sesiones de tratamiento. Después de una sesión de tratamiento, la piel se reafirmará y rejuvenecerá a medida que se absorban los nutrientes que necesita. Después de un curso de tratamiento, la piel se levantará con brillo. Dos cursos dejarán la piel suave y tersa, dejándola rostro contorno más claro Tres cursos voluntad promover piel metabolismo y desintoxicación procesos, ayudar desvanece la pigmentación y la oscuridad de la piel, ralentiza el envejecimiento de la piel y evita que la piel se hunda, y estimular regeneración de colágeno a salir piel suave y firme con brillo

Ojo Antiedad: 45 min una vez una semana

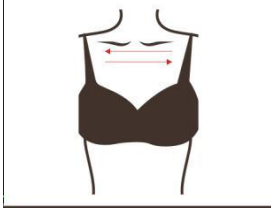
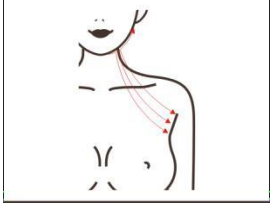
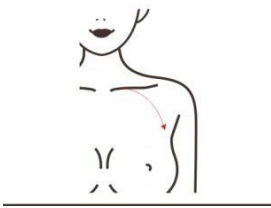
<p>Ojo RF Tiempo: 10 minutos Energía nivel: 3-7 Modo: A (predeterminado modo)</p>	<p>Maquillaje Removedor+Car a Limpiador+Esen cia/Ojo Crema+MS- 76D1MAX+Ojo Máscara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eliminar maquillaje y limpiar rostro, 5 minutos. 2. Solicitar tóner, 1 minuto 3. Frotar esencia (ojo crema) uniformemente en el área alrededor de los ojos por moviéndose en movimiento circular, 3 veces. 4. Presionar acupuntura puntos sobre área de los ojos: BL1, ST1, ST2, GB1, SJ23, EX-HN4, BL2. 5. Calmar ojo zona con Correcto mano y mano izquierda moviéndose en sentido horario y antihorario respectivamente, 3 veces. 6. Usa la mano de tijera para calmar ojo zona. 7. Usa una mano para moverte circular movimiento de interno ojo esquina a la exterior esquina del ojo finalmente a la parte posterior de la oreja, con la otra mano en tijera forma, 3 veces. 8. Ojo RF operación 9. Aplicar técnica de lifting por mover la pieza de mano de párpado inferior a la esquina del ojo, 3-6 veces 10. Aplicar técnica de lifting por mover la pieza de mano de más bajo párpado a templo, 3-6 veces 11. Aplicar técnica de lifting por moviendo la pieza de mano en pequeños círculos desde el párpado inferior hasta templo, 3-6 veces. 12. Aplicar técnica de lifting por mover la pieza de mano de más bajo párpado a templo, 3-6 veces 13. Solicitar técnica de levantamiento por moviente la pieza de mano de 	<p>Técnica 3,5</p>  <p>Técnica 4</p>  <p>Técnica 6</p>  <p>Técnica 7</p>  <p>Técnica 9</p>  <p>Técnica 10</p>
--	---	--	--

		<p>ceja a línea de pelo, 3-6 veces. 14. Repita las técnicas en el otro lado. 15. Lave el área de los ojos limpia, 1 minuto 16. Solicitar máscara de ojos, 15 minutos 17. Quitar ojo mascarilla y lavadola zona limpio, 2 minutos 18. Aplicar esencia de ojos y ojos.crema 19. Él fin.</p>	 <p>Técnica11</p>  <p>Técnica12,13</p> 
--	--	---	--


Tratamiento Sugerencias






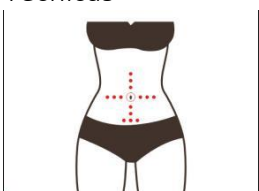

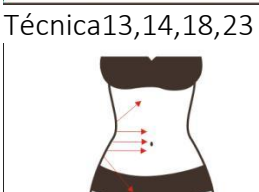
Un curso de tratamiento consta de diez sesiones de tratamiento. Después de un tratamiento, el metabolismo voluntad ser acelerado, piel alrededor ojos voluntad ser apretado y multa líneas voluntad ser reducido. Después un curso de tratamiento, la línea fina se eliminará obviamente. Dos cursos de tratamiento se ayuda a levantar la piel debido al crecimiento de colágeno en la piel profunda, dejando las esquinas de los ojos levantadas y los ojos más brillante Tres cursos de tratamiento ayudarán a consolidar los efectos y las líneas finas serán totalmente ido. Si la tratamiento receptor mantiene diario cuidado, arrugas voluntad ser impedido de reapareciendo

Cuidado del cuello: 50 min una vez una semana




<p>Cara RF Tiempo: 15 minutos Energía nivel: 3-7 Modo: A (predeterminado modo)</p>	<p>Maquillaje Removedor+Car a Limpiador+Masa edad Crema+Esencia+ Cuello Máscara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eliminar maquillaje y limpiocuello, 5 mín. 2. Solicitar tóner, 1 mín. 3. Masaje de cuello: frote aceite en el pecho con ambas manos hacia el nuca y presiona Gb-20y du-16 puntos de acupuntura, 3 veces. 4. Levante alternativamente la mandíbula inferior y papada y luego pasardetrás de la oreja y debajo de la axila, 3 veces. 5. Empuje hacia abajo con el pulgar y dedo índice extendiéndose, trazando 3 meridianos desde el cuello hasta elaxila, 3 veces. 6. Empuje hacia abajo con 4 dedos, rastreo 3 meridianos de cuello a la axila, 3 veces. 7. Empujar hacia abajo con doblando 	<p>Técnica3</p>  <p>Técnica4,6,7</p>  <p>Técnica8</p> 
---	--	---	---

		<p>dedos hasta que el cuello se caliente y deslizar a la axila, 3 veces.</p> <p>8. Empujar hacia abajo con pulgare y el dedo índice se extiende desde exterior de la clavícula a la axila, 3-5 veces.</p> <p>9. Hacer la mismo sobre el otro lado.</p> <p>10. É l final</p> <p>11. Operación de cara RF, mueva el mango desde el área de la papada hasta la parte posterior de la oreja y luego a axila en movimiento circular, 3 veces.</p> <p>12. Mueva el mango en círculos a lo largo de tres líneas en un lado de cuello a la axila, 3 veces.</p> <p>13. Mueva el mango en círculos en toda la zona del cuello hasta la axila, 3 veces.</p> <p>14. Limpie el cuello con una toalla tibia, 2 minutos.</p> <p>15. Aplicar máscara de cuello, 15 minutos.</p> <p>16. Lave el área limpia con toalla tibia y aplique la toalla tibia a cuello por 1 minuto. Aplicar tóner, esencia para el cuello, cuello crema y crema solar</p> <p>19 É l fin.</p>	<p>Técnica 5, 11, 12, 13</p>  <p>El diagrama muestra un perfil de la cabeza y el cuello con líneas rojas que indican las trayectorias de las manos durante el masaje. Una línea va desde la clavícula hacia la axila, y otra muestra un movimiento circular en la zona del cuello. Se ven también líneas de masaje en la parte posterior del cuello y en la zona de la papada.</p>
<p>Tratamiento Sugerencias</p> <p>Un curso de tratamiento consta de diez sesiones de tratamiento. Después de un tratamiento, la piel se vuelve rejuvenecido y liso. Después a lleno curso, cuello piel se convierte liso, y la cuello La circulación linfática se acelera. Después de 2 cursos de tratamiento, la piel se tensará, el cuello las líneas se reducirán y se aliviará la condición de la papada. Después de 3 cursos de tratamiento, piel voluntad ser reafirmado con brillo, linfático desintoxicación voluntad ser acelerado y algunos problemas voluntad ser resuelto semejante como acné y piel lo aburrido. Es más, piel envejecimiento voluntad ser prevenido y piel permanecerá en un joven Expresar.</p>			
<p>Conformación de cintura y abdomen: 45 min una vez una semana</p>			

<p>40K Hora: 15 minutos Energía nivel: 3-7 Modo: A (predeterminado) Aspiradora & RF</p>	<p>Masaje Crema (Esencial Aceite)+Gel+MS - 76D1MAX</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masaje técnicas 2. Frote el aceite en el abdomen con las manos Moviente en circular movimiento,3 veces. 3. Frotar abdomen espalda y adelantecon ambas manos, 3-5 veces. 4. Amasar abdomen con ambas cosaslas manos usando quiropráctica técnica, 3 veces. 	<p>Técnica2,8</p>  <p>Técnica3,17</p>
---	--	---	--

<p>Hora: 15 minutos Energía nivel: 3-7 Modo: A (predeterminado modo) Tiempo de succión: no cero, más extenso que liberación hora Tiempo de liberación: más corto que tiempo de succión. Cuando es cero, la pieza de mano es en constante Estado de succión. Ajustar la succión tiempo basado en individual aguante.</p>		<p>5. Levante Meridian BV (recipiente de cinturón) en ambos lados de la cintura con ambas manos alternativamente, 16 veces. 6. Mueve las manos en forma de 8 movimiento con la mano derecha e izquierda manecilla moviéndose en sentido horario y anti-en el sentido de las agujas del reloj respectivamente en la cintura, 3 veces. 7. Superposición de manos y mensaje el canal intestinal en el sentido de las agujas del reloj, 3 veces. 8. Moverse las manos en circular movimiento para calmar la zona de tratamiento, 3 veces. 9. Aplicar prensado digital técnica en los siguientes puntos de acupuntura: RN13, RN12, RN10, RN8, RN6, RN4, RN3, ST25, SP15. 2 veces. 10. A partir de punto RN3, empuje hacia el ombligo del vientre, deslice hacia la cintura y luego levante hacia arriba hasta la ingle con ambas cosas pulgares, 3 veces. 11. Calmar el tratamiento zona con las manos y luego deslizar hacia ingle. 12. É final 13. Funcionamiento 40K: a partir de un lado de la cintura, levante el asa para abdomen e ingle, 3 veces. 14. Repetir lo anterior operación en el otro lado, 3 veces. 15. Mueva el mango abdomen en pequeño circular movimiento, 3 veces. 16. Mueva el mango abdomen en grande circular movimiento, 3 veces. 17. Operación de vacío y RF: Succión y liberación modo, moverse la taza del lado izquierdo de cintura</p>	 <p>Técnica 4</p>  <p>Técnica 5</p>  <p>Técnica 6</p>  <p>Técnica 7</p>  <p>Técnica 9</p>  <p>Técnica 10</p>  <p>Técnica 13,14,18,23</p>  <p>Técnica 15</p>
---	--	---	--




		<p>alrededor del ombligo agujas del reloj, 3 veces.</p> <p>18. Modo de succión constante, unolado, levante desde el lado de la cintura hacia abdomen línea por línea, 3 veces</p> <p>19. Haz lo mismo con el otro lado</p> <p>20. Levantar Meridiano BV (cinturón Buque)</p>	
--	--	--	--

		<p>horizontalmente de ida y vuelta, 3 veces</p> <p>21. Mueve la taza hacia arriba y hacia abajo a forma cintura, 3 veces</p> <p>22. Mueva la taza en círculos grandes en abdomen, 3 veces</p> <p>23. Un lado, levante del lado de la cintura a abdomen línea por línea 3 veces</p> <p>24. Limpie la esencia abdomen con seco toalla</p> <p>25. Él fin.</p>	 <p>Técnica 16,22</p>  <p>Técnica 20</p> 
--	--	--	--

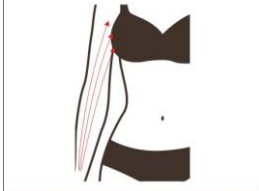

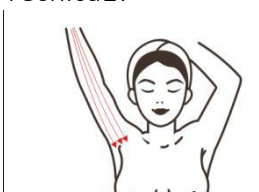

Tratamiento Sugerencias

A curso de tratamiento consiste de diez tratamiento sesiones Después una tratamiento sesión, el metabolismo se acelerará. Después de uno Por supuesto, la grasa se metabolizará lentamente, el cuerpo empezar a adelgazar. El estreñimiento y otros problemas se aliviarán al mismo tiempo. después de dos Cursos, los efectos gradualmente se harán evidentes, la piel se tensará y levantará, y la piel se incrementará el colágeno. También se alivian las estrías y la piel flácida. Tres cursos se ayudar consolidar la efectos No deseado gordo voluntad gradualmente desaparecer, y cintura y abdomen curvas voluntad comienzo a llevar forma.

Brazo Modelado: 50 minutos una vez una semana

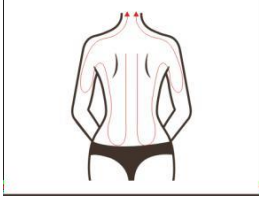
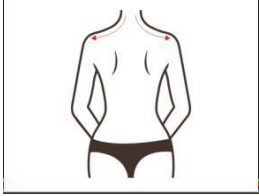
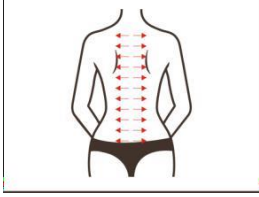
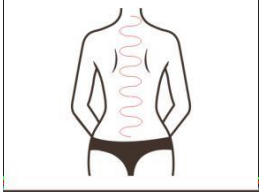
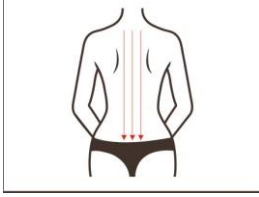
<p>40K Hora: 20 minutos (10 minutos en cada lado) Energía nivel 3-7 Modo: A (predeterminado) Radiofrecuencia corporal Hora: 20 minutos (10 minutos en cada lado) Energía nivel: 3-</p>	<p>Masaje Crema (Esencial Aceite)+Gel+MS - 76D1MAX</p>	<ol style="list-style-type: none"> Masaje tecnicas Orden izquierda-derecha: colocar el brazo piso, frotar petróleo en piel de más bajo brazo a todo el brazo y deslizar a los dedos (calmante técnica), 3 veces. Empujar la todo el brazo con ambas cosas palmas, 3 veces. Empuje las manos hacia arriba trazando Tres meridianos: Grande Intestino Meridiano (LI) - Triple Energizador Meridiano (TE) - Intestino Delgado Meridiano (SI) a las axilas con pulgares e índices jugando, 3 veces. Calmar la zona, 3 veces Frote tres meridianos en los brazos con los dedos doblados 	<p>Técnica 2,3,4,5,6,7</p>  <p>Técnica 8,9</p>  <p>Técnica 10</p>  <p>Técnica 13,16</p>
---	--	--	--



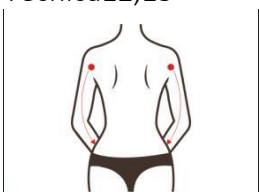

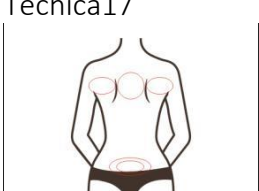
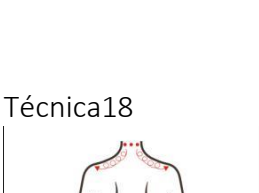

<p>7 Modo: A (predeterminad omodo)</p>		<p>hacia atrás y adelante a cálido a ellos hasta, 3 veces. 7. Calmar la zona, 3 veces</p>	
--	--	---	--

	<p>8. Coloque el brazo interno hacia arriba y empuje las manos trazando tres yin meridianos en la parte interna del brazo: Pulmón Meridiano (LU) - Pericardio Meridiano (PC) - Corazón Meridiano (HT) a la axila con pulgares e índices jugando, 3 veces respectivamente.</p> <p>9. Frotar tres meridianos espalda y adelante con los dedos doblados para cálido hacia arriba, 3 veces.</p> <p>10. Calma la zona y desliza hasta dedos</p> <p>11. Repita las técnicas anteriores en el otro brazo.</p> <p>12. É final</p> <p>13. Operación 40K: cliente laico brazo plano, empuje tres meridianos desde la parte grasa del antebrazo hasta axila, 3 veces.</p> <p>14. Mover el mango en anular movimiento a lo largo de Tres meridianos a axila, 3 veces.</p> <p>15. Redoblar la operación en flácido brazos, 3 veces.</p> <p>16. Mueva el mango a lo largo de tres meridianos a axila, 3 veces.</p> <p>17. Coloque el brazo interno hacia arriba y empuje tres meridianos en la parte superior brazo a axila, 3 veces.</p> <p>18. Mueva el mango en círculos a lo largo de Tres meridianos sobre Superior brazo a axila, 3 veces.</p> <p>19. Mueva el mango a lo largo de tres meridianos desde la parte superior del brazo hasta axila.</p> <p>20. Repita esas técnicas en el otro brazo.</p> <p>21. Operación de RF del cuerpo: poner brazo del cliente plano, mueva el mango a lo largo de tres meridianos desde la parte</p>	 <p>Técnica 14,15,21,22</p>  <p>Técnica 17</p>  <p>Técnica 19,24</p> 
--	---	--

		<p>grasa del antebrazo hasta axila en movimiento circular, 3 veces.</p> <p>22. Fortalecer la operación de flácido brazos, 3 veces.</p> <p>23. Coloque el brazo interno hacia arriba y mueva el mango a lo largo de tres meridianos del brazo a la axila en circular movimiento, 3 veces.</p> <p>24. Moverse la encargarse de a lo largo de Tres</p>	
--	--	---	--

		<p>meridianos desde la parte superior del brazo hasta axila en circular movimiento. 25. Repita esas técnicas en el otro brazo. 26. É fin.</p>	
<p>Tratamiento Sugerencias Un curso de tratamiento consta de diez sesiones de tratamiento. Después de una sesión de tratamiento, se sentirá cálido y apretado, y los brazos estarán relajados. Después de un curso de tratamiento, excesiva la grasa de los brazos se reducirá y la piel parecerá más tensa y tersa. dos cursos de tratamiento voluntariamente ayudan a formar brazos, dragar meridianos, y mejorar la constitución a fortalecer los efectos 3 cursos voluntariamente ayudan a consolidar efectos y evitar que los brazos recuperen el peso.</p>			
<p>atrás Modelado: 45 min una vez a semana</p>			

<p>Radiofrecuencia corporal Tiempo: 15 minutos Energía nivel: 3-7 Modo: A (predeterminado modo)</p> <p>Vacío y RF Hora: 15 minutos Energía nivel: 3-7 Modo: A (predeterminado modo) Tiempo de succión: no cero, más extenso que liberar hora Tiempo de liberación: más corto que tiempo de succión. Cuando es cero, la pieza de mano es en constante Estado de succión. Ajustar la succión tiempo basado en individual aguantante.</p>	<p>Masaje Crema (Esencial Aceite)+MS-76D1MAX</p>	<ol style="list-style-type: none"> Masaje técnicas Solicitar petróleo a espalda y presiona Gb-20 y du-16 puntos de acupuntura Arrancar Dabanjing (el área conectando cuello y hombro) (de línea de pelo), 3-5 veces Mueva el pulgar hacia afuera desde Meridiano de la vejiga (BL) al región sacra y luego a Gb-20 y du-16 puntos. Comenzando desde el cuello hasta la caudal vértebra, mover las manos en S- forma, 3 veces. Meridiano de vejiga de empuje (BL) con pulgar en izquierda derecha ordenar, 3 veces. Empuje el meridiano de la vejiga (BL) para la región sacra con ambos pulgares al mismo tiempo, 3 veces. Empuje el meridiano de la vejiga (BL) hacia adentro Tres doblando dedos, 3 veces. Empuje a lo largo del borde medial de la escápula con ambas manos alternativamente en orden de izquierda a derecha, 3-6 veces. Empuje el borde medial de omóplato con ambas manos horizontalmente, 3-6 veces. Calma la espalda con ambas manos y empuje Gb-20 y Du-dieciséis puntos, 3 veces. Superponga ambos pulgares y presione el punto SI-11 y deslice hacia el brazo, 3 veces. Hacer lo mismo sobre el otro 	<p>Técnica 2,11</p>  <p>Técnica 3</p>  <p>Técnica 4</p>  <p>Técnica 5</p>  <p>Técnica 6,7,8,14</p>  <p>Técnica 9,19</p>
--	--	---	---








		<p>lado,3 veces</p> <p>14. frotar meridiano gv y Vejiga Meridiano (BL) con las manos cálidas hasta.</p> <p>15. Él final</p> <p>16. Operación RF del cuerpo, mueva el copa a lo largo de Meridian GV y Meridiano de vejiga (BL) respectivamente del cuello al sacro región, 3-5 veces.</p> <p>17. Mueva la taza en círculos en Punto Du-14 y región sacra, 3-5 veces respectivamente.</p> <p>18. Desde el cuello, mueva la copa Dabanjing (el área que conecta cuello y hombros) espalda y adelante, 3-5 veces.</p> <p>19. Levante la copa en la medial frontera de escápula espalda y adelante en izquierda derecha ordenar, 3-5 veces.</p> <p>20. Levante desde dos lados de la cintura hacia arriba hasta la axila, 3-5 veces.</p> <p>21. Cuerpo de vacío y RF funcionamiento: lo mismo con el técnicas de Cuerpo radiofrecuencia</p> <p>22. Limpie el área tratada con toalla seca</p> <p>23. Él fin.</p>	 <p>Técnica10</p>  <p>Técnica12,13</p>  <p>Técnica16</p>  <p>Técnica17</p>  <p>Técnica18</p>  <p>Técnica20</p> 
--	--	--	---

Tratamiento sugerencias

Un curso de tratamiento consta de 10 sesiones de tratamiento. Después una sesión de tratamiento, espalda se relajará significativamente, la rigidez del cuello también se aliviará y la piel se levantará. A El curso ayudará a relajar el hombro, reducir la grasa de la espalda, aliviar el bulto en la nuca y dar forma a la línea de la espalda. Después de dos cursos, el bulto parecerá ser más pequeño, los meridianos serán dragado, sub-salud problemas voluntad ser resuelto, y dormir calidad voluntad ser mejorado. 3 cursos ayudará con el adelgazamiento de la espalda, el refinamiento de la línea de la espalda, el fortalecimiento de la función visceral, la mejora digestión, desintoxicación y metabolismo (uno curso de tratamiento es a reducir gordo, dos



cursos están a fortalecer efectos, y Tres cursos ayudar con efecto consolidación y prevenir recaída.)

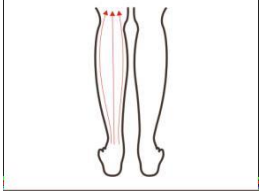



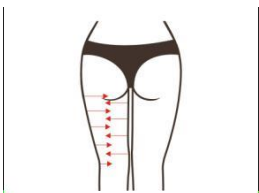
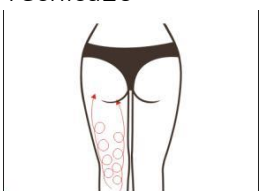


Cadera Formación: 45 min una vez una semana

<p>40K Hora: 15 minutos Energía nivel: 3-7 Modo: A (predeterminado)</p> <p>Vacío y RF Hora: 15 minutos Energía nivel: 3-7 Modo: A (predeterminado)</p> <p>Tiempo de succión: no cero, más extenso que liberar hora Tiempo de liberación: más corto que tiempo de succión. Cuando es cero, la pieza de mano es en constante Estado de succión. Ajustar la succión tiempo basado en individual aguante.</p>	<p>Masaje Crema (Esencial Aceite)+MS-76D1MAX</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masaje técnicas 2. De pie a un lado, frote aceite en la piel moviendo ambas manos en sentido horario y antihorario respectivamente de la región sacra en las caderas, 3 veces (esto es calmante técnica.) 3. Solicitar empujando técnica sobre la región sacra con dos pulgares, 3 veces. 4. Calmar el tratamiento área para 3 veces y luego aplicar digital técnica de prensado en el siguientes puntos: BL-23, Baliao puntos (BL31-34), Du-1, Gb-30, BL-36, 3 veces. 5. Calmar el tratamiento zona, 3 veces. 6. Orden izquierda-derecha, aplicar empujando técnica desde la parte superior del muslo a lo largo de los cuatro meridianos - Meridiano de vejiga (BL) - Riñón Meridiano (KI) - Hígado Meridiano (LV) - Meridiano de vesícula biliar (GB) a Meridiano BV respectivamente con ambas cosas las manos, 3 veces cada uno. 7. Aplique alternativamente empujando técnica con ambas manos a lo largo Meridiano de vejiga (BL) - Riñón Meridiano (KI) - Hígado Meridiano (LV) - Vesícula biliar Meridiano (GB) de la parte superior del muslo a Meridiano BV respectivamente, 3 veces cada. 8. Superposición ambas cosas palmas y después aplicar la técnica de empuje desde la parte superior del muslo a Meridiano BV (levantamiento), 3 a 5 veces. 	<p>Técnica 2,5,11</p>  <p>Técnica 3</p>  <p>Técnica 4</p>  <p>Técnica 6,14,17</p>  <p>Técnica 7,10</p>  <p>Técnica 9,15,18</p>  <p>Técnica 16</p> 
--	--	---	--


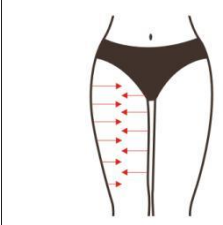
		<p>9. Solicitar emprendedor técnica deambos lados de las caderas hasta la parte superior de caderas (modelando) de ida y vuelta, 3 veces.</p> <p>10. Técnica de repetición 7</p> <p>11. Calmar la tratamiento zona.</p> <p>12. Repita las técnicas anteriores sobre el otro lado.</p>	
--	--	---	--

		<p>13. Él final</p> <p>14. Operación 40K: levante desde el parte superior del muslo a la línea Meridian BV por línea, 3 veces.</p> <p>15. Levante hacia arriba desde ambos ladosde las nalgas al mas alto punto del nalgas 3 veces.</p> <p>16. Muévase en pequeños círculos sobre la cadera,3-5 veces</p> <p>17. Levante desde la parte superior del muslo hasta Meridiano BV línea por línea 3 veces.</p> <p>18. Levante hacia arriba desde ambos ladosde las nalgas al mas alto punto del nalgas, 3 veces.</p> <p>19. Haz lo mismo con el otro lado.</p> <p>20. Operación de vacío y RF: la Lo mismo con las técnicas de 40K.</p> <p>21. Limpie las caderas con una toalla tibia,2 minutos</p> <p>22. Él fin.</p>	
<p>Tratamiento sugerencias</p> <p>Un curso de tratamiento consta de 10 sesiones de tratamiento. Después de un tratamiento, los glúteos experimente las sensaciones de ser calentado y levantado. Después de un ciclo de tratamiento, las nalgas comienza a mostrar líneas curvas obvias, el exceso de grasa comienza a desaparecer lentamente y la piel parece ser ajustado. Después 3 cursos, la condiciones de frío cuerpo y útero, otro ginecológico problemas semejante como irregular menstruación están aliviado, cuales puede ayudar consolidar la efectoa yegua hembras más atractivo.</p>			
<p>Modelado de piernas: 80 minutos una vez a semana</p>			

<p>40K Hora: 30 minutos Energía nivel: 3-7 Modo: A (predeterminado)</p> <p>Vacío y RF Hora: 30 minutos Energía nivel: 3-7 Modo: A (predeterminado) Tiempo de succión: no cerro, más extenso que liberación</p>	<p>Masaje Crema (Esencial Aceite)+Gel+MS - 76D1MAX</p>	<ol style="list-style-type: none"> Masaje técnicas El cliente se acuesta boca abajo, parte posterior de la pierna, izquierda-derecha orden: frote aceite en la piel desde pantorrilla al muslo y luego retrocedera tacón, 3 veces Alternar los talones de ambos palmas para empujar toda la pierna hacia arriba y moverse espalda a tacón,3 veces Mover las manos hacia arriba para empujar cuatro meridianos principales: Vejiga Meridiano (BL) - Riñón Meridiano (KI) - Hígado Meridiano (LV) - Vesícula biliar Meridiano (GB) con pulgares e índices jugando Empujar poplíteo fosa con ambas cosas 	<p>Técnica 2,3,4,5,7, 8,9</p>  <p>Técnica 6</p>  <p>Técnica 12,14,20</p>
---	--	--	--

<p>hora Tiempo de liberación: más corto que tiempo de succión. Cuando es cero, la pieza de mano esen constante Estado de succión. Ajustar la succión tiempo basado en individual aguante.</p>		<p>las manos alternativamente, 3 veces. 6. Moverse ambas cosas las manos hacia arriba alternativamente en forma ondulante movimiento, 3 veces. 7. Calmar la zona, 3 veces 8. Empuje cuatro meridianos principales hacia arriba con los dedos doblados deambas cosas las manos, 3 veces. 9. Calmar la zona, 3 veces 10. Repita la operación en el otro lado. 11. Él final 12. Operación 40K: empujar la vejigaMeridiano (BL) - Riñón Meridiano (KI) - Hígado Meridiano (LV) - Meridiano de vesícula biliar (GB) hacia arriba a la fosa poplítea respectivamente, 3 veces. 13. Muévase en pequeños círculos en la pantorrilla a disolver gordo, 3 veces 14. Mueva el mango hacia arriba para fosa poplítea y calmar el zona de tratamiento con la mano, 3 veces. 15. Empuje 4 meridianos desde poplíteo fosa a la parte superior de hermético respectivamente, 3 veces. 16. Muévete en pequeños círculos desde fosa poplítea hasta la parte superior de hermético a disolver gordo, 3 veces. 17. Empuje los meridianos de poplíteo fosa a la parte superior de hermético, 3 veces 18. Mueva el mango en pequeño círculos en el muslo para disolver la grasa, 3-5 veces 19. Repita las técnicas anteriores sobre el otro pierna. 20. Operación de vacío y RF:</p>	 <p>Técnica13,21</p>  <p>Técnica15,17,23</p>  <p>Técnica16,18,24</p>  <p>Técnica25</p>  <p>Técnica26</p>  <p>Técnica29,30,35,38,40</p>  <p>Técnica34,37,43</p> 
--	--	--	--

		<p>elevación de tacón a poplíteo fosa lineal por línea con una mano y la taza, 3 veces</p> <p>21. Mueva la taza en pequeños círculos en becerro, 3 veces</p> <p>22. Mueva la copa en la pantorrilla de arriba a abajo de ida y vuelta, 3-5 veces.</p> <p>23. Elevación desde la fosa poplíteo hasta la parte superior de muslo, 3 veces.</p> <p>24. Mover taza en pequeña círculos en hermético, 3 veces.</p>	
--	--	---	--

		<p>25. Levante desde dos lados de la pierna hacia el medio, 3 veces.</p> <p>26. Levante hacia arriba desde dos lados del muslo en un movimiento anular.</p> <p>27. Haz lo mismo con el otro lado.</p> <p>28. Masajee la parte delantera de las piernas: frota aceite en la piel desde los pies hasta la raíz del muslo (calmar el tratamiento área), 3 veces.</p> <p>29. Empuje cuatro meridianos: Vejiga Meridiano (BL) - Riñón Meridiano (KI) - Hígado Meridiano (LV) - Meridiano de vesícula biliar (GB) a la parte superior del muslo con el pulgar y dedo índice jugando.</p> <p>30. Empuje cuatro meridianos con doblando los dedos de ambas manos, 3 veces.</p> <p>31. Élfinal.</p> <p>32. Haz lo mismo con el otro lado.</p> <p>33. Operación 40K: levante la mano hacia la rodilla desde la pantorrilla mientras trazando 4 meridianos, 3 veces (inicié del muslo si no hay suficiente grasa no deseada sobre el becerro.)</p> <p>34. Mueva el mango en dos lados de la pantorrilla en un movimiento anular, 3 veces (empezar desde el muslo si no hay suficiente grasa no deseada en el becerro.)</p> <p>35. Levante el mango desde la rodilla hasta la parte superior del muslo línea por línea, 3 veces.</p> <p>36. Mueva el mango en pequeños círculos en el muslo, 3 veces.</p> <p>37. Levante el mango desde la rodilla hasta la parte superior del muslo en un movimiento anular, 3 veces.</p> <p>38. Levante el mango desde la</p>	<p>Técnica 36,41</p>  <p>Técnica 42</p> 
--	--	---	--

		<p>rodilla hasta la parte superior del muslo línea por línea, 3 veces.</p> <p>39. Operación de vacío y RF: elevación la pieza de mano hacia la rodilla de la pantorrilla mientras traza 4 meridianos, 3 veces (empezar desde muslo si no hay suficiente grasa no deseada en la pantorrilla.)</p> <p>40. Levantar de rodilla a la parte superior de muslo, 3 veces</p>	
--	--	---	--

		<p>41. Muévase en pequeños círculos enhermético, 3 veces.</p> <p>42. Levante desde dos lados de los muslos la media, 3-5 veces.</p> <p>43. Levante hacia arriba en dos lados dehermético en anular movimiento.</p> <p>44. Haz lo mismo con el otro hermético.</p> <p>45. Él fin.</p>	
--	--	--	--

Tratamiento Sugerencias

Un curso de tratamiento consta de diez sesiones de tratamiento. Después de un tratamiento, la pierna estará relajada, y la circulación se acelerará. Después de un curso de tratamiento, la pierna se volverá delgada, habrá una contracción del colágeno de la piel debido al efecto del calor, y el efecto tensor puede obviamente sentirse en la piel. Después de 2 ciclos de tratamiento, habrá resultados evidentes con la delgadez y firmeza de piernas promovidas. 3 los cursos serán ayudar a consolidar los efectos.