

# Domo Fototerapia Square Vapor



## Precauciones de seguridad



**Nota:** Lea el manual de instrucciones antes de usar y utilícelo.

El manual del usuario contiene no solo las instrucciones para el uso del dispositivo, sino también las precauciones de seguridad, almacenamiento e información sobre la garantía del producto. Por seguridad, confirme toda la siguiente información de seguridad e instrucciones de puesta en marcha antes utilizando este dispositivo. No seremos responsables de lesiones personales y pérdidas materiales. causados por el incumplimiento del artículo anterior.

## Precauciones generales

Antes de utilizar el instrumento, se debe inspeccionar el cuerpo y el módulo LED que se utilizará.

El dispositivo debe colocarse en una habitación bien ventilada para evitar lugares con altas temperaturas, mucha humedad y luz directa.

- Temperatura recomendada durante el arranque: 0-26 C
- Temperatura recomendada para el almacenamiento: 0-35 C
- Humedad relativa: por debajo del

80% Colóquelo en una habitación bien ventilada lejos de la luz directa.

Instale en un lugar plano mientras mantiene el nivel.

El Instrumento también puede causar daños significativos bajo un impacto débil, así que no aplique impacto externo y asegúrese de moverse lentamente durante la manipulación.

## Precauciones para riesgos de energía

Cuando se enciende el dispositivo, está prohibido usarlo junto con otros productos de transferencia de calor: tenga cuidado de que no entre agua en el instrumento. La corriente de alto voltaje formada por la humedad puede provocar un incendio o una descarga

eléctrica. Por favor, no utilice enchufes rotos o enchufes sueltos.

Desenchufe el enchufe de alimentación cuando no se utilice durante mucho tiempo y guárdelo después de la limpieza.

De lo contrario, podría provocar descargas eléctricas, fugas eléctricas e incendios.

Desenchufe la fuente de alimentación a tiempo cuando el producto esté en el agua o tenga un sonido anormal.

Sabor chamuscado, cigarrillos y otros equipos.

### asuntos tabú

Incluso si no pertenece a las siguientes precauciones, no lo use si así lo indica el operador.

- Pacientes con enfermedades cardíacas, enfermedades mentales e hipertensión
- Cuando padezcan enfermedades de la piel (infecciosas)
- Cuando hay enfermedades inflamatorias de la piel similares.

### asuntos prescritos

El usuario debe utilizar el dispositivo después de familiarizarse con el manual del usuario.

El uso de decoraciones no aprobadas puede provocar fallas en el equipo, y el daño resultante no se proporcionará sin cargo.

No desmonte ni modifique el equipo de mantenimiento sin autorización.

Los problemas causados por el desmontaje/repelación no autorizados no serán compensados.

# Composición del producto



## Configuración del producto

1. Antes de la instalación, la posición y el espacio del dispositivo se considerarán e instalarán a una distancia del dispositivo de calefacción y otros dispositivos médicos.
2. Evite la luz directa y la humedad alta, e instálelo en un lugar con buena ventilación y temperatura y humedad adecuadas.



Empuje el panel lateral en el gancho para la conexión




Conecte el segundo panel lateral

## Instalar

- 1). Abra el paquete, saque suavemente el cuerpo principal del instrumento, alinee las bases en ambos lados del instrumento con el cuerpo principal del instrumento según el método de la bayoneta, móntelo y colóquelo en un plano estable.
  - 2). Saque la fuente de alimentación del adaptador, inserte el terminal de CC en el conector de CC del instrumento y asegúrese de que la conexión terminal es estable. 3).
- Inserte el enchufe de CA del adaptador de corriente en la toma de corriente. En este momento, la alimentación está conectada, el instrumento responderá con un sonido "Ding" y el instrumento entrará en estado de espera.
- 4). Cuando la máquina no está encendida, el texto de visualización de la hora en el panel local es invisible.

## método de uso

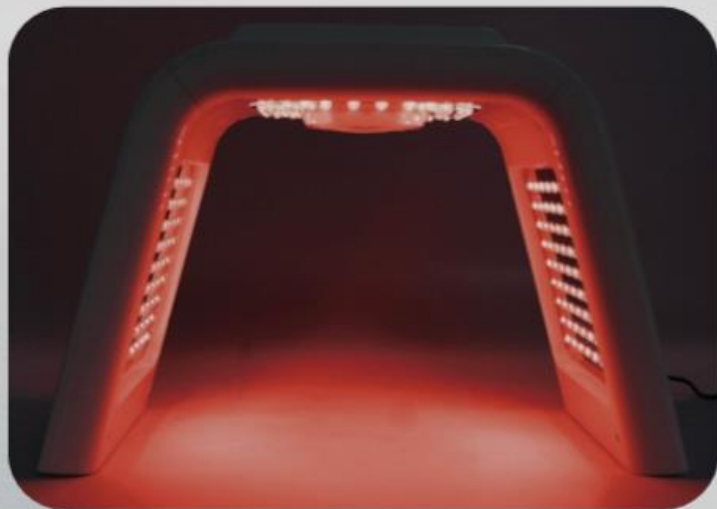

### Irradiación espectral

Se recomienda 30-45min/hora (se puede ajustar según diferentes condiciones personales).

1-2 veces al día, no más de 60 minutos cada vez,

Con el diseño plegable, se pueden irradiar diferentes partes según las necesidades, y se pueden usar de manera flexible varias posiciones del cuerpo, como acostarse boca arriba, acostarse de lado, sentarse y acostarse boca abajo. Se pueden irradiar todas las partes de la cabeza a los pies, lo que resuelve el problema de la portabilidad de equipos grandes.



#### Pulverización fina ultrasónica:

El spray de nanounidades es generado por ondas ultrasónicas. Pequeñas partículas de agua penetran en la piel profunda, y la velocidad de reposición y absorción del agua es más rápida. Se recomienda utilizar productos diluidos o agua purificada. Queda terminantemente prohibido utilizar otras aguas o esencias cosméticas de alta concentración para mezclar; Usar con máscara facial para un mejor efecto.

## Descripción clave



(Tecla de encendido/apagado)/(Tecla de ciclo automático);

1) Después de encender, ingrese al "modo de espera"; presione este botón para ingresar al "modo de encendido", la luz indicadora está encendida y se muestra el tiempo predeterminado de 30 minutos; Pulse de nuevo para salir del estado de encendido y volver al modo de espera.

2) Mantenga presionado este botón (2-3 segundos) y el zumbador responderá una vez, y el instrumento ingresará al modo de ciclo de rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y púrpura.

Nota:

1). Cuando la función de luz de ciclo está encendida, la placa de luz de función cambia de luz roja, luz naranja, luz amarilla, luz verde, luz cian, luz azul, luz

púrpura:

2). Función de luz de ciclo y luz roja/luz naranja/ Luz amarilla/luz verde/luz azul/función de luz púrpura no se puede encender al mismo tiempo.

3). Cuando se selecciona luz de ciclo, el brillo cambiará en el engranaje 05, y el engranaje del brillo de la luz del ciclo no puede ser ajustado




**R** Botón de luz roja: (longitud de onda 647-760nm)

La función de luz roja tiene cinco niveles de intensidad que se pueden ajustar, el más débil en 01 y el más fuerte en 05. Presione este botón para ingresar al modo de función de luz roja del engranaje 01. La pantalla muestra 01. Si continúa presionando este tecla, puede alternar para seleccionar 01/02/03/04/05



**B** Botón de luz azul: (longitud de onda 430-455nm)

La función de luz azul tiene cinco niveles de intensidad que se pueden ajustar, el más débil en 01 y el más fuerte en 05. Presione este botón para ingresar al modo de función de luz azul del engranaje 01. La pantalla muestra 01. Si continúa presionando esta tecla, puede alternar para seleccionar 01/02/03/04/ 05.

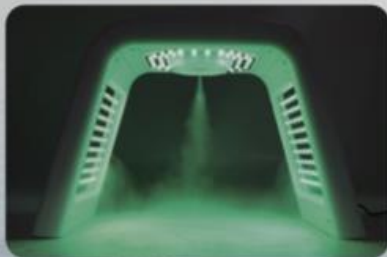


**G** Botón de luz verde: (longitud de onda 492-550nm)

La función de luz verde tiene cinco niveles de intensidad que se pueden ajustar, el más débil en el nivel 01 y el más fuerte en el nivel 05. Presione este botón para ingresar al modo de función de luz verde del engranaje 01. La pantalla muestra 01, si continúa presione esta tecla, puede alternar para seleccionar 01/02/03/04/05.



**O** Botón de luz naranja: (longitud de onda 588-647nm)

La función de luz naranja tiene cinco niveles de intensidad que se pueden ajustar, el más débil en 01 y el más fuerte en 05. Presione este botón para ingresar al modo de función de luz naranja del engranaje 01. La pantalla muestra 01. Si continúa presionando este , puede alternar para seleccionar 01/02/03/04/06.

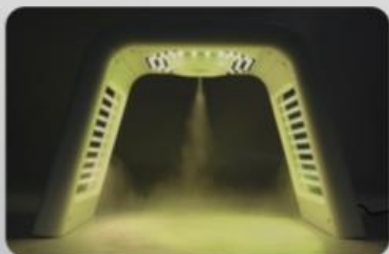

**Y** Botón de luz amarilla: (longitud de onda 550-580nm)

La función de luz amarilla tiene cinco niveles de intensidad que se pueden ajustar, el más débil en el nivel 01 y el más fuerte en el nivel 05. Presione este botón para ingresar al modo de función de luz amarilla del engranaje 01. La pantalla muestra 01. Si continúa presione esta tecla, puede alternar para seleccionar 01/02/03/04/05.



**P** Botón de luz púrpura: (longitud de onda 360-430nm)

La función de luz púrpura tiene cinco niveles de intensidad que se pueden ajustar, el más débil en el nivel 01 y el más fuerte en el nivel 05. Presione este botón para ingresar al modo de función de luz púrpura del engranaje 01. La pantalla muestra 01. Si desea continuapresione esta tecla, puede alternar para seleccionar 01/02/03/04/05.

 Botón de pulverización:

Esta función tiene cinco engranajes y la fuerza se puede ajustar. Se puede utilizar solo o mezclado. Presione esta tecla para ingresar al modo de función de rociado de 1ra marcha. La pantalla muestra 01. Si continúa presionando esta tecla, puede seleccionar 01/02/03/04/05/00. Cuando la pantalla muestra 00, significa que la función está desactivada.

 Tecla de tiempo "+":

El tiempo de inicio predeterminado es de 30 minutos. Después de seleccionar el modo de iluminación, presione este botón, el tiempo aumentará en 5 minutos y el tiempo se puede aumentar continuamente, hasta 60 minutos; Si continúa presionando esta tecla, pasará a 00 minutos de tiempo de trabajo. El rango de ajuste de tiempo es de 00 a 60 minutos. Si no hay una operación clave, el instrumento saldrá automáticamente del estado de configuración después de 3 segundos y comenzará a trabajar en el tiempo de trabajo establecido actualmente.

 Hora "-" tecla:

El tiempo de inicio predeterminado es de 30 minutos. Después de seleccionar el modo de iluminación, presione este botón y el tiempo disminuirá en 5 minutos, lo que puede reducir continuamente el tiempo, con un mínimo de 00 minutos; Si continúa presionando este botón, pasará a 60 minutos de tiempo de trabajo. El rango de ajuste de tiempo es de 00 a 60 minutos. Si no hay una operación clave, el instrumento saldrá automáticamente del estado de configuración después de 3 segundos y comenzará a trabajar en el tiempo de trabajo establecido actualmente.

## Precauciones durante el uso

- 1) Está prohibido mirar directamente a cualquier tipo de luz emitida por la máquina. Al irradiar la cara, se recomienda usar anteojos de sol o anteojos protectores contra la luz. 21 Los pacientes con piel alérgica deben realizar cuidadosamente una prueba a pequeña escala en la posición oculta de la piel, y solo se puede usar en un área grande sin alergia.
- 3) Si no se siente bien después de usar este producto, debe dejar de usarlo inmediatamente para recuperarse. Cuando lo vuelva a usar, debe seguir el principio de irradiación de frecuencia múltiple y de corta duración, y luego usarlo normalmente hasta que su cuerpo se adapte gradualmente.
- 4) La máquina debe colocarse en un lugar fresco, seco y ventilado donde los niños no puedan tocarla fácilmente. . Está prohibido colocarlo en el ambiente de luz solar directa, humedad, alta temperatura, ácido fuerte, álcali fuerte, oxidante fuerte y polvo fuerte.
- 5) No vierta agua sobre el instrumento: No use las manos con agua para operar la máquina.
- 6) Mantenga cierta distancia de otros aparatos eléctricos y manténgase alejado de fuertes interferencias magnéticas e inflamables, y explosivos (gasolina, diesel, fuegos artificiales, etc.).
- 7) Cuando limpie la máquina, límpiela suavemente con una toalla húmeda y seca. No utilice reactivos químicos ácidos y alcalinos fuertes. El hueco o la posición del escalón se pueden limpiar con un cepillo suave.
- 8) está prohibido chocar, forcejear, arrojar o abofetear la máquina. Está prohibido colocar cualquier objeto sobre el instrumento (incluidos, entre otros, limitado a teléfono móvil, tarjeta bancaria/tarjeta de acceso y otras tarjetas magnéticas). 9) Está prohibido insertar objetos conductores como tornillos y cables en la máquina para evitar quemaduras, cortocircuitos, incendios y descargas eléctricas.
- 107 Los menores y las personas sin capacidad de actividad/percepción/expresión autónoma deben utilizar la máquina con el cuidado y la ayuda de personas con funcionamiento normal y capacidad de percepción, o seguir el consejo del médico.
- 111 está prohibido utilizar accesorios no oficiales, alquilar y desmontar la máquina. Lo anterior no está dentro del alcance de la garantía:

## Especificaciones del producto

# Domo Fotodinámico con Vapor Square

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Fuente de alimentación | CC 12V 2A 50HZ/60HZ |
| Poder                  | Acerca de 24W       |
| Tamaño del producto    | 455x220x315 (mm)    |
| Peso del Producto      | 1,9 kg 10%          |

## Manejo de mantenimiento

1. Limpie el controlador o el cuerpo con una toalla suave.
2. Cuando almacene el producto durante mucho tiempo, corte la fuente de alimentación y evite el almacenamiento en un lugar con mucha humedad.
3. Guarde el soporte plegable cuando guarde el producto y guárdelo después de guardarlo.

### Nota:

Durante el mantenimiento y la gestión, el usuario debe cortar la alimentación del instrumento y separar el cable de alimentación. Cuando se enciende la alimentación, la limpieza o el almacenamiento conducirán a la causa de un equipo anormal.



estado expandido



estado de foking

## Elementos a confirmar antes de la aplicación de fallas

| Parche Estimar el motivo |                                | Confirm Items  |
|--------------------------|--------------------------------|--|
| Abnormal of power supply | Adapter connector poor contact | Confirm power ON/OFF state;<br>Verify that the adapter is connected  |
| Device start abnormal    | LED light doesn't work         | In the case of power shutdown,replace the corresponding LED disk/surface;<br>(Contact purchasing agent/service center to change the light) |
|                          | The actuator is abnormal       | Contact purchasing agent/service center  |

Garantizar

### garantía gratis

- 1). Cualquier falla que ocurra bajo uso normal dentro de un año después de comprar el producto puede recibir servicio gratuito.
- 2). La garantía gratuita solo se aplica al cuerpo del dispositivo.

### Cuestiones excluidas de la garantía dentro del período de garantía gratuito

Si no sigue los pasos de inicio del dispositivo y los asuntos de seguridad y administración indicados en este manual, no puede disfrutar del servicio gratuito. Por favor, preste atención a los siguientes asuntos:

- 1). Cuando el dispositivo se mueve y se daña tirando del adaptador, queda excluido del período de garantía gratuito.
- 2). Si el usuario utiliza el equipo o lo transforma para otros fines, quedará excluido de la garantía gratuita período en que se desmonta.