

# HIFU 2D CON NANO RF FRACCIONANDA



MANUAL DE USUARIO

Instrucción y parámetro del producto .....	1
Icono de la interfaz del sistema.....	.2
Página de control de ojos .....	.3
Página de control de .....	4
Página de control antienviejecimiento (2D). .....	la
cara .5 Explicación del estado del mango .. 6 .....	6
Coincidencia de producto de operación .....	.8
funcionamiento del instrumento.....	.6
Contraindicaciones .....	8
Precauciones.....	.....
Fallo y resolución de problemas.....	9
del instrumento ..	9
Lista de empaque.....	9

## Instrucción y parámetro del producto

Super Thermagic utiliza sondas de alta energía para conducir ondas de radio de alta frecuencia y alta energía y HIFU a las profundidades de la piel. A través del calentamiento tridimensional de los tejidos profundos de la piel, puede estimular el colágeno y las fibras de la piel, reconstruir los andamios de colágeno y tensar la piel inmediatamente, continuar estimulando la regeneración del colágeno y mantener el efecto lifting a largo plazo. Puede mejorar la flacidez de la piel, las arrugas, la tez apagada y otros problemas, y mantener el rostro más joven.



Nombre del producto: HIFU 2D CON NANO RF RED

Potencia nominal: 180W

Modelo del producto: h-007

Tubería de alimentación: enchufar

Tensión nominal: 100-240V


Frecuencia nominal: 50/60 Hz

Tamaño del producto: 31,5x27x16cm

Estándar ejecutivo:


GB/T 36419-2018 (dispositivos de belleza de la piel para el hogar y similares)

GB 4706.1-2005 (seguridad de electrodomésticos y aparatos eléctricos similares Parte 1: Requisitos generales) GB 4706.15-2008 (seguridad de electrodomésticos y aparatos eléctricos similares -- Requisitos particulares para aparatos para el cuidado de la piel y el cabello)

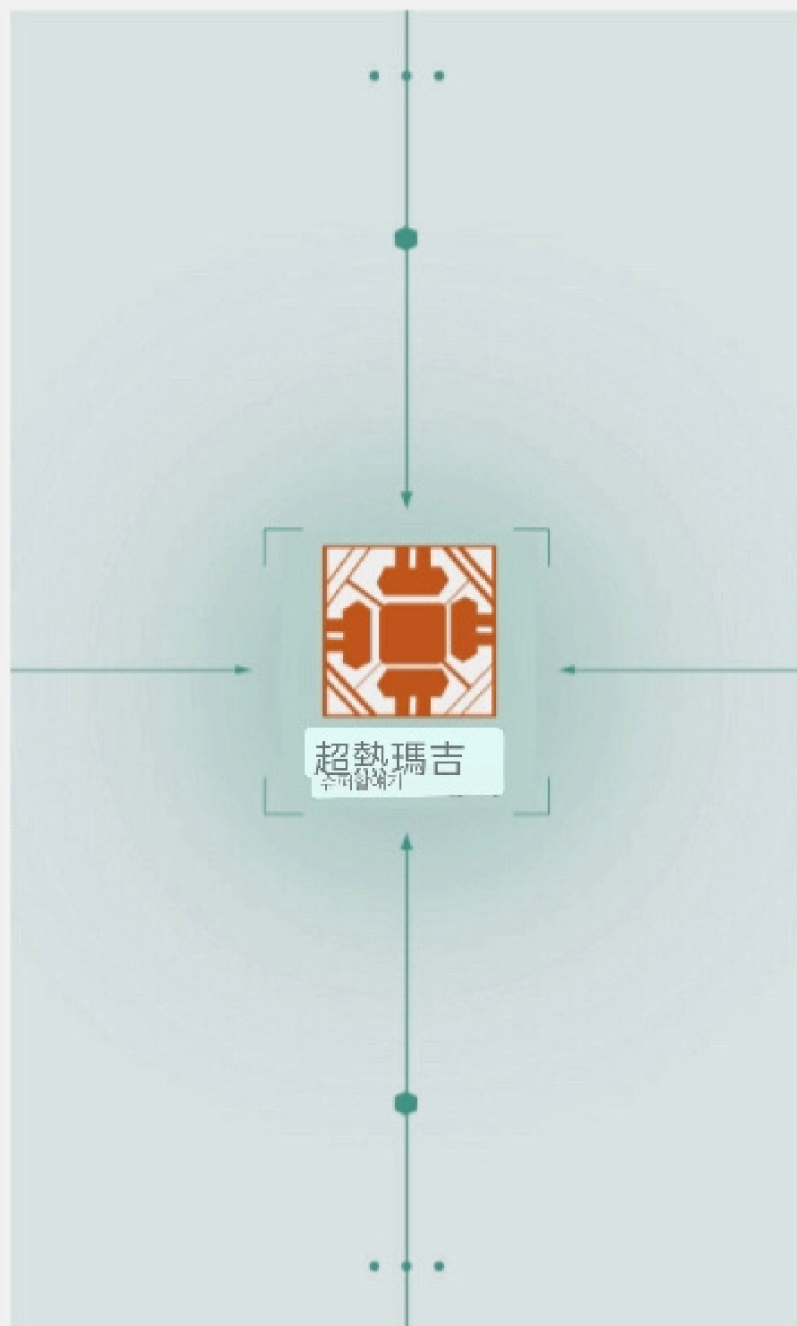

(▲ página de espera)


Coloque el cable de alimentación, luego presione para controlar la página, luego seleccione la interfaz de operación correspondiente de acuerdo con el cabezal de operación que necesita usar.

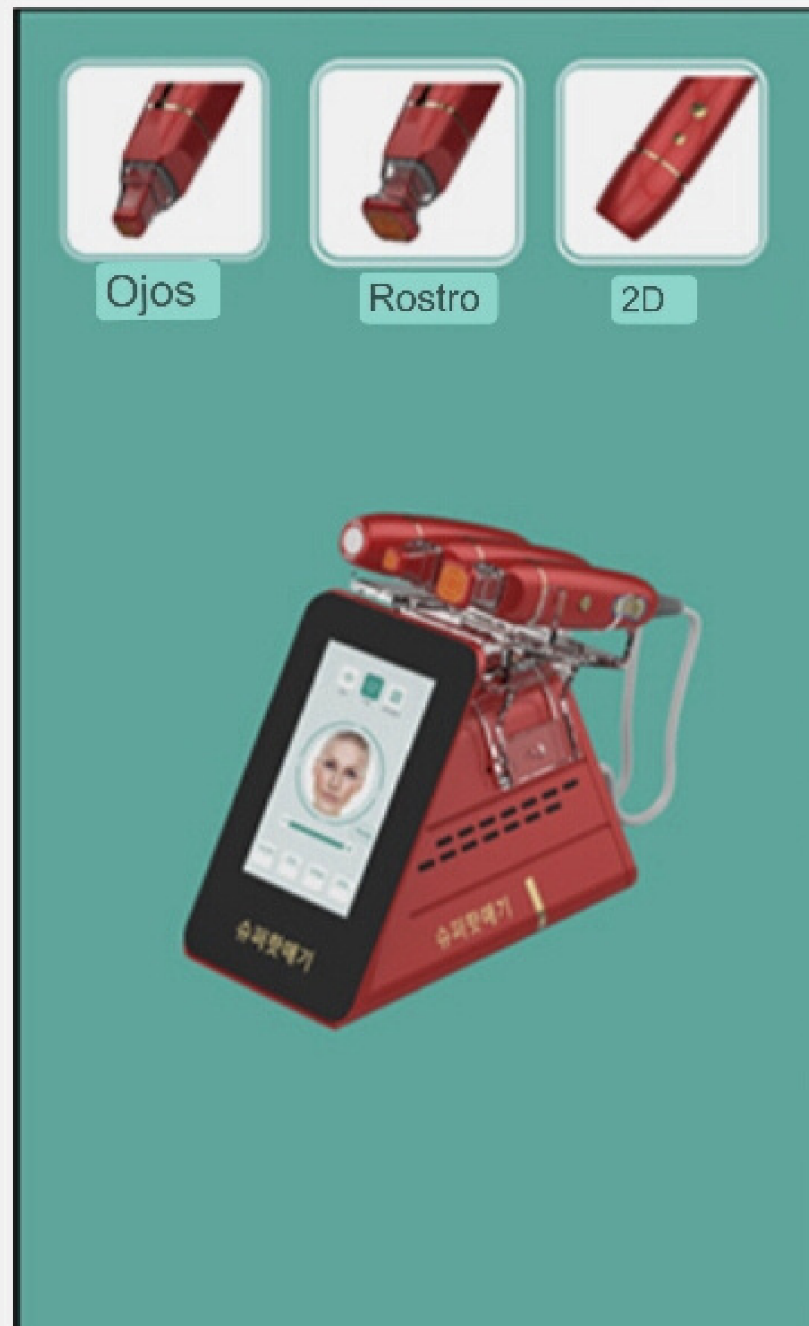

(Página de selección de funciones)



página de control de ojos,

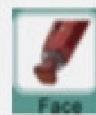

página de control de rostros,




antionvejecimiento es para la página de control de HIFU.





(Página de control de Aeyes)

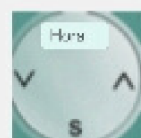

1. Vibración, luego presione para   a ajustar la intensidad de la vibración.



2. Tiempo de salida de energía y   luego para ajustar el tiempo de salida de energía. Nota: cuanto mayor sea el tiempo de salida de energía, más fuerte será la energía recibida por la piel. Si la energía es fuerte, la temperatura será más alta. Ajuste de acuerdo con la temperatura a la que se adapte su piel, de lo contrario, se pueden producir daños en la piel. Se recomienda que 2 segundos sea lo mejor para la primera operación.



3. Salida de intensidad de energía, y luego a   adjust la intensidad de energía salida.

**Nota:** Al comienzo de la operación, se recomienda comenzar con la temperatura más baja, y luego ajustarla lentamente hasta seleccionar la intensidad de energía más adecuada para su piel.



4. Esta función no se puede manipular. Su importancia es que el operador sepa el número de rondas en esa operación



5. LISTO, después de configurar la vibración, el tiempo de salida de energía y la intensidad de salida de energía, presione Listo, Listo cambia de color y el instrumento ingresa al estado listo, luego coloque el mango en la parte que se va a operar y presione el botón del interruptor del mango para comenzar la operación.

Si necesita reajustar la intensidad de la vibración, la salida de energía, la intensidad de la energía, haga clic ligeramente en listo para liberar el estado listo, puede reajustar cada función.



(Una página de control de rostros).



1. Vibración, luego presione para ajustar la intensidad de la vibración.



2. Tiempo de salida de energía y luego para ajustar el tiempo de salida de energía.



**Nota:** cuanto mayor sea el tiempo de salida de energía, más fuerte será la energía recibida por la piel. Si la energía es fuerte, la temperatura será más alta. Ajuste de acuerdo con la temperatura a la que se adapta su piel, de lo contrario, se pueden producir daños en la piel. Se recomienda que 2 segundos sea lo mejor para la primera operación.



3. Salida de intensidad de energía, y luego para ajustar la intensidad de la energía producción.

**Nota:** Al comienzo de la operación, se recomienda comenzar con la temperatura más baja y luego ajustarla lentamente hasta seleccionar la intensidad de energía más adecuada para su piel.



4. Esta función no se puede manipular. Su importancia es que el operador sepa el número de rondas en esa operación



5. LISTO, después de configurar la vibración, el tiempo de salida de energía y la intensidad de salida de energía, presione Listo, Listo cambia de color y el instrumento ingresa al estado listo. luego coloque el mango en la parte que se va a operar y presione el botón del interruptor del mango para comenzar la operación..

Si necesita reajustar la intensidad de la vibración, la salida de energía, la intensidad de la energía, haga clic ligeramente en listo para liberar el estado listo, puede reajustar cada función.



(2D) página de control



1. Salida de energía EMS y luego presione para ajustar la salida.



20 2.2 Salida de energía, y luego VA para ajustar la salida HIFU.



3. Listo Después de configurar el EMS, salida de intensidad de energía HIFU, presione Listo, el botón listo se vuelve de color oscuro, el instrumento ingresa al estado listo, luego coloque el mango en la parte que se va a operar y presione el botón del interruptor del mango para iniciar la operación. Si necesita reajustar la intensidad de energía ems y la intensidad de energía hifu, toque listo ligeramente para liberar el estado listo y luego puede reajustar cada función.

- 4. Profundidad, el botón de ajuste de profundidad del mango puede ajustar la profundidad de trabajo del instrumento. Se recomienda usar 4.5 para operar dos veces y luego 3.0 para operar dos veces. Solo use la operación 3.0 en áreas de piel delgada como la frente y las sienes.

Nota: la operación HIFU no es adecuada para aquellos que tienen un alambre de oro implantado dentro del ojo cavidad, sitio de la herida, nariz o cara.

## La explicación del estado del identificador

Cuando la luz sobre la parte delantera del mango muestra una luz azul, está en estado de espera y la luz roja está en estado de funcionamiento.

## Coincidencia de productos de operaciones


Gel, gel de aloe vera, esencia, líquido original, crema fina, polvo liofilizado, ampollas, loción (no se puede combinar el funcionamiento del mango Maggie caliente con aceites esenciales)

## Operación del instrumento

Super Thermagic tiene tres manijas de operación. Se recomienda utilizar el thermagic Manejar para operar primero, y luego usar el mango HIFU para operar la cara. Después de la operación, se recomienda aplicar una máscara hidratante durante 10-15 minutos;

### operación termomágica

#### Cuello

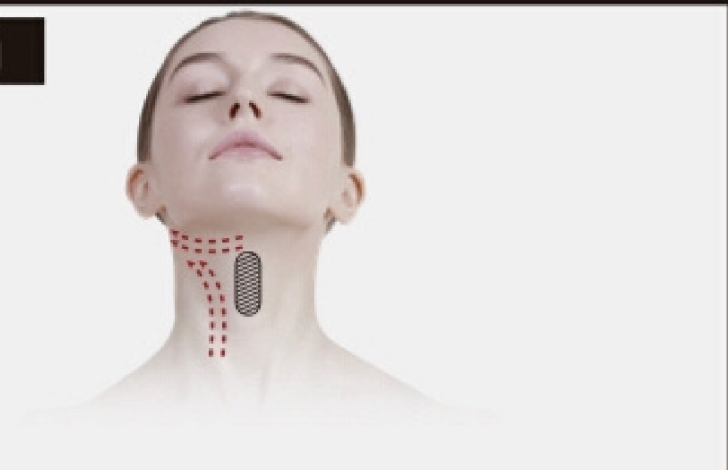

Fije la operación desde debajo de la clavícula hasta la piel. Se recomienda evitar la posición de la nuez de

Adán

#### Rostro

Opere en el cheek en forma de "a". Comience

1) desde la mejilla y divídalo en tres líneas desde el interior hacia el exterior para el punto de alimentación

Operación

Operar desde el jawo inferior hacia el lóbulo de la oreja

Operar desde la comisura de la boca hacia la oreja

Operar de la nariz a la sien

2) Desde las mejillas, divida tres líneas desde el boom hasta la parte superior para el pompon

fin - Opere desde la mandíbula inferior hasta debajo de los pómulos.

Operar desde la mitad de la mandíbula hasta la dirección debajo del cheestone


Operar desde el músculo masetero a la dirección debajo del templo


3) Finalmente, desde la mejilla, se divide en tres líneas desde el paseo hasta el exterior y operado tirando

Operar desde la mandíbula inferior hacia el lóbulo de la oreja.

Operar desde la comisura de la boca hacia la oreja

Operar de la nariz a la sien ;

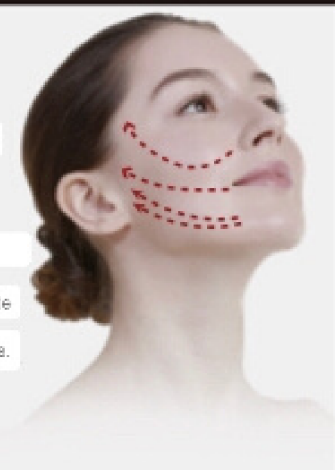

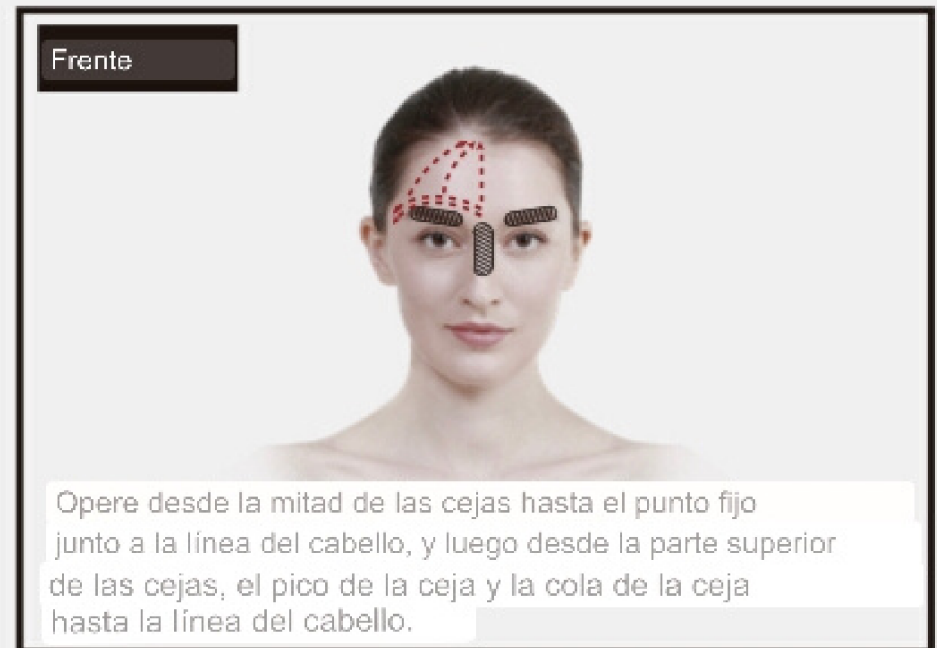

**Nota:**

El cabezal de operación debe estar cerca de la piel durante la operación;  
 Los pómulos, huesos frontales, ojos y otras áreas con menos grasa tienen una sensación de calor evidente. Se recomienda bajar la energía.

**operación 2D**

1. Ajuste la profundidad y el nivel de energía. Al comienzo de la operación, elija una profundidad de 4,5 mm para la operación y use una profundidad de 3,0 para las pasadas tercera y cuarta;

2. Pruebe la intensidad de la energía: primero, tire de la mandíbula inferior derecha hacia la comisura de la boca a una velocidad constante. Si no hay sensación, debe aumentar la energía mecánica de onda/ems. Es normal sentir hormigueo, hormigueo o dolor durante la operación. Es necesario operarlo a la nariz Bajar la energía (ajustar la cantidad de energía según las circunstancias personales), porque la posición con más huesos es más sensible, y la energía recibida será menor (diferentes partes operativas, la cantidad de energía recibido también es diferente, debe ajustar la energía de acuerdo con el tamaño de su propia situación);

3. Piel normal: la primera vez que lo use, se recomienda que la onda mecánica y la energía ems se usen a un nivel bajo, y la onda mecánica y la energía ems

debe ajustarse al rango máximo que el individuo puede soportar de acuerdo con la sensación durante la operación;

4. Piel roja con sangre: para el primer uso, sugerimos que solo encienda la onda mecánica. Después de usar 3-4 veces, puede encender la RF con la onda mecánica al mismo tiempo, la energía de RF comienza desde la intensidad más baja y ajusta la potencia de la onda mecánica de acuerdo con su tolerancia máxima.

5. La cutícula sensible inclina la piel delgada: para el primer uso, se sugiere la potencia más baja de onda mecánica y RF, después de usar 2-3 veces, puede ajustar la energía a su máxima tolerancia de acuerdo con la situación personal de la piel.

6. Durante el tratamiento, es necesario aplicar el medio en el área de tratamiento, el cartucho debe cerrarse a la piel, con velocidad regular y método de levantamiento, el medio debe suministrarse cuando se absorbe o se seca.

7. Por lo general, toma de 30 a 45 minutos para una operación de toda la cara. (El tiempo de funcionamiento cambia según el tamaño de la cara).

## Contraindicaciones

Las personas con los siguientes síntomas deben tener cuidado al usar este instrumento.

Por favor, consulte a un médico o profesional antes de usarlo. Los detalles son los siguientes: 1. Si la parte operativa tiene una prótesis, se recomienda evitar esta área cuando se opere el instrumento;

2. No se recomienda para mujeres durante el período menstrual;

3. Si hay inyección de ácido hialurónico o colágeno en el área de operación en los últimos seis meses, por favor háganoslo

saber; 4. No se recomienda operar con una cardiopatía grave y un ritmo cardíaco regulador;

5. Evite lugares como heridas o acné purulento durante la operación;

6. No se recomienda su uso durante la inflamación de la piel o alergia en la piel;
7. Aunque no se ha demostrado que el dispositivo sea dañino para las mujeres embarazadas, no se recomienda para mujeres embarazadas;
8. El instrumento no se puede operar en los ojos, fosas nasales, oídos, boca, párpados superiores, nariz de Adán, etc.;

## Nota

1. No se lave la cara con agua caliente dentro de los tres días (puede lavarse la cara con agua tibia o fría);
2. No se sumerja en aguas termales ni entre o salga de lugares calientes dentro de los tres días;
3. Fortalecer la hidratación y protección solar de las partes operativas; 4. Se recomienda aplicar una mascarilla hidratante todos los días dentro de los tres días de uso; 3. Coma alimentos menos picantes dentro de los tres días, no se recomienda fumar, beber, quedarse despierto hasta tarde;

## Solución de problemas

Culpa	Solución de problemas
El instrumento no responde después de enchufar la alimentación	Primero verifique si la regleta está encendida y reemplace la regleta o el enchufe. Verifique si el cable de alimentación y el conector de alimentación están sueltos. Verifique si la fuente de alimentación y la interfaz del instrumento están sueltos.
A veces el instrumento no puede hacer clic después de comenzar a trabajar	Apaque la alimentación y vuelva a encenderla. Manténgase alejado de la computadora y teléfono móvil durante el funcionamiento del instrumento. Thermagic es un producto de tecnología de alta frecuencia. El campo magnético del aparato eléctrico interferirá con el instrumento.

## Mantenimiento

1. El instrumento debe usar un enchufe de tres puntas con un pin de conexión a tierra y asegurarse de que la toma de corriente del instrumento esté bien conectada a tierra; 2.

Asegúrese de que la fuente de alimentación sea estable y adaptable. Si el voltaje de la fuente de alimentación local es inestable, se recomienda que el usuario agregue una fuente de alimentación regulada con la potencia correspondiente;

3. El instrumento no debe colocarse en un lugar húmedo o cerca de una fuente de agua, y el instrumento no debe exponerse directamente a la luz solar; 4.

Mantenga el instrumento alejado de pirógenos fuertes o fuentes de radiación fuertes (gabinetes de desinfección, cocinas de inducción, hornos de microondas, etc.), que afectarán el uso normal del instrumento;

5. El instrumento debe utilizar los accesorios originales calificados proporcionados por el fabricante;

6. Después de cada operación, el mango de operación debe limpiarse y desinfectarse y mantenerse adecuadamente;

7. Cuando el instrumento no esté en uso, apague la alimentación, desconecte el instrumento y coloque varios accesorios del instrumento.

## Lista de empaque

Anfitrión*1	Línea de alimentación * 1	Mango * 3
manual de instrucciones * 1	etiqueta de garantía	