

# **DOMO FOTODINAMICO**


## **MANUAL DE USO**



## Principio

El instrumento de belleza espectrómetro, apariencia exquisita, diseño único, selección de mecha LED, profundidad precisa de la fuente de luz, a través de la irradiación de la fuente de luz de diferentes colores, puede tener un efecto diferente en el cuidado y tratamiento de la piel, en comparación con el instrumento de belleza LED común que tiene diferentes grados, La tecnología de belleza más nueva de Corea del Sur de un tipo de luminiscencia activa biológica, sin fiebre alta, aplicación de luz pura de baja energía y tecnología de modulación de luz única para el cuidado y tratamiento de la piel, tiene un efecto natural suave, significativo, de bajo riesgo, sin efectos secundarios, y otras características, es un especialista en cuidado de la piel, aplicable a todo tipo de piel.

## Estructura

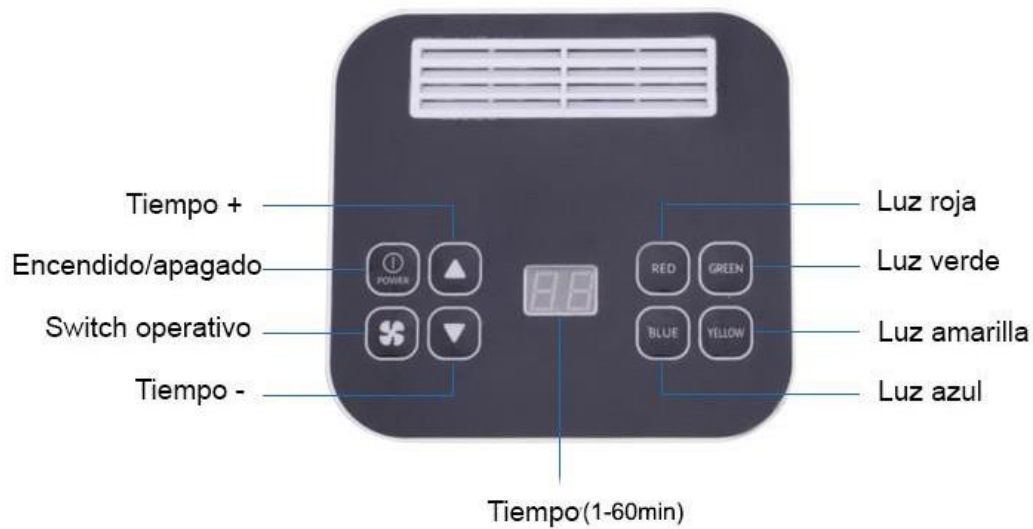

## Accesorios



Adapter



Goggle



Screw

## Function

- Previene las espinillas
- Repara la piel dañada
- Reducir el poro
- Piel blanqueadora y tierna
- Regenerar células
- Arrugas suaves
- Piel tranquila

## Ventajas

- Diseño de protección para los ojos.
- Operación fácil.
- No invasivo, no daña la piel.
- Apto para cualquier tipo de piel.
- Desmontable y ahorra espacio.
- Siete tipos de colores.

## Aplicacion

1. Repare y cuide la piel dañada.
2. Mejora los síntomas como el envejecimiento y la piel suelta, los poros grandes y las arrugas

delgadas.

3. Mejorar la lesión pigmentada, como pecas, quemaduras solares, placas seniles.

4. Mejora la tez oscura eterno causada por el mal metabolismo o la mala circulación.

5. Haga tratamiento de detumescencia, disminución de la inflamación y eliminación de cicatrices para el acné de aceite de manera efectiva.

## Pasos de instalacion



**Nota: conecte el cable y escóndelo en el orificio durante la instalación.**

## Como usar

1. Limpie su rostro antes del tratamiento.

2. Use gafas protectoras, es imprescindible.

Si desea que la piel absorba más productos para el cuidado de la piel al mismo tiempo, puede aplicar una mascarilla, pero no es obligatorio.

3. Presione el botón de encendido para iniciar la máquina.

4. Presione el botón de salida de aire para ayudar a disipar el calor.

5. Presione el botón "Amarillo" una vez más para elegir el color durante 10-15 minutos.
6. Use un protector de ojos y recuéstese para relajarse.
7. Después del tratamiento, aplique suero u otro producto para el cuidado de la piel para hidratar la piel.
8. 10-15 minutos para cada tratamiento; 3-4 tratamientos por semana y reducir a 1-2 tratamientos por semana una vez que se muestre el resultado.

### **Atencion importante**

- ◆ No use las manos mojadas para operar o manipular el enchufe y el interruptor de encendido, para no causar una descarga eléctrica y causar un incendio.
- ◆ Desconecte los enchufes a tiempo cuando el enchufe esté limpio o no se use, para no causar problemas o fugas.
- ◆ No permita que los niños, los ancianos o los débiles operen, para no causar descargas eléctricas o lesiones.
- ◆ Evite mirar la luz directamente durante mucho tiempo.
- ◆ Cuando la operación no lleva un espejo protector, no busque por mucho tiempo.
- ◆ Los usuarios deben cerrar los ojos cuando se cuiden la cabeza o el pecho, llevar gafas protectoras o con un algodón en pasta húmeda del párpado.

### **Taboo**

1. Personas con enfermedades cardíacas.
2. Personas con enfermedades mentales.
3. Personas con hipertensión.
4. Personas con enfermedades de la piel o piel infecciosa.
5. Personas con alergias leves o que toman medicamentos alérgicos.
6. Personas con tiropatía.
7. Persona epilepsia.
8. Mujeres embarazadas.

## Parametros Tecnicos

<b>Descripcion</b>	Domo fotodinamico
<b>Voltaje</b>	AC110/220V,60/50 Hz
<b>Entrada</b>	DC12V,2A
<b>Poder</b>	32 W
<b>Colores</b>	Cuatro
<b>Tamaño</b>	36*25*16 CM
<b>Peso neto</b>	2.8 KG

# Clasificación de Riesgos Sanitarios

*Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con*

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos. Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283,

1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.